

# MET LIFTER



**Лестничный гусеничный подъемник**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                                            |         |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Введение                                                   | стр. 3  |
| 2.  | Технические характеристики                                 | стр. 3  |
| 3.  | Условия эксплуатации                                       | стр. 3  |
| 4.  | Изделие в деталях                                          | стр. 4  |
| 5.  | Порядок сборки                                             | стр. 4  |
| 6.  | Складывание изделия                                        | стр. 5  |
| 7.  | Перемещение по лестнице                                    | стр. 5  |
| 8.  | Установка, зарядка и техническое обслуживание аккумулятора | стр. 6  |
| 9.  | Советы для первичного использования                        | стр. 6  |
| 12. | Техника безопасности                                       | стр. 7  |
| 13. | Техническое обслуживание и уход                            | стр. 9  |
| 14. | Комплект поставки                                          | стр. 10 |
| 15. | Гарантийные обязательства                                  | стр. 10 |

### **Внимание!**

*\* Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

*\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.*

# 1. Введение

Лестничный гусеничный подъемник MET Lifter предназначен для комфортного и безопасного перемещения как по лестничным пролетам, так и по улице при помощи сопровождающего.



Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия, особенно с приведённой ниже инструкцией по технике безопасности в разделах 11 и 12.

Производитель не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающие из-за неправильного использования изделия.

Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

Противопоказания к использованию изделия:

- психические расстройства,
- нарушения зрения,
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,
- потеря функциональности обеих рук,
- нарушения координации движений и статики,
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата,
- сердечная недостаточность,
- наркотическое или алкогольное опьянение.

## 2. Технические характеристики

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Ширина сиденья, мм                     | 510          |
| Ширина коляски (по крайним точкам), мм | 630          |
| Привод                                 | Механический |
| Вес, кг                                | 20           |
| Грузоподъемность, кг                   | 120          |
| Диаметр задних колес, мм               | 300          |
| Диаметр передних колес, мм             | 120          |

## 3. Условия эксплуатации

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Изделие предназначено для перемещения по твердым покрытиям. Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия (скорость, устойчивость, запас хода и т.д.)

При недостаточном опыте использования изделия рекомендуем перед началом его активного использования тренироваться в обращении с изделием.

Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.

## 4. Изделие в деталях



- 1 – Кнопки управления верх/вниз, аварийное отключение всех движущихся механизмов
- 2 – Включение/отключение питания, разъем для зарядки
- 3 – Индикатор уровня заряда аккумулятора
- 4 – Кронштейн для складывания/ раскладывания /фиксации гусеничного шасси
- 5 – Кнопка удлинения гусеничного шасси
- 6 – Предохранитель гусеничного шасси
- 7 – Крепежная пряжка для установки подголовника
- 8 – Переключение сцепления
- 9 – Кнопки раскладывания / складывания гусеничного шасси



Старайтесь избегать ударов и повреждений панели управления.  
При попадании напитков или еды, панель необходимо сразу же очистить.

## 5. Порядок сборки

### 5.1.



Перед использованием убедитесь, что опорный стержень под сиденьем вошел в паз замка.

Предупреждение: Перед использованием убедитесь, что перекладина зафиксирована!

### 5.2. После посадки в кресло, пристегните ремень безопасности.

5.3.



Высоту подъемного рычага можно регулировать тремя передачами.

Потяните рычаг вверх и одновременно поверните заднюю панель, установив ее на фиксированную передачу для автоматической блокировки.

5.4. Управление гусеничным подъемником.

Управление гусеничным подъемником осуществляется посредством кронштейна. Нажатие на кронштейн с красной стрелкой собирает гусеничное шасси за ненадобностью. Осторожно потяните предохранитель с красной стрелкой на себя, гусеничное шасси автоматически развернется в рабочее состояние.



## 6. Складывание изделия



Выдвиньте кронштейн с красной стрелкой вперед, одновременно складывая кресло.

## 7. Перемещение по лестнице




1. Во избежание несчастных случаев необходимо пристегнуть ремень безопасности.
2. Разверните гусеничное шасси.
3. Установите рычаг в нужное положение.
4. Подключите питание и функцию аварийной остановки на панели управления.
5. Перед подъемом по лестнице необходимо плотно прижать рулевую тягу, чтобы убедиться, что гусеничное шасси плотно прикреплено к лестнице.
6. Нажмите и удерживайте кнопку "Подняться".
7. Прежде чем спускаться вниз, кресло следует сначала наклонить на ровной поверхности, а затем транспортировать к лестнице.



Во избежание несчастных случаев необходимо пристегнуть ремень безопасности

## 8. Установка, зарядка и техническое обслуживание аккумулятора (меры предосторожности)

1. Вставьте батарейку в гнездо по направлению прорези, с помощью ключа зафиксируйте батарейку и извлеките ее. Сначала вставьте ключ, а затем поверните его влево, чтобы извлечь.
2. Своевременно заряжайте аккумулятор. Если он не используется в течение длительного времени, зарядка раз в месяц займет около 5-6 часов. При полной зарядке зарядное устройство загорится зеленым, тогда зарядное устройство можно отсоединить от сети.
3. Аккумулятор следует отключать от порта зарядки после каждого использования. Если аккумулятор поврежден из-за того, что не был своевременно отключен от порта зарядки, гарантия на него не распространяется.
4. Необходимо регулярно проверять крепление каждого винта в кресле и электрическую цепь кресла, чтобы исключить короткие замыкания.
5. Не следует заряжать кресло в случае неисправности.
5. Срок службы батареи составляет около трех лет, по истечении срока ее следует заменить.
9. На дисплее аккумулятора загораются три зеленых огонька, указывающих на полный заряд. При зарядке сначала подключите порт зарядки аккумулятора, а затем подключите источник питания.
10. Регулярно регулируйте натяжение направляющей.

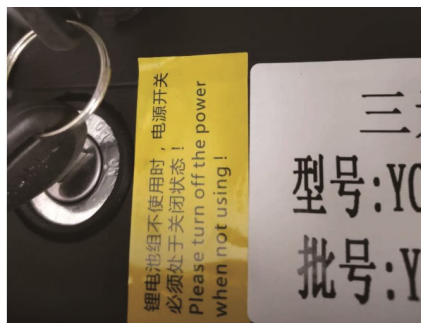


Зарядка должна производиться под наблюдением персонала.

## 9. Советы для первичного использования

При недостаточном опыте перемещения на электрическом кресле-коляске есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем Вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Найдите открытое пространство, например, в парковой зоне, и попросите сопровождающего помочь Вам практиковаться, пока Вы не сможете уверенно управлять изделием.</p> <p>Прежде чем садиться в изделие, убедитесь, что питание отключено. С помощью кнопки регулирования скоростного режима выберите комфортную скорость для тренировки.</p> <p>Мы рекомендуем Вам выбрать самый медленный режим, пока Вы не освоитесь с управлением.</p> |
|  | <p>После того, как Вы освоили движение вперёд, попрактикуйтесь совершать повороты в виде латинской буквы S во время движения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Теперь потренируйтесь двигаться назад.</p> <p>Внимание! В целях безопасности используйте минимальный скоростной режим при движении назад.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 10. Техника безопасности
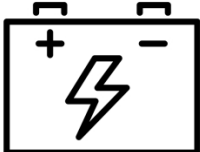
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Соблюдайте правила дорожного движения и не приближайтесь слишком близко к другим транспортным средствам.</p> <p>Не превышайте максимальный вес пользователя при управлении изделием.</p> <p>Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения.</p>  |
|  | <p>Всегда проверяйте, полностью ли заряжены батареи, прежде чем отправляться на прогулку.</p> <p>Всегда заряжайте изделие в хорошо проветриваемом помещении.</p> <p>Не нажимайте кнопку/ключ включения / выключения контроллера во время движения изделия.</p> |
|  | <p>Во время движения держите руки на панели управления или подлокотниках, а ноги – всегда на подножке.</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Избегайте экстренного торможения и резких поворотов на высокой скорости. Всегда снижайте скорость перед поворотом.                  |
|    | Убедитесь, что при движении задним ходом нет препятствий. Используйте самую низкую скорость при движении задним ходом               |
|    | Не пытайтесь преодолевать ступеньки высотой более 21 см.                                                                            |
|   | Не пересекайте разрывы дорожного покрытия шириной более 10 см.                                                                      |
|  | Не используйте изделие для перемещения по мягким, неровным или незащищенным поверхностям, таким как трава, мягкая земля или гравий. |
|  | Не въезжайте на склоны крутизной более 10 °.                                                                                        |
|  | При подъёме по склону сидите в изделии прямо. Повороты туловища или ног могут привести к потере равновесия и опрокидыванию изделия. |
|  | Не допускайте боковой уклон изделия более 3 ° – это может привести к опрокидыванию за счёт смещения центра тяжести.                 |
|  | Снижайте скорость при спуске. При торможении на спуске требуется больше времени для полной остановки изделия.                       |



Не садитесь и не вставайте с изделия без острой необходимости, если Вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что изделие выключено.

## 11. Техническое обслуживание и уход

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок его эксплуатации. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

- Раз в месяц проводить визуальный осмотр состояния рамы, соединений, передних и задних колес, подножек и подлокотников на отсутствие люфтов и видимых дефектов (например, сколы, трещины, повреждения кабелей, расшатанные соединения и т.д.).
- Особое внимание уделяйте состоянию быстроизнашивающихся деталей (подшипников, покрышек колёс и т.д.).
- Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений – они не должны крутиться от руки без сопротивления.
- Регулярно проверяйте состояние спинки и сиденья, а также ремня безопасности, если он предусмотрен комплектацией.
- Регулярно очищайте неметаллические поверхности изделия и крышки неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.
- При попадании жидкостей на изделие вытирайте его насухо. При попадании морской воды смойте соль салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем вытрите изделие насухо.
- Панель управления изделия – водонепроницаемая, однако, чрезмерное попадание воды может ухудшить ее работу.
- Не подвергайте панель управления нагреву от электроприборов.
- Регулярно проверяйте панель управления на наличие визуальных повреждений.



При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.



Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия!  
Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии!

## 12. Комплект поставки:

- изделие – 1 шт.;
- аккумулятор – 1 шт.;

- зарядное устройство – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

### 13. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

#### Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ м.п.

Продавец: \_\_\_\_\_