

МЕТ МК-260

Кресло-коляска компактная складная

Руководство пользователя



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Показания

Кресло-коляска МЕТ МК-260 предназначена для индивидуального использования людьми с полной или частичной утратой способности передвижения при перемещении самостоятельно или с посторонней помощью.

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски МЕТ МК-260 противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потере функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания.
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- При посадке и высадке с кресла-коляски МЕТ МК-630 колеса необходимо поставить на тормоза.
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед.
- Запрещается эксплуатация неисправного изделия, в частности, с нерабочими тормозами.
- Не используйте инвалидную коляску на песке, пересеченной местности или на мокрой и скользкой поверхности.
- Не используйте ручной тормоз для замедления спуска по склону. Резкое изменение направления движения при спуске по склону может привести к нестабильности или возможному опрокидыванию.
- Не подсоединяйте ничего к колесам. Это может привести к повреждению инвалидной коляски, нарушению равновесия инвалидной коляски и травме пользователя.
- Всегда используйте тормоза, когда входите в лифт или поднимаетесь на нем или выходите.
- Никогда не превышайте максимальную нагрузку и не используйте инвалидную коляску для перевозки более одного человека.
- Для надлежащей защиты от возможных препятствий расстояние между подставками для ног должно составлять не менее 7 см от земли.
- Никогда не вставляйте на подножки. Это приведет к опрокидыванию кресла-коляски и травме пользователя.
- Несанкционированная модификация и/или использование деталей, не принадлежащих поставщику, приведет к аннулированию гарантии на изделие и может привести к травме пользователя или повреждению кресла-коляски.

4. Эксплуатация кресла-коляски

4.1. Распаковка и сборка

Достаньте все детали из коробки. Для приведения коляски в состояние эксплуатационной готовности достаточно выполнить несколько простых операций:

1. Разложите коляску. Для этого нажмите ладонями на трубы сиденья.



2. Установите распорку. Для установки распорки необходимо: с левой стороны закрепить ее фиксатором, с правой - зафиксировать болтовым соединением.



3. Установите подножки и опустите опоры для стоп.



4.2. Транспортировка

Для того чтобы легко транспортировать коляску, достаточно выполнить несколько простых операций:

1. Поднимите опоры для стоп и откиньте подножки.



2. Сложите коляску, потянув за центр сиденья.



3. Подножки и опоры для стоп: установка, регулировка, снятие

<p>Подножки регулируются по высоте.</p> <p>Чтобы отрегулировать подножку, необходимо отпустить фиксатор.</p> <p>Затем сжать пружинные фиксаторы с обеих сторон, установить нужное положение.</p>	
<p>Для регулирования подножек по углу наклона достаточно установить подножку под требуемым углом.</p> <p>Чтобы вернуть подножку в исходное положение, нажмите фиксатор и опустите подножку</p>	

6. Техническое обслуживание и ежемесячные проверки

Рекомендуется ежемесячно проверять соединения передних колес, подножек, приводных колес на отсутствие люфтов, степень загрязнения подшипников, давление в шинах, степень износа деталей складной рамы, резьбовые соединения; проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей (например, покрышек колес, подшипников).

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов инвалидной коляски, способствуя их безотказной работе:

- Необходимо периодически снимать передние колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте покрышки и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.
- Приводные колеса нужно периодически снимать и осматривать на предмет повреждения и очищения от грязи. Вставные оси колес смазываются машинным маслом. Покрышки и неметаллические поверхности очищаются неагрессивным чистящим средством.
- Избегайте попадания на коляску морской воды. Если это все же случилось, смойте соль

салфеткой, смоченной в пресной воде, затем вытрите коляску насухо.

- Периодически проверяйте затяжку резьбовых соединений. Любые резьбовые соединения не должны крутиться от руки без сопротивления.

Настоятельно рекомендуется ежегодно доставлять кресло-коляску квалифицированному специалисту для тщательного осмотра и технического обслуживания/ремонта.

Рекомендации по уходу:

- Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с мягкими моющими средствами.
- Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.
- Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Технические характеристики

Ширина сиденья, мм	450
Ширина коляски (по крайним точкам), мм	840
Привод	Механический
Вес, кг	8
Грузоподъемность, кг	110
Диаметр задних колес, мм	190
Диаметр передних колес, мм	190

Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инвалидной коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.

	<p>Перед первой поездкой необходимо ознакомиться и в дальнейшем соблюдать положения данной инструкции по эксплуатации.</p> <ul style="list-style-type: none">- Необходимо соблюдать указания по технике безопасности в отношении механических кресел-колясок, содержащиеся в брошюре.- Перед первой поездкой дети вместе с родителями или сопровождающим лицом должны прочесть данную инструкцию по эксплуатации, а также брошюру «Указания по технике безопасности в отношении механических кресел-колясок» и соблюдать требования, содержащиеся в указанных документах!
---	--

8. Приемка

Все изделия компании МЕТ проходят проверку на нашем предприятии на отсутствие дефектов и упаковываются в специальные картонные коробки.

После получения изделия мы просим Вас проверить— лучше всего, в присутствии доставившего изделие лица — на наличие возможных повреждений, полученных во время транспортировки. Если Вы считаете, что изделие получило такое повреждение во время транспортировки, то Вам следует:

- а) провести опись дефектов товара — лицо, доставившее изделие, обязано это сделать.
- б) составить соответствующее заявление об уступке требований поставщику, возникших на основании данных повреждений.
- в) отправить в наш адрес накладную, опись дефектов товара и заявление об уступке требований.

При несоблюдении данного указания или сообщении о повреждении после приемки товара, данный ущерб нами не признается.

9. Указания по технике безопасности

- Запрещается бросать или ронять детали коляски.
- Следует надлежащим образом использовать такие съемные детали, как, например, боковые элементы и подножки. Только так можно обеспечить их продолжительную работу.
- При движении в транспортном потоке необходимо иметь пассивное освещение!
- Инвалидную коляску следует парковать только поставленной на тормоз.


Для обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации Вашей инвалидной коляски необходимо соблюдать следующие параметры:

- Стабильность и равновесие

Конструкция Вашей коляски позволяет ей сохранять стабильность при проведении Вами обычных бытовых работ. Любое Ваше движение в коляске отражается на положении центра тяжести, что может привести к опрокидыванию коляски и Вашему падению. Для повышения безопасности в то время, когда Вы много двигаетесь или перемещаете вес своего тела с одного места на другое, мы рекомендуем Вам использовать ремни безопасности.

- Распределение веса (рис. 1)

Каждый день пользователю приходится наклоняться, опираться на локоть, садиться в свою коляску или покидать ее. Данные движения вызывают нарушение равновесия, изменение центра тяжести (G) и распределения веса в коляске.

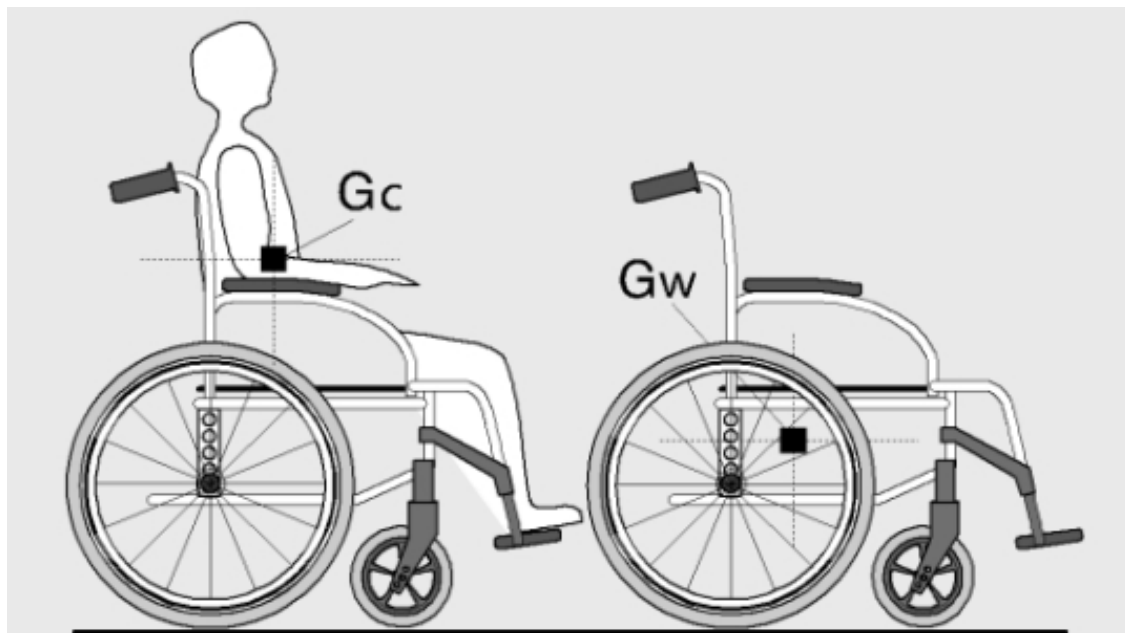

1


- Максимальный вес

Максимальный рекомендуемый вес пользователя составляет 125 кг. При этом важным фактором является степень активности пользователя. Например, активный пользователь, весящий 75 кг, может подвергать свою коляску более высоким нагрузкам, чем пользователь, весящий 100 кг.

Поэтому мы рекомендуем Вам выбирать модель коляски в соответствии со своим стилем жизни и после консультации с персоналом специализированного магазина.


1.1. Как дотянуться до какого-либо предмета, сидя в коляске

Пределы сохранения равновесия при достижении какого-либо предмета, описанные в рис. 2, 3 и 4, определены на основании исследований, проведенных с участием репрезентативной группы пользователей инвалидных колясок. - За пределы коляски можно протягивать только руки (рис. 2). - Туловище и голова должны находиться в пределах сидения (рис. 3).

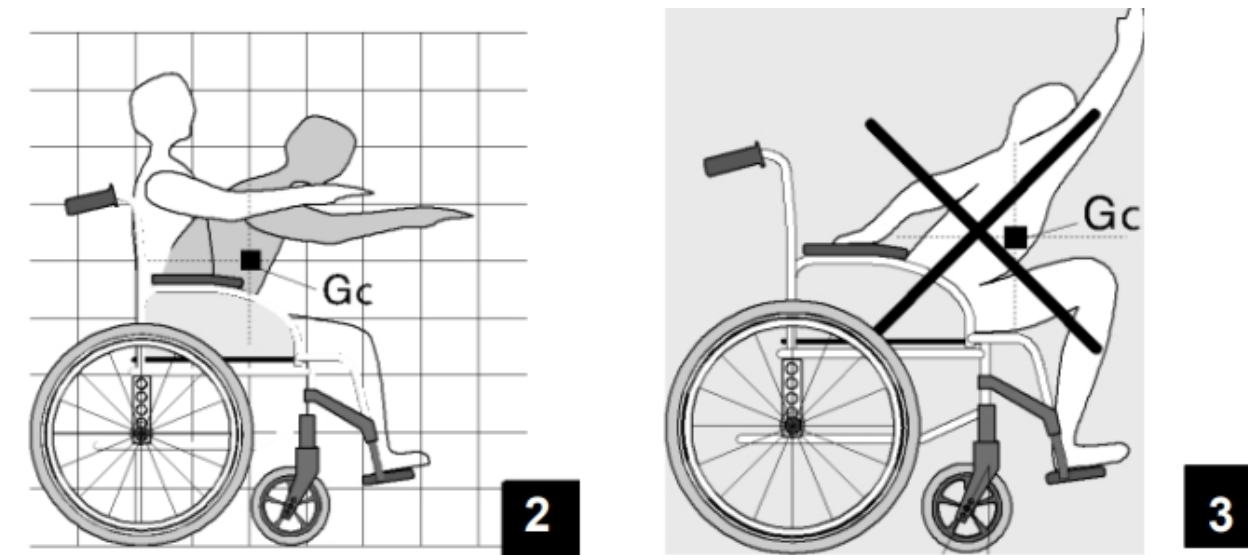


1.1.1 Наклон вперед

Не наклоняйте грудную клетку над подлокотником (рис. 4). Чтобы дотянуться до предмета, находящегося перед Вами, Вам необходимо опереться и наклониться вперед. Поэтому для сохранения стабильности и равновесия Вы должны использовать в качестве вспомогательного средства передние колеса (направив их вперед). Точное расположение колес имеет существенное значение для обеспечения Вашей безопасности (рис. 5).

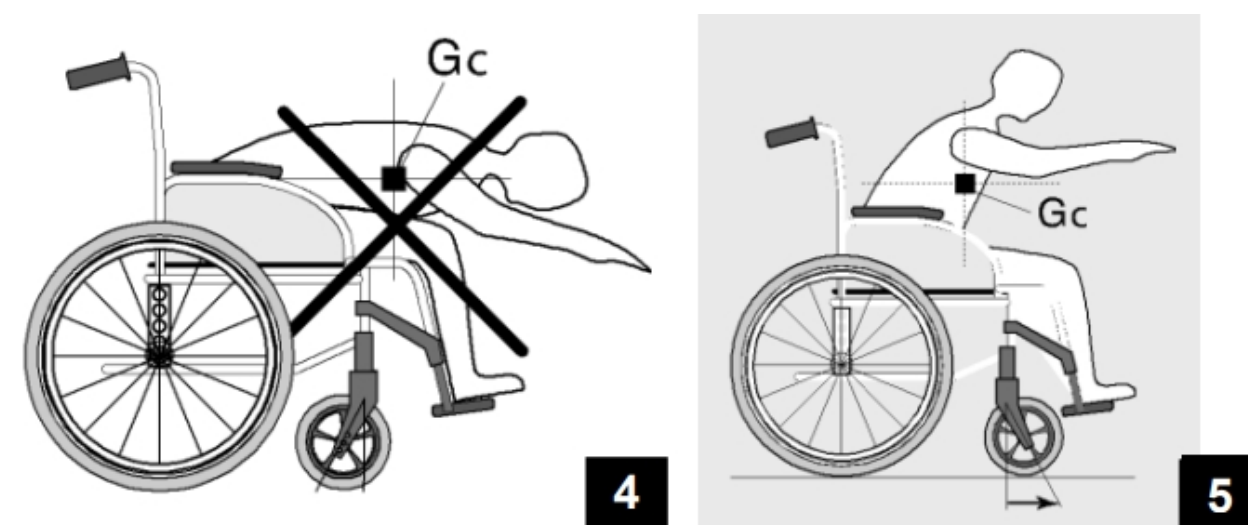

1.1.2 Наклон назад

Подведите коляску как можно ближе к требуемому Вам предмету, так чтобы иметь возможность схватить его, просто протянув руку, сохраняя при этом в коляске нормальное сидячее положение. Ни в коем случае не откидывайтесь назад, так как это может привести к опрокидыванию коляски (рис. 6 и 7).

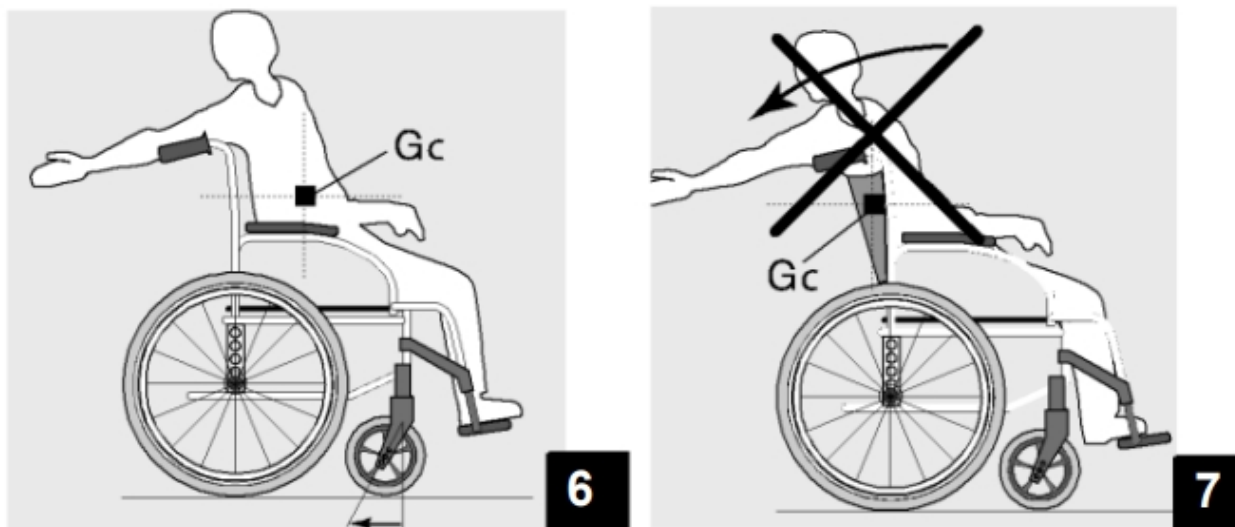

1.2. Пересадка в другое сидение

1.2.1 Пересадка вбок

Данную пересадку Вы можете осуществить самостоятельно, при условии наличия у Вас соответствующей подвижности и мышечной силы.



- Расположите коляску как можно ближе к месту, на которое Вы хотите пересест, установив при этом управляющие колеса прямо. Поставьте задние колеса на стояночные тормоза. Переместите свое тело на требуемое место (рис. 8);
- В течение пересадки под Вами не будет находиться никакой опоры; по возможности используйте помост для пересадки;
- Если Вы можете стоять прямо и, если Ваше тело обладает достаточной подвижностью и силой, Вы можете самостоятельно пересест вперед. Сложите опору для ног, отведите подножки / подставки для ног в сторону, чтобы освободить себе путь, наклоните тело вперед, опираясь на оба подлокотника, и выпрямитесь. Затем переместите свое тело в направлении места, на которое Вы хотите сесть, распределяя при этом свой вес на руки (рис. 9А).



1.2.2 Пересадка вперед (рис. 9В)

Если Вы можете стоять и, если Ваше тело обладает достаточной силой и подвижностью, Вы можете осуществить пересадку вперед. Если данное перемещение представляет для Вас трудности, мы рекомендуем Вам обеспечить себе поддержку со стороны сопровождающего лица или помощника, чтобы сделать пересадку наиболее легкой и безопасной. Установите оба тормоза и убедитесь, что оба управляющих колеса направлены вперед. При пересадке Вы ни в коем случае не должны опираться на тормоза. Возьмитесь надежно за подлокотники, стараясь не повредить ногтями обивку. Обопритесь на руки и слегка приподнимите свое тело. Сопровождающее лицо поможет Вам завершить пересадку.

! Предупреждение - Подведите коляску как можно ближе к тому месту, на которое Вы намерены пересесть

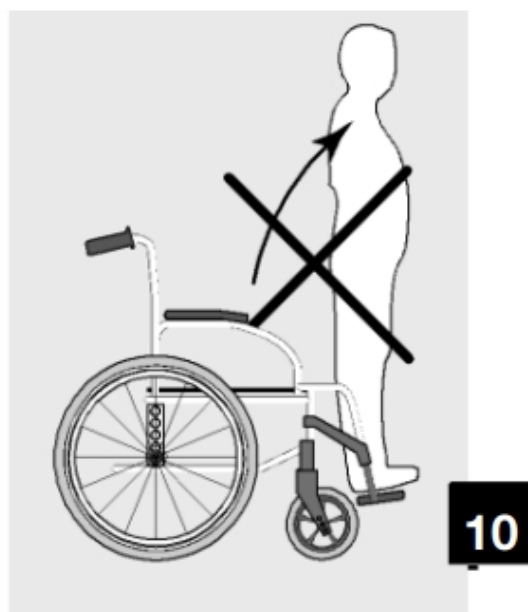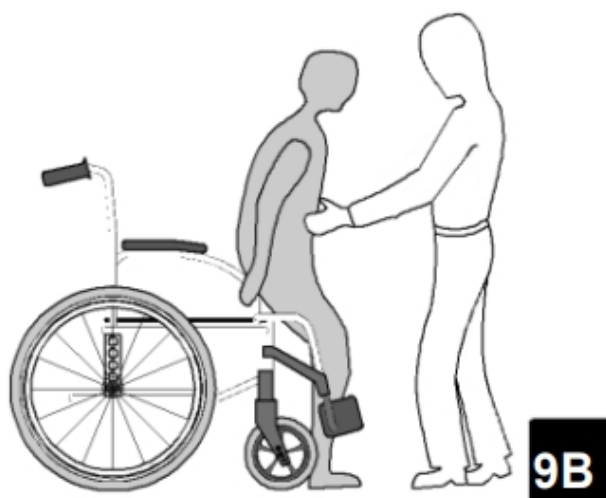

- Для предотвращения повреждения элементов коляски или обивки, а также во избежание опрокидывания коляски вперед, садьтесь при пересадке как можно дальше от края сидения;

- Поставьте коляску на оба тормоза; при этом их ни в коем случае нельзя использовать при пересадке в качестве опоры;

- Сидя в коляске и при пересадке ни в коем случае не опирайтесь на подножки (рис. 10).

1.3. Наклон коляски (на задних колесах)

Для обеспечения Вашей безопасности данная операция должна осуществляться сопровождающим Вас лицом. Ваш помощник должен знать, какие усилия ему для этого потребуются и принять правильную позу для уменьшения нагрузки на свою спину (осуществляя наклон коляски, необходимо выпрямить спину и согнуть ноги в коленях). Для наклона коляски помощник должен крепко ухватиться за ручки и убедиться, что они надежно закреплены. Помощник предупреждает пользователя, что он сейчас наклонит коляску, просит его откинуться на спинку и проверяет, не касаются ли руки и ноги пользователя одного из колес. После этого помощник ставит свою ногу на перекладину и, избегая резких движений, наклоняет коляску назад, пока не почувствует разницу в распределении веса (равновесие достигается под углом ок. 30°). В этот момент коляска может легко преодолеть препятствие. После этого помощник медленно и плавно опускает переднюю часть коляски на пол, надежно удерживая коляску за ручки.

Предупреждение

- Съемные элементы коляски, напр., подлокотники или подножки, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны использоваться при подъеме тела в качестве опоры. Они могут случайно отсоединиться и травмировать пользователя или помощника.

- Не опускайте коляску слишком резко, даже если ее колеса не достают до пола всего на несколько сантиметров, так как это может травмировать пользователя коляски.

1.4. Наклон коляски, преодоление бордюров

Выезд на тротуар:


- Метод 1 (рис. 11)

Помощник ставит коляску передом к тротуару. Он наклоняет коляску назад, пока передние колеса не поднимутся до уровня тротуара. Затем он передвигает коляску вперед, пока задние колеса не упрутся в бордюр, и толкает коляску вперед, пока задние колеса не преодолеют край бордюра.

- Метод 2 (рис. 12)

В этом случае помощник встает на тротуар и подводит коляску задними колесами к бордюру. Он наклоняет коляску назад до достижения равновесия и плавно тянет коляску на себя, пока задние колеса не окажутся на тротуаре. После этого он опускает передние колеса, убедившись, что коляска отведена от края тротуара на достаточное расстояние и что передние колеса встанут на тротуар.

Съезд с тротуара: Помощник подводит коляску передом к краю тротуара и наклоняет ее назад до достижения равновесия. Затем он перемещает коляску вперед, пока задние колеса не встанут на землю. После этого он плавно опускает передние колеса.

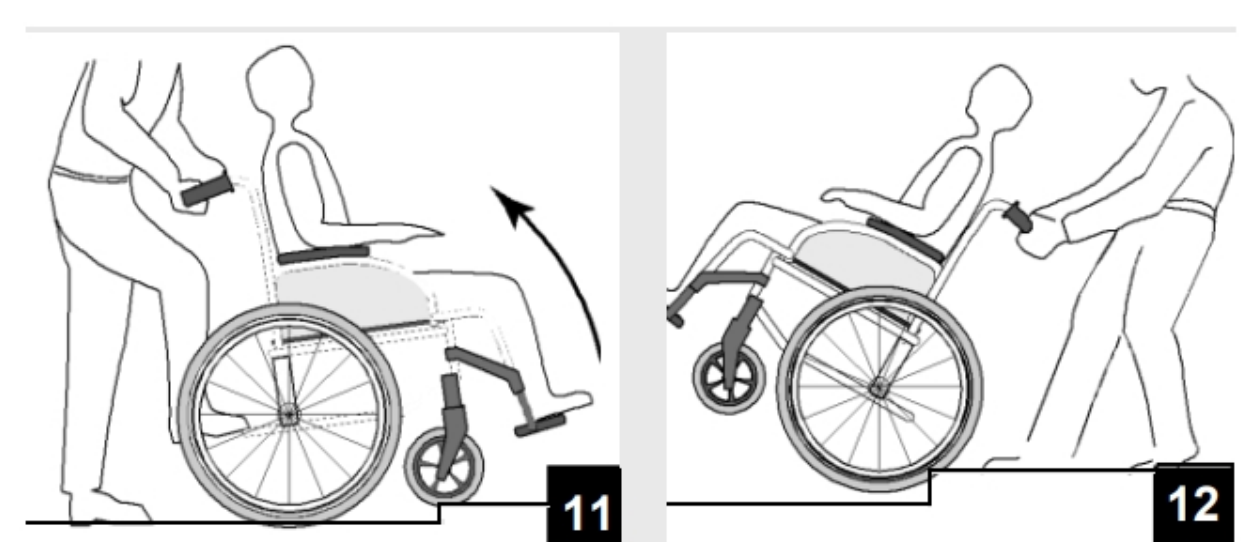

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте. Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____
