

МЕТ ТВ-210

Тележка медицинская для
перевозки больных
внутрибольничная



Руководство по эксплуатации



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества

1. Введение

Изделие предназначено для перемещения пациентов между палатами и помещениями в больницах и других лечебных учреждениях.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Изделие поставляется полностью смонтированным или разобранным на несколько частей. Перед использованием изделия оно должно быть полностью собрано.

Если в комплектации изделия отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение изделия

Колеса изделия не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по излишне неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Действия перед началом эксплуатации

- Перед использованием изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия.
- Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Всегда держите колеса заблокированными, когда не требуется перемещение изделия.
- Перед использованием функций изделия, убедитесь, что вокруг и под изделием достаточно места для маневра.
- Убедитесь, что боковые ограждения работают исправно и фиксируются в поднятом положении.
- Если изделие хранилось на холоде, перед началом эксплуатации оставьте его во внутреннем помещении на 4-5 часов.

3. Технические характеристики

Габариты изделия	215*84 см
Высота ложа	57-82 см
Угол наклона спинной секции	0 - 72°
Угол наклона бедренной секции	0 - 40°
Тренделенбург / Антитренделенбург	15°
Диаметр колесных опор	200 мм
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	200 кг

4. Изделие в деталях




1 – Спинная секция ложа
 2 – Ножная секция ложа
 3 – Боковые ограждения
 4 – Телескопические колонны
 5 – Защитные бамперы по углам ложа

8 – Педаль регулировки высоты
 9 – Педали регулировки угла наклона TR / ATR
 10 – Педали регулировки пятого колеса
 11 – Инфузионная стойка

5. Описание изделия

- 5.1. Изделие представляет собой конструкцию из подвижного основания на колесных опорах, подъемно-опускных механизмов колонного типа и ложа.
- 5.2. Подвижное основание представляет собой неразборный каркас из стальных профильных труб различного сечения, покрытых полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств.
- 5.3. Подвижное основание закрывается сверху защитным кожухом из ABS-пластика, обеспечивающим защиту от повреждений и попадания влаги на основание изделия.
- 5.4. На подвижное основание установлены две механогидравлические цилиндрические телескопические колонны, на которые установлено ложе изделия.
- 5.5. На подъемно-опускные механизмы колонного типа устанавливается ложе изделия.
- 5.6. Ложе изделия представляет собой рамное основание из профильных стальных труб различного сечения с ложементами из HPL-пластика. Ложе рентгенопрозрачное. На каждом углу ложа находятся защитные бамперы.
- 5.7. Регулировка угла наклона спинной секции производится при помощи пневматического привода. Ручка блокировки и разблокировки привода находится под спинной секцией ложа.
- 5.8. Регулировка высоты ложа производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей.
- 5.9. Регулировка угла наклона положения Тренделенбург / Антитренделенбург производится с помощью механогидравлических колонн и специальных педалей, расположенных с обеих сторон изделия.
- 5.10. На рамное основание ложа устанавливаются опускающиеся металлические боковые ограждения.
- 5.11. Изделие установлено на колесные опоры диаметром 200 мм, изготовленные из немаркой резины.
- 5.12. Колесные опоры оборудованы системой блокировки.
- 5.13. Изделие комплектуется матрасом, который прикрепляется к ложу при помощи специальных липучих лент. Наполнитель матраса – вязкоэластичный пенополиуретан, съемный чехол матраса – из непромокаемой ткани.
- 5.14. В зависимости от выбранной комплектации изделие может комплектоваться инфузионной стойкой и столиком

6. Регулировки изделия

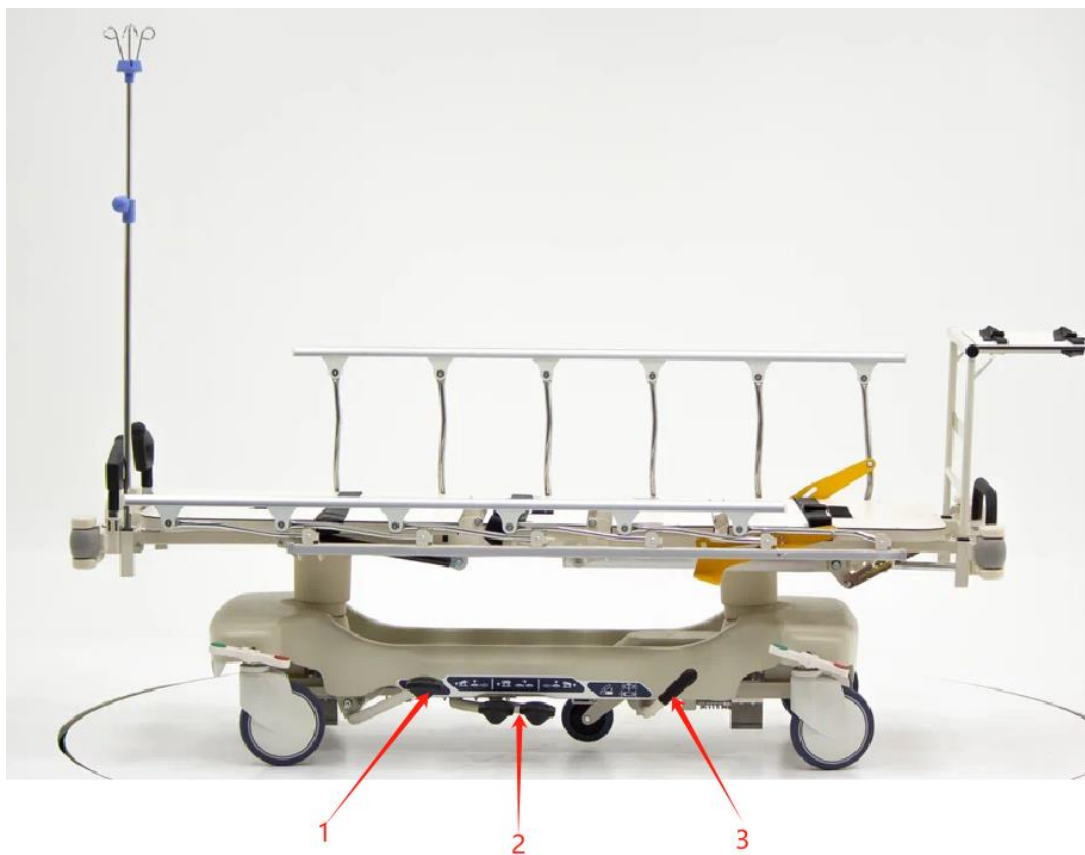

1 – Педаль регулировки высоты

2 – Педаль регулировки угла наклона TR /ATR

3 – Педаль, опускающая/ поднимающая
пятое колесо



- Ручка регулировки угла наклона ножной секции

7. Колеса и система блокировки колес



Колесные опоры изделия оборудованы системой блокировки:

- Горизонтальное положение педали – разблокировка всех колесных опор.
- Нажатие на педаль в направлении 1 – блокировка всех колесных опор.



Нельзя перемещать изделие, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать изделие, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

8. Боковые ограждения



Боковые ограждения фиксируются в поднятом положении. Потяните за фиксатор 1 для разблокировки и сложите боковое ограждение. Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, поднимите его вверх до щелчка.

9. Правила эксплуатации

Не вносите изменения в конструкцию изделия и не устанавливайте на него никаких деталей, не предусмотренных производителем.

Перед каждым использованием изделия убедитесь, что:

- места вокруг изделия достаточно для регулировок;
- боковые ограждения беспрепятственно поднимаются и опускаются;
- механизм блокировки боковых ограждений функционирует;
- провода других приборов не должны попадать под колеса или в конструкцию изделия.

В процессе эксплуатации изделия:

- не допускайте зажимания его элементами пациента или других лиц;
- если изделие перемещается вместе с пациентом, боковые ограждения обязательно должны быть подняты и зафиксированы;
- во время регулировок изделия колеса должны быть заблокированы;
- не оставляйте пациента на изделии без присмотра!



При нарушении функционирования изделия прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

10. Техническое обслуживание и уход

- 10.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, проверяйте и подтягивайте ослабленные винтовые соединения.
- 10.2. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие изношенных или сломанных деталей, следов коррозии, а также целостность покрытия.
- 10.3. Для очистки пользуйтесь мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Допускается использование любых чистящих средств на водной основе. Не допускается применение абразивных материалов и едких веществ. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
- 10.4. После очистки и дезинфекции протирайте изделие насухо.



Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

11. Транспортировка и хранение

- 11.1. Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во

время движения.

- 11.2. Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлов.

	<p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.• Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.• Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.• Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки.
---	---

12. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному паспорту изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____