



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровати функциональные медицинские электрические

производства Хэбэй Байцян Медикал Егуипмент Мануфактуринг Со.,ЛТД, Китай
Hebei Baiqiang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd
Hexiying Village of North Changtan Road Dachang County, Hebei Province, China

Номер партии 022018060203-3/17

Назначение изделия.

Кровати функциональные медицинские электрические являются новой продукцией, разработанной нашими старшими научными сотрудниками и основанными на опыте ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи профессорами крупных клиник. Многочисленные полезные функции удовлетворяют различные потребности больных и медицинского персонала. Среди отличительных черт новой продукции – практичность, привлекательный внешний вид, легкость в обращении и удобство использования в отделениях больниц, поликлиник и в домашних условиях. В зависимости от конструкции, кровати делятся от трех, четырех и более секций на ложементе. Также, некоторые модели кроватей имеют функции подъема спинной и ножной секции, кардиокресло, «Тренделенбург», «Анти-Тренделенбург», регулировка по высоте и «автоконтур». А также функцией CPR (сердечно-легочная реанимация) и аккумулятор (для регионов с периодическими сбоями в электроснабжении).

Принцип конструкции:

Рама изделия: нижняя и несущая средняя выполнена из стального профиля и покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью.

Изголовья и изножья кровати легкоъемные, могут быть выполнены как из пластика со стальной трубой, так из ЛДСП и массива бука.

! Внимание! Оттенки цветов из массива бука изголовий/изножий могут несколько отличаться.

Большинство кроватей оборудовано механическим туалетным устройством, в некоторых моделях эта функция доступна в электрическом исполнении.

Колеса выполнены из полиуретана, Ø 125мм, с индивидуальными тормозами или центральным тормозом. Каждое колесо является самоориентирующимся, с возможностью поворота на 360°.

Ниже приведены общие характеристики изделий:

ГОСТы	
Соответствие требованиям национальных стандартов	ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4). ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.38-99.
Обозначение знака соответствия при сертификации	ГОСТ Р 50460-92
Транспортная маркировка грузовых мест	ГОСТ 14192-96.
Транспортировка	Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru


Упаковка	ГОСТ Р 50444-92
Условия хранения	Группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69
Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях	2А по ГОСТ Р 51609-2000

- Тип и номинал предохранителя: 250V 1.5A
- Мощность: 220V 50HZ
- Входная мощность: $\leq 260VA$
- Класс защищенности: IPX4


1. Сборка и эксплуатация

1.1 Вскройте коробку и достаньте все аксессуары из коробки.

1.2 Снимите всю упаковку с аксессуарами.

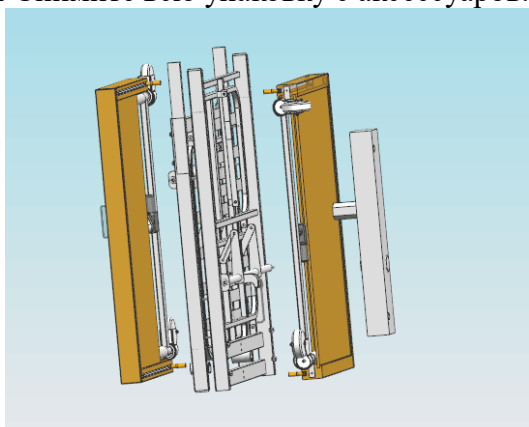

Переверните и поставьте кровать на пол.

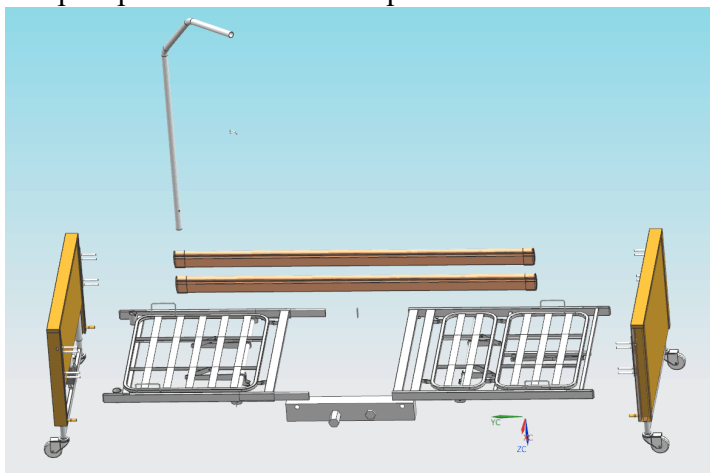

1.3 Соберите ложемент кровати и зафиксируйте 4 стопорами (находятся в коробке с запчастями).


1.4 Соберите изголовья и изножья кровати и также зафиксируйте 4 стопорами (находятся в коробке с запчастями).



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru


1.5 Установите блок управления.

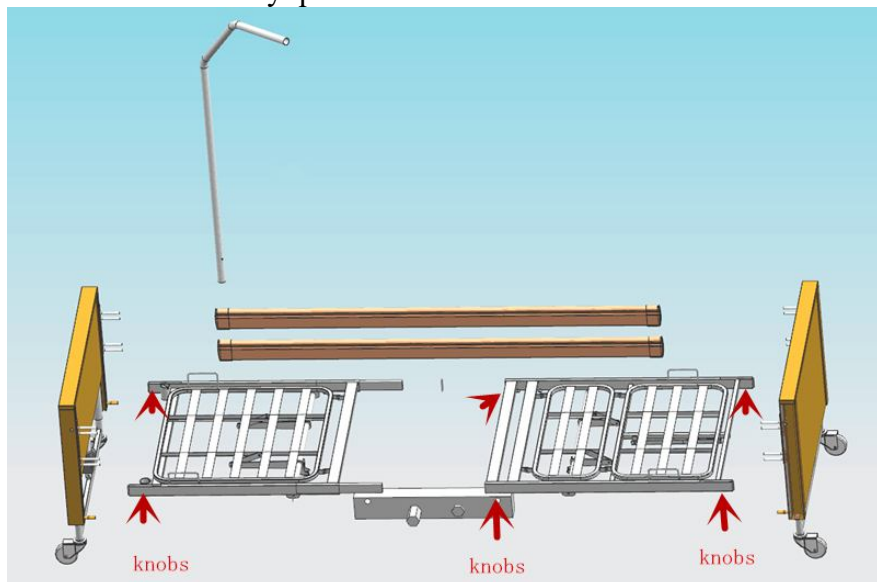

1.6 Соедините блок управления с пультом управления (который находится в коробке с запчастями).

1.7 Установите раму для подтягивания и трансфузионную стойку (необходимые детали для крепления находятся в коробке с запчастями).

1.8 Установите алюминиевые боковые ограждения и зафиксируйте их винтами.

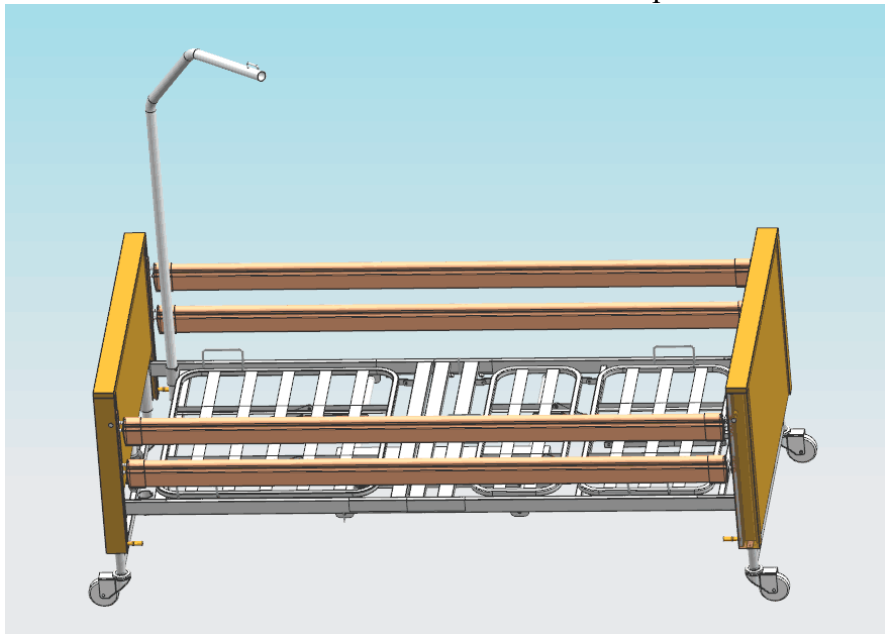

1.9 Подключите кровать к источнику питания.

1.10 Отсоедините магнитный замок блока управления.

Кровать готова к использованию.



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

2. Электрический компрессор для надувного матраса*

(1) Технические данные

Допустимое напряжение: АС 220-240В 50-60 Гц

Потребляемая мощность: не менее 20Ватт

Максимальная нагрузка: не более 150кг

(2) Использование:

Перед началом работы с компрессором, пожалуйста, прочтите инструкцию:

- Убедитесь, что на месте эксплуатации матраса отсутствуют выступающие острые предметы.
- Подсоедините шланг подачи воздуха к компрессору с одной стороны, и клапану матраса с другой
- Выставьте регулятор подачи воздуха в максимальное положение и нажмите кнопку «On». Лампочка индикатора загорится и компрессор начнет работать.
- Регулятором подачи воздуха отрегулируйте жёсткость матраса до оптимальной для больного.
- Компрессор должен эксплуатироваться и храниться в сухом и чистом помещении, защищенным от пыли и влаги.

*поставляется опционально

! Вниман и е :

1. В процессе эксплуатации изделия не допускается электромагнитное воздействие других устройств.
2. Прекратить эксплуатацию, если возникнут посторонние звуки в процессе работы.
3. Изделие выдерживает без деформации распределенную вертикальную нагрузку в виде массы в соответствии с таблицей технических характеристик.
4. Не допускается натягивания, перехлеста и спутывание силового кабеля, а также использование удлинителя.
5. Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения.
6. Не используйте боковые ограждения в качестве опоры (максимально допустимое усилие по вертикали и по горизонтали не более 15кг)
7. Выдвижение площадки под судно производите в соответствии с размерами судна, которым укомплектована кровать.
8. Не оставлять детей без присмотра рядом с работающим изделием.
9. Эксплуатировать изделие необходимо согласно инструкции.
10. Каждый раз перед использованием необходимо производить осмотр изделия, на наличие видимых дефектов и неисправностей.
11. Утилизировать упаковку необходимо согласно правилам и нормам, предусмотренным законодательством страны эксплуатации.
12. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРОВАТИ С ПОМОЩЬЮ БОКОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменить конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

3. Обслуживание и ремонт

1. Срок гарантии составляет 1 год. Если изделие долгое время не используется, его нужно проверять каждые 6 месяцев.
2. Если возникли сбои в электропитании, выньте вилку из розетки и поместите изделие в прохладное и сухое место.
3. Содержать в чистоте, использовать обычное моющее средство, без химических веществ.
4. Механические подвижные части изделия должны обрабатываться смазывающими веществами каждые полгода.
5. В случае обнаружения неисправностей изделие должно быть отправлено на ремонт техническими специалистами или возвращено производителю.
6. Смазывайте силовые узлы подъемных механизмов не реже 1 раза в 2 недели.
7. Запрещается использование изделия с признаками неисправностей!

4. Транспортировка и хранение

Изделие должно храниться в хорошо проветриваемом месте, не способствующем образованию коррозии.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах

5. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- пульт управления – 1 шт.,
- боковые ограждения – 1 комплект.,
- изголовье/изножье – 1 пара,
- рама для подтягивания – 1 шт.,
- инфузионная стойка – 1 шт.,
- прикроватный (кроватьный) или обеденный столик*,
- полка*,
- прикроватная тумбочка*,
- матрас*
- надувной матрас*
- туалетное судно*
- ванночка для мытья головы*

*опционально, поставляется в зависимости от пожеланий заказчика.



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
 ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
 р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
 г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
 тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

!Внимание

Инструменты для сборки в комплект поставки не входят

При измерениях существует допустимая погрешность (5%)

Технические характеристики

Артикул Модель	Кол-во секций	Кол-во функций	Ложемент, мм	Углы наклона секций, °/ Тип регулировки				Высота (от...до), мм	Вес, кг	Нагрузка, кг	Комп-ция*
				Спинная Тазобедренная Икроножная	Тренделенбург Анти- Тренделенбург	Автоконтур	Кардио кресло				
YG-3(ММ-92)	6	4	2050*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	135	Д/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б
YG-3(ММ-092Н)	6	4	2050*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	177	135	Л/4К/ПУ/ ТЭ/ВМ/К/Б
YG-3(ММ-092ПН)	6	3	2050*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	165	Л/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б/Вм/Н М
YG-3(ММ-192Н)	6	3	2050*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	170	Л/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б/Вм
YG-3(ММ-192ПН)	6	3	2050*960	От 0 до 75 /электрич. От 0 до 28 /электрич	-	-	+	500	112	170	Л/4К/ПУ/ ТЭ/К/Б/Вм/Н М
DB-11A (ММ-21)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	96	135	Д/4К/ПУ/ ТМ/М/К/ВМ
DB-11A (ММ-121Н)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	100	170	Л/4К/ПУ/ТЭ/В м/К/Б/Кк/По
DB-11A (ММ-021ПН)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	100	165	Л/4К/ПУ/ТЭ/В м/К/НМ/Б/Кк/ По
DB-11A (ММ-121ПН)	6	4	2100*960	От 0 до 75 /электрический От 0 до 21 /электрический	-	-	Да	490	100	170	Л/4К/ПУ/ТЭ/В м/К/НМ/Б/Кк/ По
DB-7 (ММ-77Н)			1980*920	От 0 до 83/электрический	-	-	-	500	69,5	165	ABS/4К/ПУ/Р/



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
 ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
 р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
 г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
 тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

	3	4		От 0 до 52 /электрический От 0 до 31 /электрический От 0 до 20 /растomat							По/К
DB-7 (MM-077H)	3	4	1980*920	От 0 до 83/электрический От 0 до 52 /электрический От 0 до 31 /электрический От 0 до 20 /растomat	-	-	-	500	79,2	165	Л/4К/ПУ/Р/По /К
DB-6 (MM-66AH)	5	3	2025(2250) *885	От 0 до 85 /электрический От 0 до 53 /электрический От 0 до 20 /растomat	-	-	-	320-720	98,2	165	ABS/4К/ПУ/Р/ По/К/Ак/У
DB-6 (MM-066AH)	5	3	2025(2250) *885	От 0 до 85 /электрический От 0 до 53 /электрический От 0 до 20 /растomat	-	-	-	320-720	107,9	165	Л/4К/ПУ/Р/По /К/Ак/У
DB-3(MM-79H)	6	4	2050*900	От 0 до 81 /электрический От 0 до 46 /электрический От 0 до 29 /растomat	+	-	-	360-740	144,54	180	ЦТ/ABS/ПУ/Р/ CPR/У/Ак
YG-1 (MM-194K)	3	4	2010*900	От 0 до 70 /электрический От 0 до 30 /электрический От 0 до 21 /растomat	+	-	-	400-720	112	180	4К/Л/Р
YG-1 (MM-194ДЛК)	3	4	2010*900	От 0 до 70 /электрический От 0 до 30 /электрический От 0 до 21 /растomat	+	-	-	400-720	110	180	4К/Л/Р/ДЛ

* ЦТ – центральный тормоз, 4К – тормоз на каждое колесо, А- «Автоконтур» ABS- пластик, Л-ЛДСП, СТ-сталь, Д-массив бука, М-матрас, НМ-надувной матрас, ТМ- туалетное устройство механическое, Б- боковое переворачивание, Кк – кардиокресло, Р- растomat, По- полка для одежды, К - прикроватный столик, ВМ - ванночка для мытья головы, ДЛ – деревянный ложемент

** Нагрузка – это допустимая максимальная рабочая нагрузка на ложе кровати, включая, в том числе, вес пациента, матраса, дополнительное оборудования, капельниц, пакетов и т.д.

