

МЕТ ОМЕГА

Кровать медицинская электрическая двухфункциональная, в варианте исполнения МЕТ ОМЕГА-7 HOME



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Подготовка к эксплуатации	стр. 3
4.	Пульт управления	стр. 4
5.	Положения кровати	стр. 4
6.	Очистка и дезинфекция	стр. 5
7.	Хранение кровати	стр. 5
8.	Техническое обслуживание	стр. 5
9.	Комплект поставки	стр. 5
10.	Гарантийные обязательства	стр. 6

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях. Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами. Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте данное руководство.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней человека – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 230 V 50 Hz).


3. Подготовка к эксплуатации

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи пульта управления.
5. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
6. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.



Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

4. Пульт управления

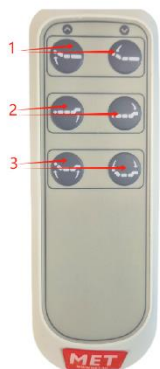


Регулировка секций кровати производится при помощи пульта.

1. Регулировка угла наклона спинной секции (вверх, вниз)
2. Регулировка угла наклона бедренной секции (вверх, вниз)
3. Одновременная регулировка углов наклона спинной и ножной секций (вверх, вниз)

5. Положения кровати


Регулировки углов наклона спинной и бедренной секций происходят бесступенчато и могут быть зафиксированы в любом промежуточном положении.

Регулировка спинной секции

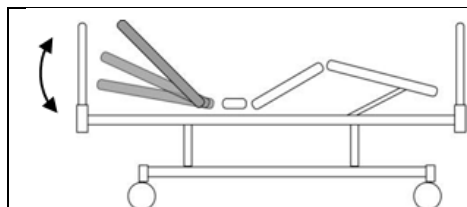


Спинная секция ложа может быть поднята до 70 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления.

Регулировка бедренной секции

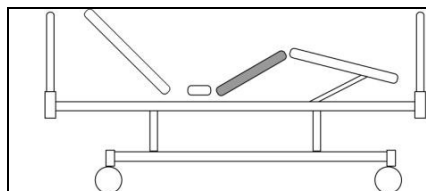

Бедренная секция может быть поднята до 40 градусов при помощи электропривода с пульта ручного управления.

Регулировка икроножной секции

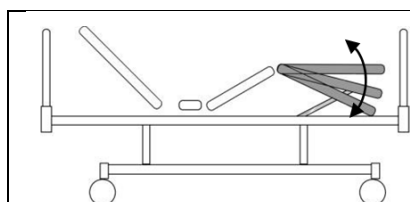

Икроножная секция ложа изменяет угол наклона от -25 до 0 градусов



Если человек без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

6. Очистка и дезинфекция

	При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

	Если произойдут какие-либо сбои в двигателе, блоке управления и ручном управлении, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии.
---	---

7. Хранение кровати

- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините штангу для подтягивания и инфузионную стойку.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

8. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
4. Проводите протяжку всех болтовых соединений.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

9. Комплект поставки

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.;
- инфузионная стойка
- штанга для подтягивания – 1 шт.

10. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____12 месяцев _____

Дата продажи: _____

м.п.

Продавец: _____

