

**Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения  
МЕТ МК-130**



**Руководство по эксплуатации**



\* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качеств

## 1. Наименование медицинского изделия.

Кресло-коляска инвалидное в варианте исполнения МЕТ МК-130

## 2. Область применения медицинского изделия.

Для использования в медицинских учреждениях и в быту

## 3. Показания к применению и назначение медицинского изделия. Потенциальные потребители .

- рассеянный склероз;
- церебральный паралич: взрослые и дети;
- частичное повреждение спинного мозга;
- неврологические расстройства;
- пациенты ортопедического профиля;
- протезирование тазобедренного сустава;
- протезирование коленного сустава / ПКС;
- гериатрические пациенты;
- спортивная травма;
- пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.

Кресло-коляска инвалидное «МЕТ» для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021 (далее по тексту - кресло-коляска или изделие). Кресло-коляска предназначено для передвижения инвалида или ослабленного человека, не способного ходить, вручную пользователем, когда он сидит или сопровождающим.

## 4. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- вес пациента выше 75 кг;
- не использовать изделие при различных специфических заболеваниях.


## 5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Чтобы правильно использовать кресло-коляску, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несёт ответственность за ущерб, возникающий при из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации. |
|  | Запрещается использовать кресло-коляску в целях, не прописанных в данном руководстве.                                                                                                                                                                                                                 |

- Если в кресле-коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.

- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите использование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресла-коляски.
- Следует помнить, что при недостаточном опыте использования кресла-коляски существует вероятность падения. Рекомендуем перед началом активного использования кресла-коляски тренироваться в обращении с ним. При преодолении неровностей дорог обязательно воспользуйтесь помощью сопровождающего.
- Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При преодолении подъемов и препятствий наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести. При эксплуатации кресла-коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

Кресло- коляска в деталях:

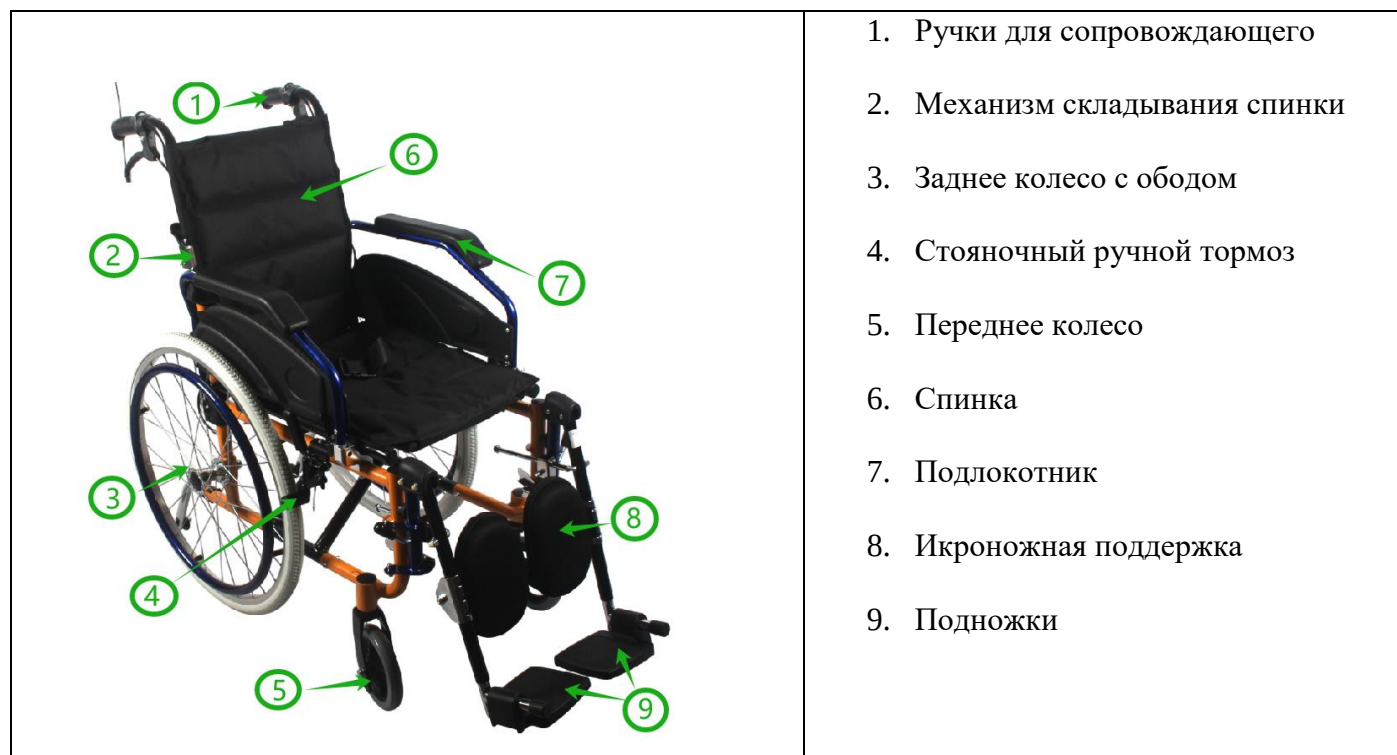


## 6. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

Производитель несёт ответственность только при использовании коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данным руководством. Производитель не несёт ответственности за повреждение вследствие неоригинальных элементов и запасных частей. Данное изделие предназначено для людей с полной или частичной утратой способности передвижения, для самостоятельного перемещения или перемещения с посторонней помощью. Кресло-коляска предназначено для перемещения по твёрдым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересечённой местности влечёт за собой ухудшение технических характеристик изделия.

Хранить в сухом тёплом месте, вне зоны досягаемости детей.

Кресла-коляски поставляются в собранном виде.
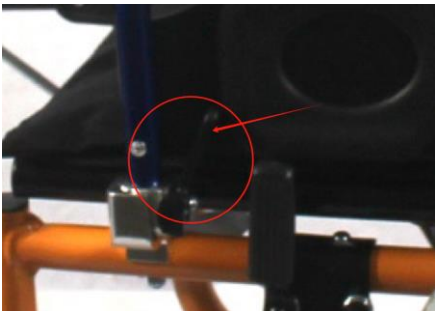
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Подготовка кресла-коляски: достаньте изделие из транспортной коробки, надавите на сиденье до щелчка фиксации, поднимите спинку. Проверьте фиксацию подлокотников, откиньте и отрегулируйте подножки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <p>Чтобы поднять или сложить спинку, нажмите на 2 рычага вниз.</p> <p>Складывание инвалидного кресла производится в обратном порядке.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Кресло-коляска оснащено откидными подлокотниками. Чтобы поднять подлокотник, нажмите на рычаг и потяните подлокотник вверх.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Ручной тормоз позволяет надежно припарковать инвалидное кресло.</p> <p>Приведите в действие ручной тормоз в неподвижное состояние. Для этого нажмите на рычаг вперед до упора. Теперь кресло-коляска надежно стоит; вы можете пересаживаться или просто припарковаться. Ручной тормоз отпускается, если потянуть рычаг назад. Во время движения всегда замедляйте движение кресла-коляски с помощью ручных ободьев. Ручные тормоза используются только для парковки и не могут управлять инвалидным креслом на скорости.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Обратите внимание: при складывании инвалидного кресла необходимо сложить и снять подножки.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания кресел-колясок – не менее пяти лет. Кресла-коляски являются ремонтпригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления его работоспособности экономически нецелесообразна.

## 8. Условия хранения и транспортировки

Кресла-коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару. Транспортирование изделий может проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолётов и т.д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия транспортирования кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°C до плюс 40°C). Транспортирование кресел-колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846.

Условия хранения кресел-колясок в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха – от минус 50°C до плюс 40°C, относительная влажность воздуха – 98% при 25°C).

## 9. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего кресла-коляски. Работоспособность кресла-коляски и, в особенности его тормозов, принципиально должна проверяться каждый раз до его применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю с целью их устранения. Это в первую очередь относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств кресла-коляски или снижение его устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить ежегодное техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем в указанные интервалы времени.

| Частота               | Контроль                                                                   | Комментарий                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перед первой сборкой  | Проверка технического состояния всех элементов, входящих в состав упаковки | Убедитесь, что все компоненты не имеют видимых механических повреждений                                                                |
| Перед каждой поездкой | Управление колесами и тормозами                                            | Тормоза могут изнашиваться, проверяйте их состояние перед каждым использованием. Проверяйте износ колес и очищайте их от грязи и песка |
| Каждые две недели     | Правильный монтаж крепежных винтов и гаек                                  | Убедитесь, что все гайки и болты затянуты.                                                                                             |
| Каждые два месяца     | Чистота, общее состояние                                                   | В случае механического повреждения, немедленно обратитесь к производителю                                                              |
| Раз в месяц           | Колесные оси                                                               | Оси колес следует поддерживать в рабочем состоянии. Выдавите несколько капель смазки между осью и ступицей и прокрутите колесо.        |
| Раз в месяц           | Состояние быстроразъемных, резьбовых и паянных соединений                  | Обратите внимание на трещины в материале рамы, в местах пайки и на отверстиях, блокирующих штыковые соединения                         |
| Раз в месяц           | Состояние шин                                                              | Убедитесь, что протектор шины не изношен и шины не имеют видимых повреждений                                                           |

При обнаружении неисправности в работе кресла-коляски следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «МЕТ»

108811, Россия, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д.4, стр. 2, этаж 5, блок Г

8-495-775-75-95

### Чистка и дезинфекция

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.                             |
|  | Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия. |
|  | Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.        |

Наружные поверхности кресел-колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потёртостей, острых выступающих частей и других дефектов.

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113 химическим методом, с добавлением уксусной кислоты в концентрации  $> 10\%$  или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводов или ацетоном.

Изделие НЕ стерильно!

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.**

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает бесплатную замену неисправных деталей, работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

## 10. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

**Кресло-коляска инвалидное «МЕТ» для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-11.2021**

№ ..... Дата изготовления << >> ..... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен.....
2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

.....  
.....  
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....  
.....  
.....

4. Выполненные работы:

.....  
.....  
.....

|                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Владелец<br>.....<br>« ....» .....20 . . г.<br>МП | Руководитель предприятия – изготовителя<br>.....<br>« ...» .....20 . . г.<br>МП |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|