



MET LIRA

Кровать медицинская
электрическая с
туалетным
устройством

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Кровать в деталях	стр. 4
4.	Сборка кровати	стр. 5
5.	Управление функциями кровати	стр. 8
6.	Боковые ограждения	стр. 9
7.	Инфузионная стойка	стр. 9
8.	Терапевтическая дуга	стр. 10
9.	Очистка и дезинфекция	стр. 10
10.	Хранение	стр. 11
11.	Техническое обслуживание	стр. 11
12.	Комплект поставки	стр. 11
13.	Гарантийные обязательства	стр. 12

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.

- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении Тренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.
- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.



Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.

3. Кровать в деталях



1. Ложе кровати
2. Пульт управления
3. Боковое ограждение
4. Колесо с тормозом

5. Спинка кровати
6. Матрас
7. Терапевтическая дуга
8. Инфузионная стойка

4. Сборка кровати

Все механизмы и электрические блоки управления собраны и уставлены на заводе, рама имеет сварной каркас, в связи с чем допускается самостоятельная установка кровати в домашних условиях.




Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

Шаг 1: Распаковка.
Кровать поставляется в трех транспортных коробках. Откройте коробку 1 с рамой кровати. Достаньте все содержимое коробки.



Шаг 2: Сборка основания кровати.
Уложите ложе кровати на заранее подготовленную ветошь, электрическими приводами вверх. Удалите все пластиковые стяжки. Подключите кровать к электросети, и немного поднимите спинную секцию, с помощью пульта управления. Установите металлические опоры основания на ложе и прикрутите их болтами.




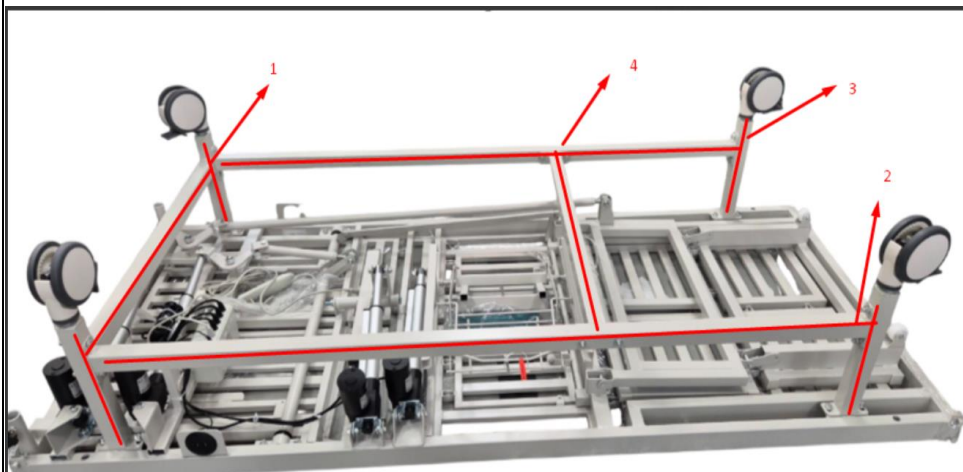

Шаг 3: Установка колес. В металлических опорах нарезана резьба для колес, вкрутите все 4 колеса и опустите тормоз для фиксации. Переверните ложе кровати на колеса.



Шаг 4: Установка спинок. Откройте коробку 2. Достаньте спинки из упаковки. Прикрутите крепежи спинок (рисунок 2). Наденьте спинки на ложе кровати (рисунок 3), при этом «язычок» крепежа должен быть поднят, после установки спинок опустите его вниз, спинки надежно зафиксируются.

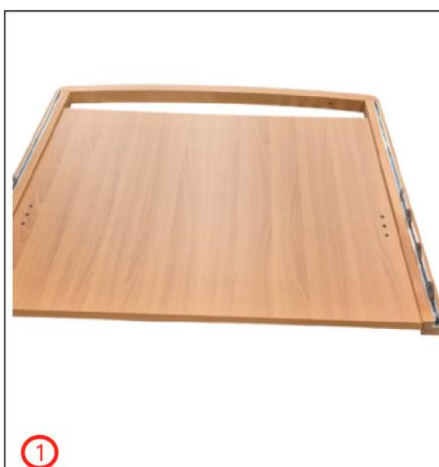

Шаг 5: Установка боковых ограждений.

Откройте коробку 3.
Достаньте боковые
ограждения из упаковки.
Прикрутите боковые
ограждения к спинкам
кровати (рисунок 1 и 2)



Шаг 6: Матрас.

Достаньте матрас из
упаковки и положите на
ложе кровати.
Зафиксируйте матрас на
ложе с помощью лент-
резинок.



5. Управление функциями кровати

Пульт управления всеми электрическими функциями кровати на витом кабеле можно расположить в удобном месте, например, повесить на боковые ограждения.



6. Боковые ограждения

Боковые ограждения из пластиковых панелей с металлическим сердечником, с направляющими, интегрированными в конструкцию спинок.

Чтобы опустить боковое ограждение немного потяните его вверх (1), нажмите на фиксирующий «язычок» (2), расположенный на обеих спинках и опустите ограждение вниз (3).



Чтобы поднять боковое ограждение, потяните за него вверх до щелчка.




Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

7. Инфузионная стойка

Инфузионная стойка вставляется в технологическое отверстие в каркасе кровати. Имеет регулировку по высоте

8. Терапевтическая дуга

Терапевтическая дуга вставляется в технологическое отверстие в каркасе кровати.

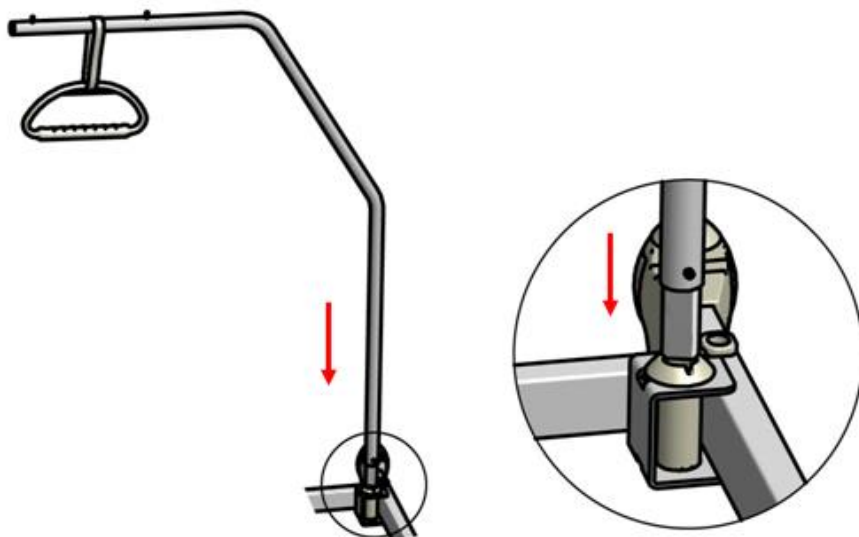

9. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые или деревянные элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа, кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

10. Хранение

- Приведите кровать в самое горизонтальное положение.
- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

11. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Проводите визуальный осмотр соединений ложа, боковых ограждений не реже 1 раза в 3 месяца. При необходимости производите протяжку.
4. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

12. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

13. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____