

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем, гарантийный срок хранения 24 месяца.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.

8.5 Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко.Лтд», Китай
Tel: 0086-511-88838555, 0086-511-88896286

8.6 Импортёр: ООО «Реамед»

Регистрационное удостоверение № РЗС 2013/468 от 04.04.2013 года.

Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет:
ООО «Реамед»

Адрес: 394026, г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-коляска для инвалидов Ortonica OLVIA 30

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!


Срок гарантии: 12 месяцев

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",
Контактный телефон: 8(473) 233-03-32

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, 11

Кресло-коляска для инвалидов Ortonica OLVIA 30

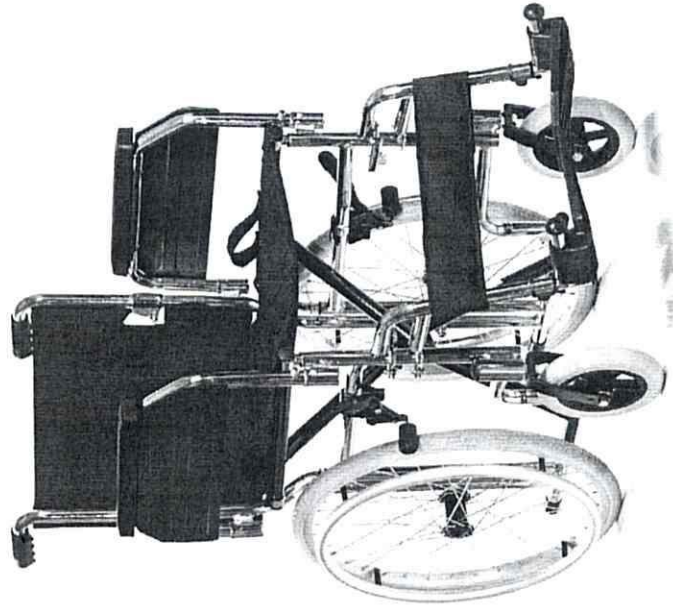

Паспорт и инструкция пользователя

1. Назначение изделия

1.1 Кресло-коляска для инвалидов Ottopica OLVIA 30 (далее коляска) предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.

2. Технические характеристики.

Ширина сиденья (варианты исполнения) - 40,5-43-45,5-48 см.
Глубина сиденья - 42,5 см.
Высота спинки - 37 см.
Вес коляски (варианты исполнения) - 16,2-16,4-16,6-16,8 кг
Общая длина - 102 см.
Общая ширина (варианты исполнения) 51-53,5-56-58,5 см.
Грузоподъемность - 130 кг.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло-коляска для инвалидов «Otopica OLVIA 30» 1 шт.
Паспорт 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.
- 3.2. Во избежание поломки или опрокидывания коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.
- 3.3. Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.
- 3.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать коляску на препятствие высотой более 40 мм без подъема передних колес.
- 3.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

ВНИМАНИЕ!

Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения в движении.

4. Устройство

Рама коляски имеет складную конструкцию. На раме с помощью крепежных элементов установлены: сиденье, спинка, приводные колеса – передние и задние, на поворотных вилках. Коляска

снабжена тормозными механизмами, закрепленными на раме, и оснащена подлокотниками.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кресла-коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.

5. Подготовка коляски к эксплуатации

- 5.1. Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.
- 5.2. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
- 5.3. Проверить давление в пневматических колесах, для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.
- 5.4. Коляска готова к эксплуатации
- 5.5. Для складывания коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6. Уход и обслуживание

- 6.1. Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- 6.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- 6.3. Один раз в месяц необходимо произвести:
 - проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений;
 - проверку давления в шинах колес.
- 6.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников.