


ПОРЯДОК СБОРКИ

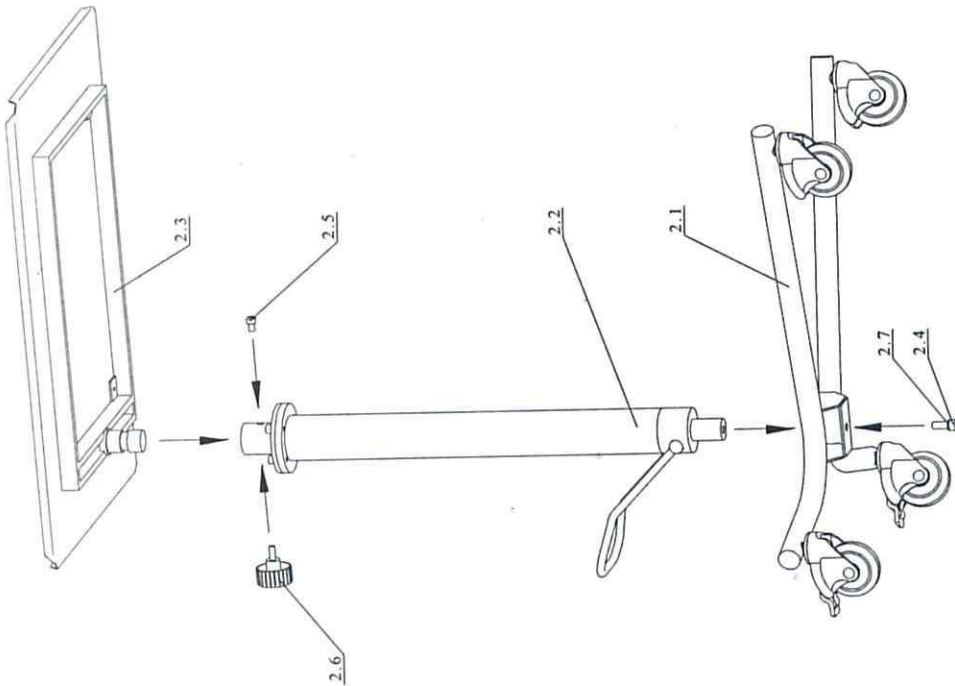

1. Установите подъемник поз. 2.2 в соответствующее отверстие основания поз. 2.1, ориентируя педаль подъемника симметрично между короткими лучами основания, как показано на рисунке.
2. Вкрутите Винт поз. 2.4 (M10x25.A2 DIN 912) с шайбой поз. 2.7 (10.65Г.019 ГОСТ 6402) в соответствующее отверстие подъемника и затяните ключом поз. 2.9.
3. Установите панель с рамкой 2.3 в соответствующее гнездо подъемника.
4. Зафиксируйте панель, закрутив Винт поз. 2.5 (M8x12.A2 DIN 912) ключом поз. 2.8 и Винт-барашек поз. 2.6 (M8x30 diam.50) как показано на рисунке.

94 5210
код продукции

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-51

Этикетка

ТУ РБ 800003039.003-2002

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные параметры и размеры столиков должны соответствовать значениям, приведенным в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателя единицы измерений	
1 Габаритные размеры, мм :	Длина
	Ширина
	высота в нижнем положении панели, мм
	высота в верхнем положении панели, мм
2. Размеры панели, мм	(500±5)х(700±5)
3 Масса, кг	21

1.2 Металлические части столика изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитным или защитно-декоративным покрытием, устойчивыми к обработке водными растворами дезинфицирующих средств на альдегидной основе. Применение дезинфицирующих средств, содержащих (или выделяющих) хлор, активный (растворенный) кислород НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Это может привести к коррозии металлических элементов.

1.3 Общая допустимая нагрузка на столик 10 кг.

1.4 Средний срок службы столиков до списания составляет, 10 лет.

1.5 Столики при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 20790-93 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.6 Столики при эксплуатации обладают вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ 20790-93.

1.7 Столик драгоценных металлов и сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

Внимание! Подъем столика осуществляется многократными нажатиями на педаль подъемника НЕ ДО УПОРА. Опускание столика – нажатием на педаль ДО УПОРА.



	Внимание! Подъем столика осуществляется многократными нажатиями на педаль подъемника НЕ ДО УПОРА. Опускание столика – нажатием на педаль ДО УПОРА.
	Внимание! Если в максимально поднятом положении панель столика не опускается под собственным весом, необходимо слегка надавить на неё
	Внимание! Нагрузка на панель столика не более 10кг. Не опирайтесь на край панели. Поворот панели осуществляйте только после откручивания стопорного винта
	Внимание! Не поднимайте столик за панель п.2.3! Иначе это станет причиной завоздушивания гидроцилиндра и неправильной работы изделия. В случае завоздушивания необходимо многократными нажатиями на педаль поднять столик в крайнее верхнее положение, после чего продолжать накачивание до полного развоздушивания гидросистемы.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Основание с колесными опорами

1 шт;

2.2 Подъемник с крепёжом

1 шт;

2.3 Панель

1 шт;

2.4 Ключ шестигранный 6мм

1 шт;

2.5 Ключ шестигранный 8мм

1 шт;

2.6 Этикетка

1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный СИ – 51

зав.№ 2202

изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Столики транспортируют в крытых транспортных средствах.

4.2 Транспортирование столиков осуществляется по группе условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.3 Хранение столиков осуществляется по группе условий хранения 2(С) ГОСТ 15150-69.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технической документации, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода столика в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня ее изготовления.

5.3 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Мединоустрия сервис», 223043, Республика Беларусь,
 Минский р-н, Папернянский с/совет, район д. Дубовеляны,
 Производственная база ООО «Датума», каб. №35.
 Тел./факс: (+37517) 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by