

**ТЕЛЕЖКА-ТУМБА
МЕДИЦИНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТ PSC-270**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Содержание

Введение.....	3
1 Технические характеристики.....	4
2 Требования безопасности.....	5
3 Транспортирование и хранение.....	6
4 Указания по эксплуатации.....	6
5 Гарантии изготовителя.....	7
6 Рекламация.....	7
Форма №1.....	8

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на изделие: «Тележка медицинская универсальная «МЕТ» с принадлежностями по ТУ 30.99.10-004-11459109-2019»: Тележка-тумба медицинская универсальная MET PSC-270

Назначение изделия: Изделия предназначены для транспортировки /поставки медицинского оборудования, любых видов медицинских изделий (инструменты, перевязочные средства), лекарственных средств, а также медицинских отходов в пределах отделения или больницы.

Показания к применению: для транспортировки, размещения и хранения медицинских изделий, лекарственных средств (за исключением наркотических и сильнодействующих лекарств), медицинских инструментов, медицинского оборудования в смотровых, процедурных, операционных и других специальных медицинских помещениях при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия изделия: отсутствуют.

Потребитель медицинского изделия: медицинский персонал


1. Технические характеристики

Основные характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные размеры изделия

Модель	Основные размеры, мм			Масса, кг $\pm 10\%$	Диаметр колес, мм $\pm 10\%$
	Длина (шаг 10 мм) ± 5 мм	Ширина (шаг 10 мм) ± 5 мм	Высота (шаг 10 мм) ± 5 мм		
МЕТ PSC-270	от 700 до 900	от 400 до 600	от 870 до 1070	от 32 до 37	75 или 100

Состав изделия

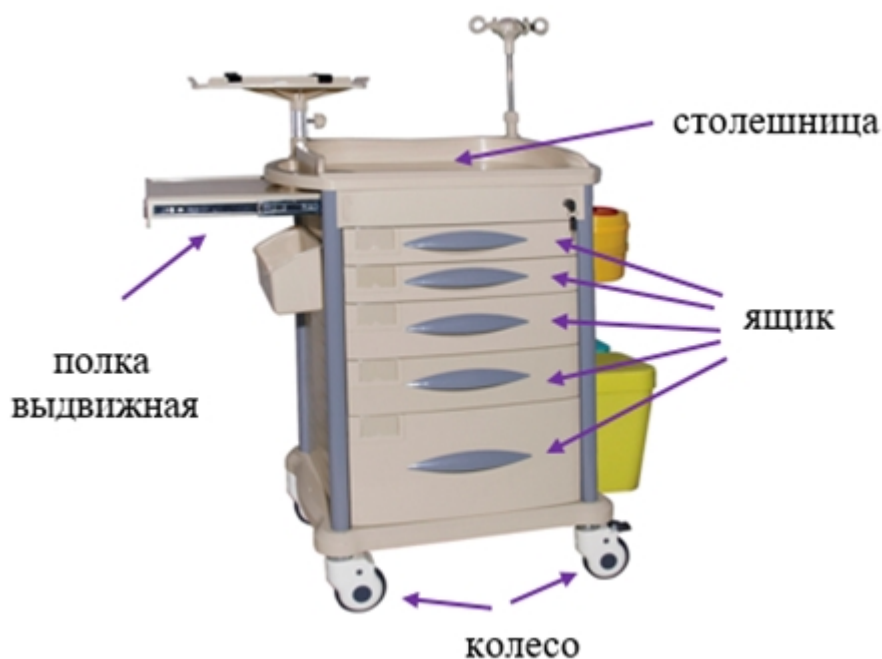

Комплектация

1. Банка с крышкой (при необходимости) – от 1 до 2 шт.
2. Контейнер для игл круглый (при необходимости) – от 1 до 2 шт.
3. Держатель для дезинфицирующего средства (при необходимости) - 1 шт.
4. Контейнер для игл и шприцов (при необходимости) - 1 шт.
5. Контейнер открытый (при необходимости) – от 1 до 3 шт.
6. Контейнер открытый с перегородками (при необходимости) – от 1 до 2 шт.

7. Корзина открытая (при необходимости) – от 1 до 2 шт.
 8. Контейнер для медицинских отходов (при необходимости) – от 1 до 4 шт.
 9. Два контейнера с общей крышкой и педалью (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 10. Надстройка с 5-ю карманами (при необходимости) - 1 шт.
 11. Надстройка с 10-ю карманами (при необходимости) - 1 шт.
 12. Надстройка с 10-ю карманами и полкой (при необходимости) - 1 шт
 13. Надстройка с 5-ю карманами, крючками и полкой (при необходимости) - 1 шт.
 14. Надстройка с крючками (при необходимости) – 1 шт.
 15. Надстройка двухрядная с крючками (при необходимости) - 1 шт.
 16. Держатель для газового баллона (при необходимости) – 1 шт.
 17. Инфузионная стойка (при необходимости) – 1 шт.
 18. Полка поворотная для медицинского оборудования (при необходимости) - 1 шт.
 19. Доска для СЛР (при необходимости) - 1 шт.
 20. Замок центральный (при необходимости) – 1 шт.
 21. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Принадлежности:
1. Карман пластиковый (при необходимости) – от 1 до 4 шт.
 2. Карман для документов (при необходимости) – 1 шт.

2. Требования безопасности

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 30.99.10-004-11459109-2019.

Изделия безопасны для медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий

Изделия перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Тележки, упакованные в транспортную тару, при транспортировании устойчивы к воздействию климатических факторов для условий хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150 (температура окружающего

воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С. относительная влажность 100 % при 25 °С).

Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования продукция не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки на транспортирующее средство исключает перемещение продукции.

Хранение изделий

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах.

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов соответствует условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

4. Указания по эксплуатации

Эксплуатацию изделий следует осуществлять в строгом соответствии с назначением и эксплуатационной документацией.

Тележка поставляется в полностью собранном виде за исключением колес в некоторых случаях. После доставки: вскрыть упаковку, прикрутить колеса (в случае, если они не прикручены), разместить навесное оборудование, которое входит в комплектацию той или иной модели.

Для чистки изделия от пыли можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Дезинфекцию изделия проводят путем протирания внешних поверхностей изделия чистящим средством на основе 3 % раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-го моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644, либо 1%-ым раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193.

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации тележки винтовые соединения могут ослабляться под действием вибрации и утрачивать свою фиксирующую функцию.

Рекомендуется периодически (при ослаблении винтовых соединений), но не реже 1 раза в 3 месяца затягивать головки винтовых соединений по часовой стрелке до упора.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ТУ 30.99.10-004-11459109-2019 при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Гарантийный срок хранения изделий – 24 месяца со дня изготовления.

6. Рекламация

В случае возникновения дефекта изделий в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения недоукомплектованности при ее первичной приемке, владельцу продукции необходимо направить в адрес организации-продавца заявку на замену в соответствии с формой №1 Форма №1.

Адрес, по которому должен прибыть представитель компании, осуществляющей гарантийное обслуживание, номер телефона		
Дата обнаружения дефекта	Краткое содержание дефекта	Дата направления рекламации

Рекламации присылать на адрес:

108811, Г. МОСКВА, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), Д. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5
БЛОК Г

эл. почта: met@met.ru

тел.: +7-495-775-75-95