

VIGOROUS 14 Механическая госпитальная кровать

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Технические характеристики	стр. 3
3.	Правила безопасности	стр. 4
4.	Кровать в деталях	стр. 5
5.	Установка кровати	стр. 6
6.	Положения кровати	стр. 6
6.1.	Регулировка спинной секции	стр. 6
6.2.	Регулировка бедренной секции	стр. 6
6.3.	Регулировка икроножной секции	стр. 7
6.4.	Положение Тренделенбург	стр. 7
6.5.	Положение Антитренделенбург	стр. 7
6.6.	Регулировка высоты	стр. 7
7.	Спинки кровати	стр. 8
8.	Колеса	стр. 8
9.	Боковые ограждения	стр. 9
10.	Очистка и дезинфекция	стр. 9
11.	Хранение	стр. 10
12.	Сборка	стр. 10
12.1.	Сборка ложа	стр. 10
12.2.	Установка спинок	стр. 11
12.3.	Установка инфузионной стойки	стр. 12
13.	Техническое обслуживание	стр. 12
14.	Комплект поставки	стр. 13
15.	Гарантийные обязательства	стр. 13

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях. Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами. Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана. Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.


2. Технические характеристики

Габариты кровати	216*105 см
Высота ложа	43-73 см
Угол наклона спинной секции	68 градусов
Угол наклона бедренной секции	40 градусов
Тренделенбург / Антитренделенбург	12 градусов
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	170 кг

3. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении Тренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

4. Кровать в деталях

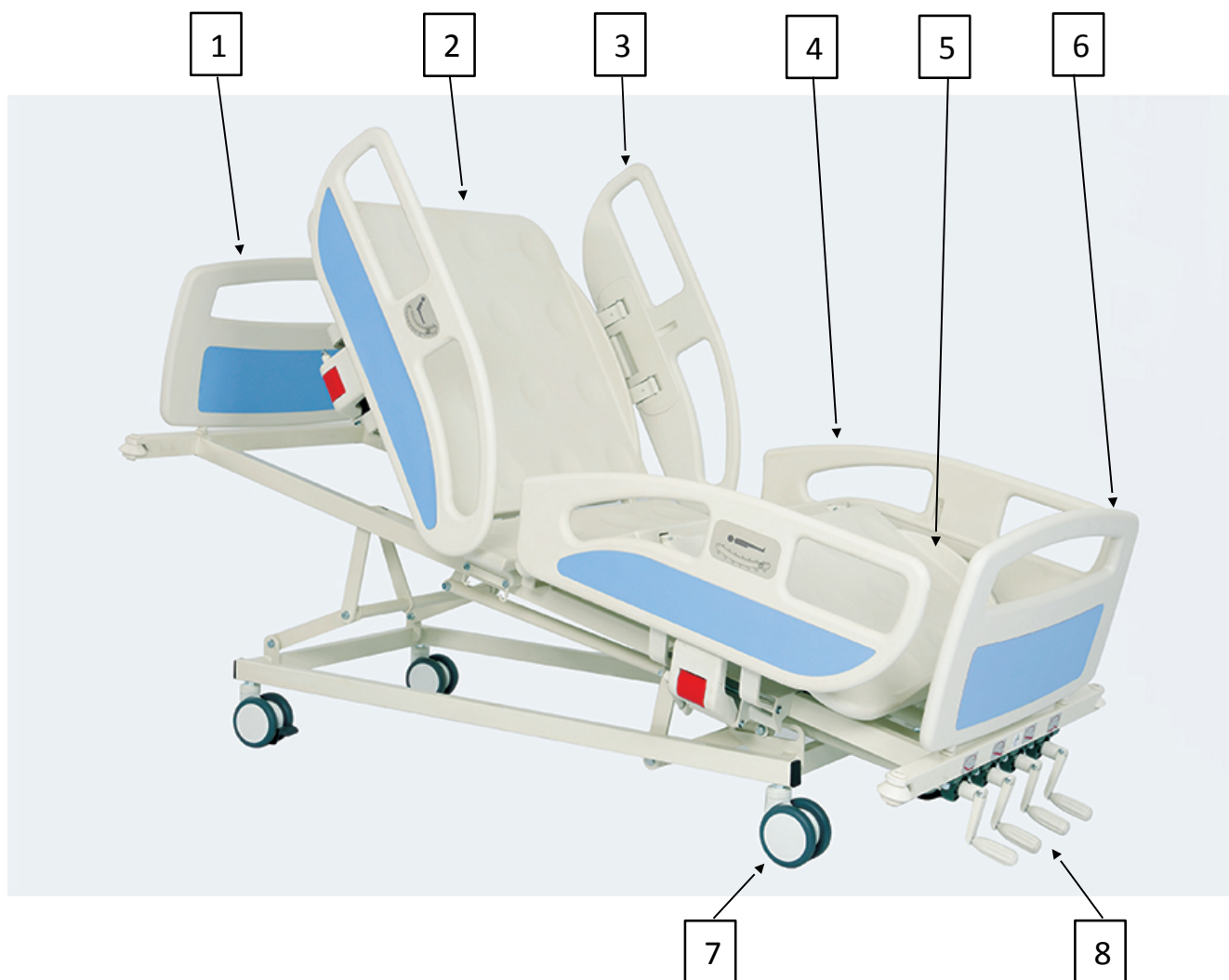

1. Головная спинка
2. Головная секция ложа
3. Боковые ограждения головной части кровати
4. Боковые ограждения ножной части кровати
5. Ножные секции ложа (бедренная и икроножная)
6. Ножная спинка
7. Колеса
8. Рычаги механических приводов



Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.



Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.


5. Установка кровати

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи рычагов.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

6. Положения кровати


Регулировка производится с помощью рычагов в ножной секции кровати.

6.1. Регулировка спинной секции

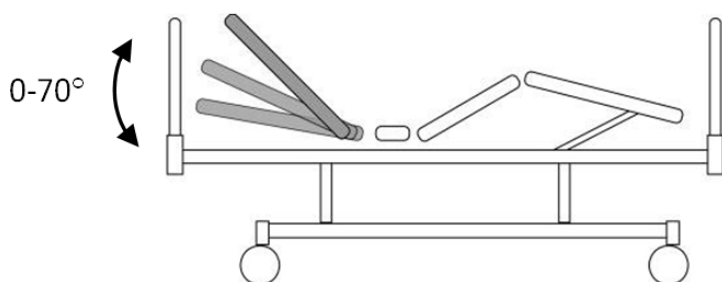


Спинная секция ложа может быть поднята до 70 (± 2) градусов при помощи правого рычага.

6.2. Регулировка бедренной секции

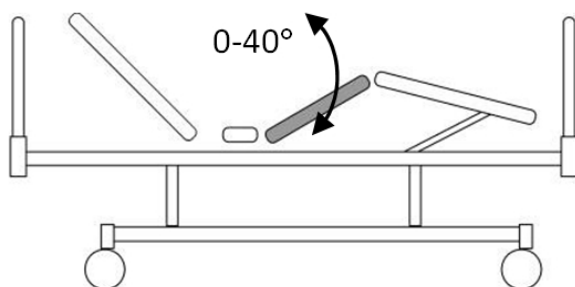


Бедренная секция может быть поднята до 40 градусов при помощи правого рычага.

6.3. Регулировка икроножной секции

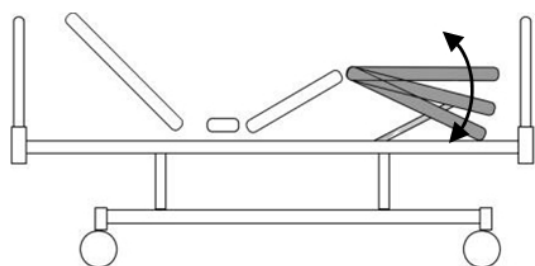


Икроножная секция ложа может устанавливаться на 10 различных уровнях при помощи автономного регулирующего устройства – растомат.


6.4. Положение Тренделенбург

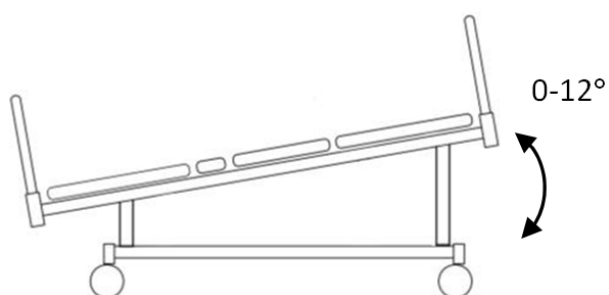


6.5. Положение Антитренделенбург

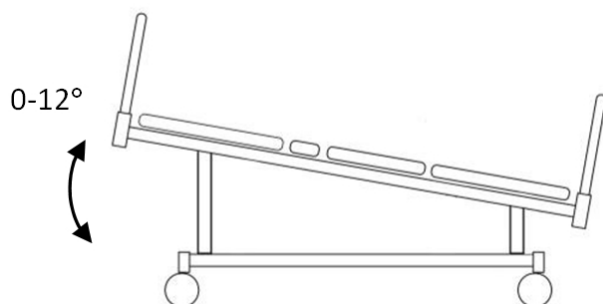

6.6. Регулировка высоты

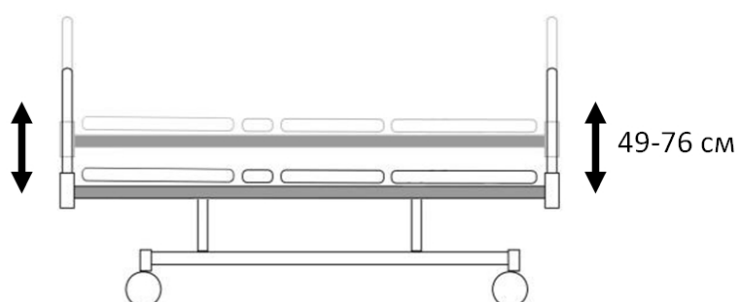

7. Спинки кровати

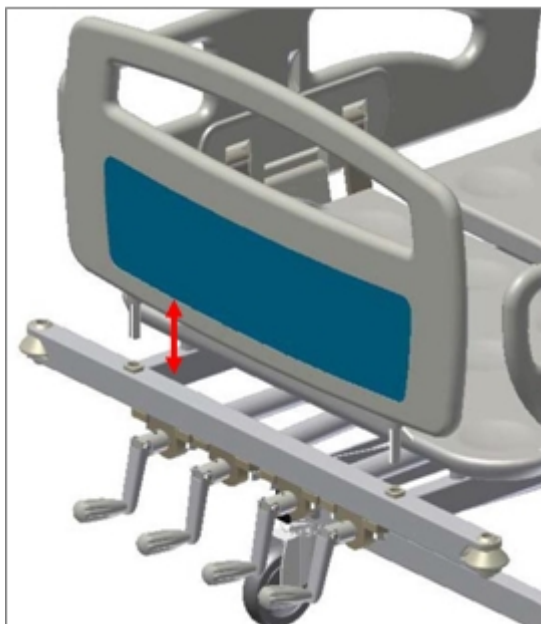


Спинки кровати легко очищаемые, двухслойные, изготавливаются из прочного пластика, легко монтируются и снимаются.

8. Колеса

У кровати 4 колеса диаметром 125 мм, 2 их которых, расположенные по диагонали, оснащены тормозами.


При нажатии педали в направлении 2 колесо блокируется. Чтобы разблокировать колесо, нужно нажать ногой на педаль в направлении 1.

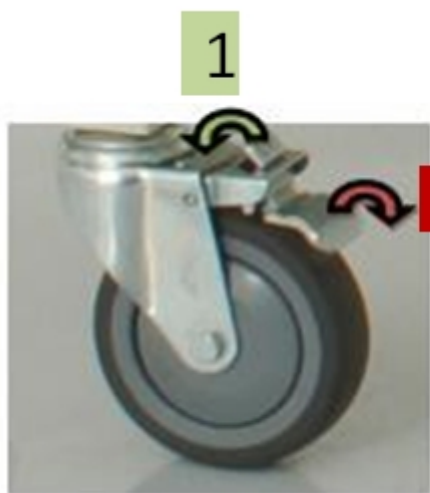

Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

9. Боковые ограждения

Боковые ограждения состоят из четырех независимых друг от друга частей.

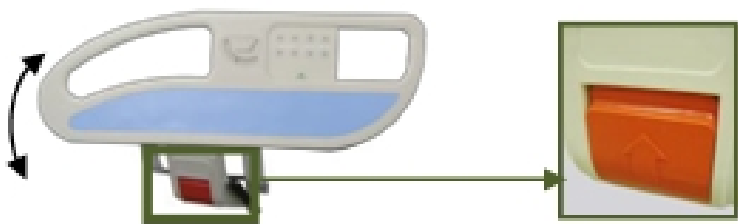

Чтобы привести боковое ограждение в открытое положение, переместите рычаг в направлении вниз, поворачивая его в направлении стрелки, которая находится на ручке красного цвета.

В сложенном положении боковое ограждение располагается под ложем кровати. Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, поднимите рычаг в направлении вверх. Боковое ограждение зафиксировано.



Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

10. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение.


11. Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.


12. Сборка

12.1. Сборка ложа

Установите икроножную (1), бедренную (2) и спинную (3) секции ложа.

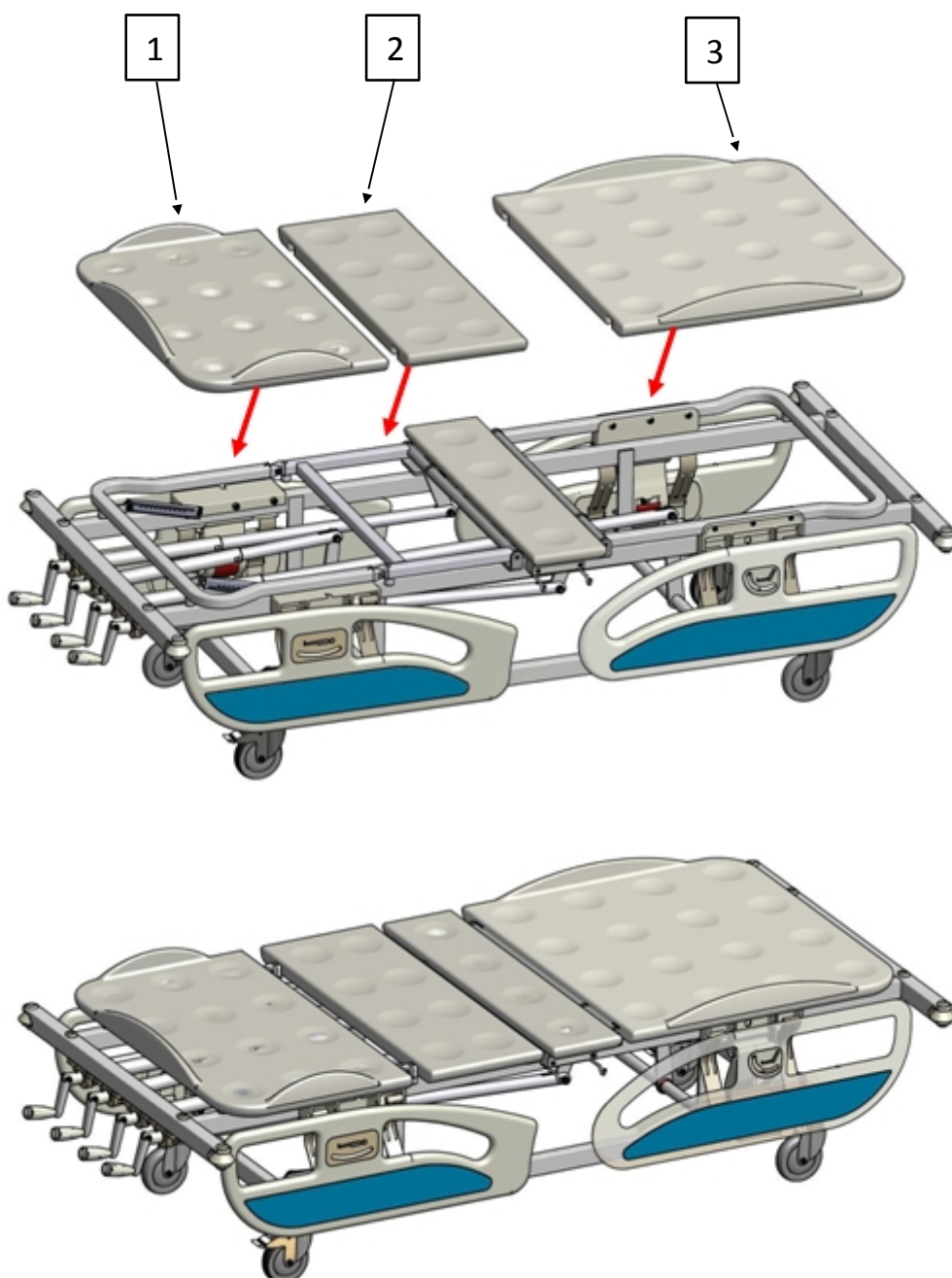


12.2. Установка спинок

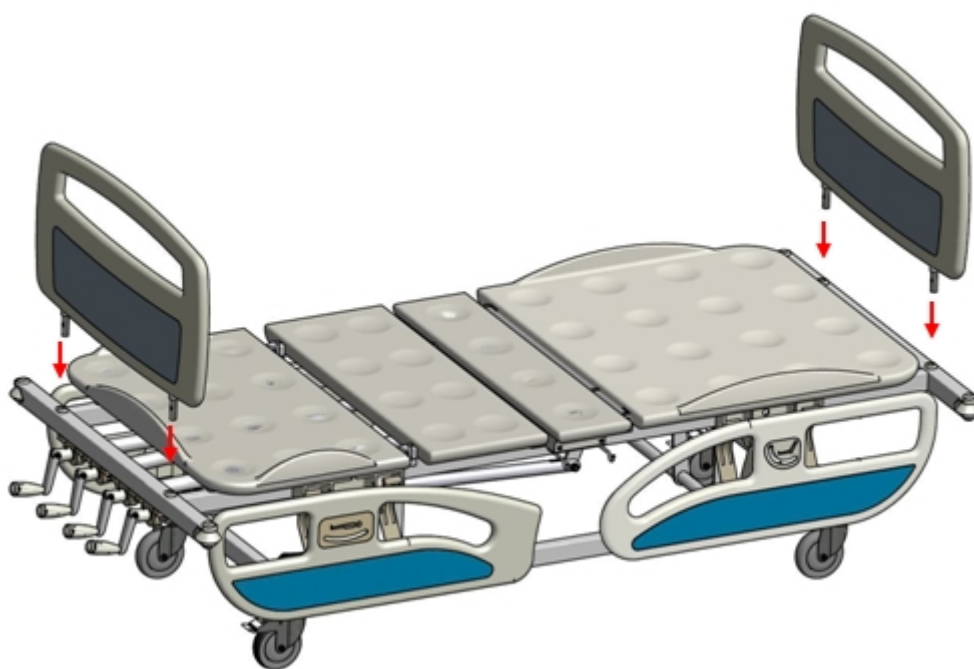

12.3. Установка инфузионной стойки

Установите инфузионную стойку в технологическое отверстие каркаса кровати, как показано на рисунке ниже.

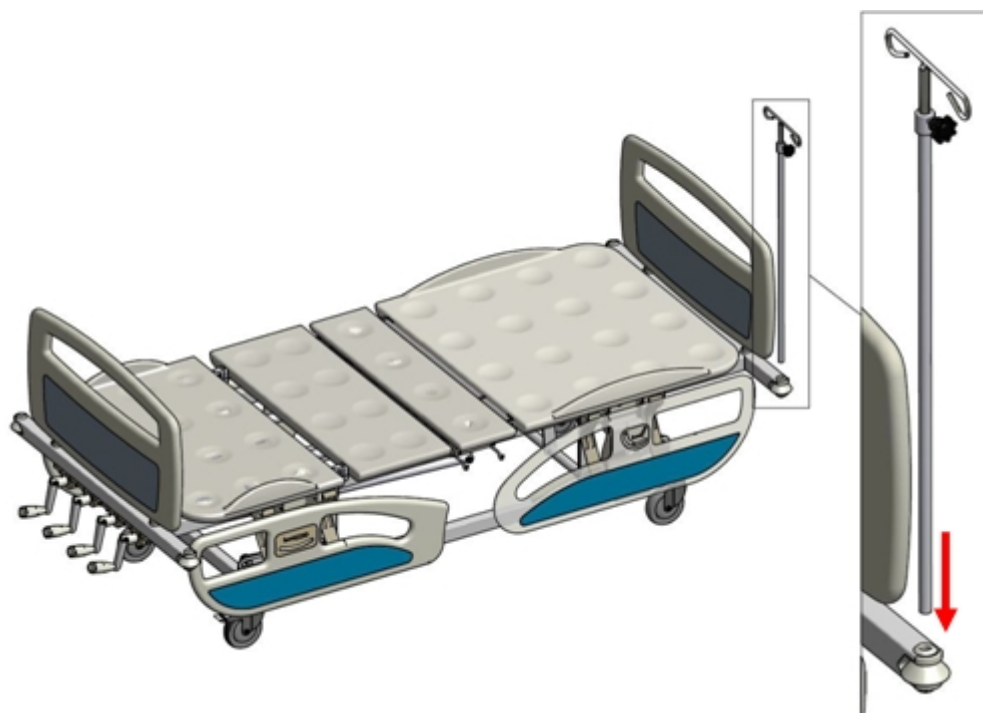

13. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

14. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

15. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____