

Кровать функциональная электрическая Armed RS305 с принадлежностями



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Описание	4
2. Комплектация	5
3. Аксессуары (дополнительно)	5
5. Сборка и подготовка к эксплуатации	8
6. Меры безопасности	9
7. Чистка, техническое обслуживание	9
8. Техническое обслуживание	11
9. Устранение неисправностей	11
10. Окружающие условия	11
11. Условия гарантии	12
12. Сведения о сертификации	14

1. Описание

1.1 Кровать функциональная электрическая ArmedRS305 с принадлежностями предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях для профилактики, лечения и восстановления больных.

- Данная кровать может быть использована в стационаре и в домашних условиях, для ухода за пациентом и служить для диагностики, лечения и наблюдения за ним.

- Безопасная рабочая нагрузка на кровать составляет 250 кг.

- Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

2.2. Основание медицинской кровати изготовлено из стального профиля покрытого экологически чистой эпоксидной эмалью. Спинки (изголовье, изножье) изготовлены из ABS-пластика. Все материалы признаны безопасными для пациента. Боковые ограждения изготовлены из металла и оснащены рычагами - клавишами для опускания.

2.3. Спинки (изголовье, изножье) – съемные, с декоративными вставками под дерево, оборудованы атравматическими угловыми бамперами. Кровать оборудована 2-мя боковыми ограждениями, которые служат барьером и по мере необходимости могут подниматься и опускаться.

2.4. Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных перфорированных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Матрацная рама может регулироваться в горизонтальной плоскости - «вверх-вниз». Регулировки осуществляются электроприводами, посредством дистанционного пульта управления.

2.5. Электроприводная система кровати защищена от сбоев, является пожаробезопасной. Она состоит из:

- электронного сетевого адаптера, трансформирующего 220~230В в напряжение 24V, безопасное для пациентов и пользователей;
- 4-х электроприводов– для регулировки головной и ножной секций, высоты и наклона кровати;
- пульта дистанционного управления.

2.6. Кровать может быть перемещена посредством 4 колес. Колеса имеют тормоз. Блокировка кровати производится при помощи центрального тормоза.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

2. Комплектация

Упаковка:

- 1) Рама с закрепленными на ней секциями и механизмами – 1 шт.
- 2) Спинки (изголовье, изножье) – 2 шт.
- 3) Пульт управления – 1шт.
- 4) Боковые ограждения – 4 шт.
- 5) Колеса – 4 шт.
- 6) Устройство для подтягивания «MonkeyPole» – 1 шт.
- 7) Паспорт (инструкция) – 1 шт.

3. Аксессуары (дополнительно)

Матрац с чехлом (Д x Ш x В, мм) 1950 x 900 x 70


Матрац изготовлен из полиуретана. Чехол съемный на «молниях» из ткани с водоотталкивающей пропиткой и воздухопроницаемыми клапан.

Матрац 4-х секционный оплачивается дополнительно.

4. Основные технические характеристики

Габариты транспортной упаковки (Д х Ш х В, мм)	2070 x 990 x 540 (1,11 м³)
Внешние габариты кровати (Д х Ш х В, мм)	2180 x1040 x860
Максимальная ширина кровати при манипуляции с боковыми ограждениями (мм)	1300
Высота головного ограждения (мм)	860
Высота ножного ограждения (мм)	760
Высота ложа (мм)	490-780
Высота от ложа до верхней точки подтягивающего устройства (мм)	1580
Габариты ложа (Д х Ш, мм)	1920 x900
Диаметр колеса (мм)	130
Вес нетто(кг)	135
Предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка, кг)	250
Электропитание (В/Гц)	220/50
Электропитание пульта (В)	24
Изменяемый диапазон углов наклона секций:	
головной секции	0° - 75°
ножной секции	0° - 45°

Перед использованием кровати, обязательно прочтите Паспорт и инструкцию по эксплуатации.

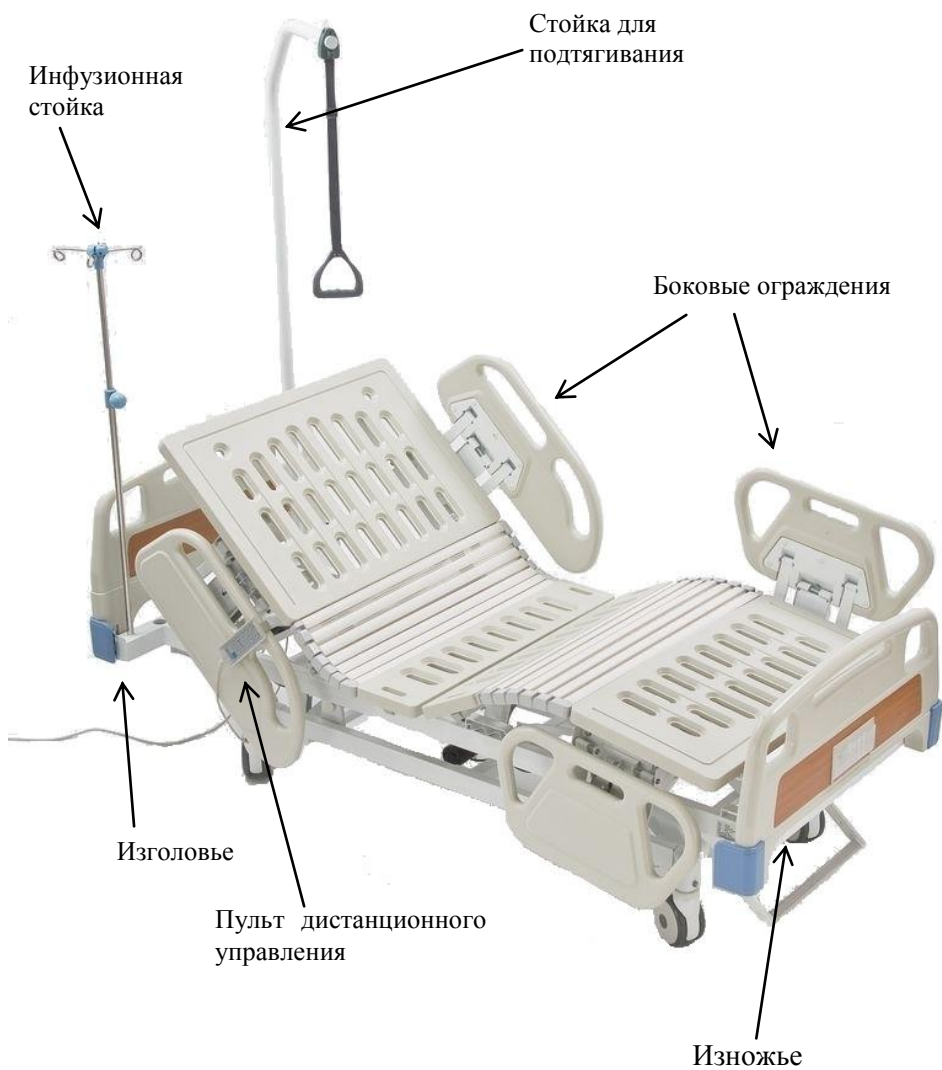

5. Сборка и подготовка к эксплуатации

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию (см. п.10).

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открыв упаковку изделия, проверьте целостность деталей и наличие документов. Сохраните документы для дальнейшего использования.

Порядок сборки:

Основная конструкция кровати не требует сборки.

Установите и закрепите головную и ножную торцевые панели на раме кровати.

При установке головной и ножной торцевых панелей сначала поверните металлический крюк на крепежной панели вверх, затем - крепежную панель на штырях крепления с передней и задней частей рамы кровати, затем закрепите металлический крюк на штыре крепления.

Для крепления боковых ограждений используйте шпильки и проволоочные хомуты.

При необходимости использования устройства для подтягивания «MonkeyPole» вставьте ее в соответствующие отверстие, которые находятся в углах ложа.

Примечание:

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов. Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки. Необходимо прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- колеса заблокированы;
- источник питания соответствует номинальному (220÷230 В, 50 Гц);
- кабель питания (главный кабель) подсоединен и проложен таким образом, что его повреждение исключено;
- кабели питания, двигателя и пульта управления не могут быть повреждены при перемещении кровати;
- никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают регулировке;
- все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

6. Меры безопасности

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ненадлежащее использование кровати может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

- использование для целей, не относящихся к нормальной функции больницы кровати, предназначенной для интенсивной или обычной терапии,
- использование кровати в барокамере,
- использование кровати, функций, принадлежностей или перемещение кровати детьми или неуполномоченными лицами,
- размещение каких-либо предметов или оборудования на шасси или его использование в качестве опоры для человека,
- использование кровати с нагрузками, превышающими 250 кг (безопасная рабочая нагрузка),
- использование кровати с пациентами, вес которых превышает 200 кг,
- перемещение кровати, когда 2-а колеса заблокированы,
- использование на улице или транспортировка пациентов в автомобиле,
- перемещение кровати по мягкому грунту или по несоответствующей поверхности,
- перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7. Чистка, техническое обслуживание

1) Не демонтировать «ручку тяги», «шкив тяги», «регулирующий винт» и другие части механизма.

2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.

3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

Протирайте кровать тканью, слегка смоченной обычным дезинфицирующим составом. Не используйте слишком большое количество жидкости. Эта кровать обеспечивает легкость чистки и оптимальную гигиеничность. Соблюдайте инструкции изготовителя дезинфицирующих средств.

Несоблюдение этого условия может привести к травме пациента или повреждению оборудования.

Рекомендуемый способ чистки и дезинфекции

- Всегда протирайте сверху вниз, переходя от самого чистого к самому загрязненному месту.
- Не скребите поверхности.
- Протирайте влажным материалом (смачивайте столько раз, сколько необходимо, и не используйте большое количество воды).
- Для обеспечения максимальной эффективности дайте средству высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя дезинфицирующего средства.
- При необходимости ополосните: соблюдайте рекомендации поставщика дезинфицирующего вещества.
- Смените протирачный материал при переходе от менее загрязненных мест к более загрязненным местам.
- Смените протирачный материал при переходе к чистке другой кровати.
- После чистки кровати дайте ей хорошо просохнуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Не используйте грубые чистящие или моющие средства, такие как металлические губки и сильнодействующие очистители или растворители, такие как толуол, ксилол или ацетон. Это может привести к повреждению оборудования и негативному воздействию на безопасность пациента.

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

8. Техническое обслуживание

Необходимо производить визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

9. Устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

10. Окружающие условия

Нижеприведенные условия должны быть соблюдены:

- Температура хранения + 5° C + 50° C
- Относительная влажность 50% 70%
- Температура при эксплуатации + 10° C + 40° C
- Относительная влажность 20% 90% (не рассматривается)
- Атмосферное давление 700 гПа 1060 гПа

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

11. Условия гарантии

Этим гарантийным талоном производитель подтверждает полное отсутствие дефектов в купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по устранению скрытых производственных дефектов в течении 12 месяцев при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, но не позднее 24 месяцев со дня его производства (если больший срок не установлен производителем).

1. Неисправная кровать должна быть сдана в сервисный центр в полной комплектации.

2. При необоснованном обращении в сервисный центр Покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе кровати, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильной эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром негарантийными.

3. Доставка кровати в сервисный центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

Ограничение гарантийных обязательств:

1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

3. Производитель оставляет за собой право не осуществлять гарантийного бесплатного ремонта, если есть случаи нарушения эксплуатации кровати или несоблюдении следующих правил изложенных в пунктах 3.1., 3.2. условий гарантии.

3.1. Кровать снимается с гарантийного обслуживания в нижеизложенных случаях:

- выход кровати из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации или неправильная установка)
- если кровать имеет следы постороннего (умышленного или случайного) вмешательства или самостоятельного ремонта;
- если самостоятельно внесены изменения в конструкцию кровати;
- если кровать эксплуатировалась в условиях, для которых она не была предназначено или в несоответствии со своим целевым назначением, а также с нарушением инструкции по эксплуатации.

3.2. Гарантия на кровать не распространяется на следующие дефекты и неисправности:

- повреждения механического характера (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- повреждения, возникшие вследствие попадания на поверхность кроватей жидкостей и веществ;
- повреждения, вызванные пожаром, стихией, бытовыми факторами.

4. При обнаружении дефектов, возникших по вине фирмы обращаться за справками к продавцу.

С инструкцией по эксплуатации ознакомлен

_____/_____

Подпись ФИО

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации.

12. Сведения о сертификации

Кровать функциональная электрическая Armed RS305 соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/08022 действительно с 14.10.2010г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: «Shanghai Rongshun Hardware and Plastic Co., Ltd»,
“Шанхай РогшанХардвеа энд Пластик Ко., Лтд”, Китай,
18 Miaopu road, Luodian town, Baoshan Dist. Shanghai**

Дистрибьютор: ТМ «Армед»
Тел. в г. Москве: (495) 411-99-33, 411-08-11
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 411-08-11

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

Сайт: www.armed.ru