

МЕТ СОМРАСТ 15

Компактная электрическая кресло-коляска

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Внимание!

** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.*

1. Введение

Данная модель кресла-коляски (далее по тексту – изделие) предназначена для индивидуального использования людьми с полной или частичной утратой способности к передвижению в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием.

Изделие спроектировано в первую очередь для лиц, находящихся в состоянии самостоятельно передвигаться с помощью электрической кресла-коляски, однако конструкция предусматривает и передвижение с посторонней помощью в случае необходимости.



Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия, особенно с приведенной ниже инструкцией по технике безопасности в разделах 9 и 10.

Продавец не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающий из-за неправильного использования изделия. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.

Показания:

- паралич,
- ампутация нижних конечностей,
- повреждения, дефекты или деформация конечностей,
- повреждения или контрактуры суставов,
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:

- психические расстройства,
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,
- потеря функциональности обеих рук,
- нарушения координации движений и статики,
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата,
- сердечная недостаточность,
- наркотическое или алкогольное опьянение.

2. Технические характеристики

Номинальная нагрузка	115 кг
Ширина сиденья	43 см
Ширина изделия по крайним точкам	58 см
Скорость	6 км/ч
Дальность хода на одной зарядке	20 км
Максимальный преодолеваемый угол	12 °

3. Изделие в деталях



1. Спинка с ручкой для сопровождающего
2. Пульт управления с джойстиком
3. Подлокотник
4. Сиденье
5. Подножка

6. Переднее колесо
7. Аккумулятор
8. Заднее колесо
9. Стояночные тормоза
10. Рычаг складывания спинки



Если во время распаковки или сборки изделия обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь изделием и уведомьте о них продавца.

4. Сборка изделия

Шаг 1: Извлеките коляску и дополнительные элементы из упаковки.



Шаг 2: Чтобы поднять спинку возьмитесь за ручки сопровождающих и поднимите их вверх до щелчка.



Шаг 3: Установите панель управления с джойстиком:

- установите панель на крепление под нужную вам руку
- отрегулируйте вылет пульта, затем затяните гайку
- вставьте штекер панели в провод, который идет из аккумулятора



Шаг 4: Чтобы разложить коляску, возьмитесь руками за ручки сопровождающих и растяните их в стороны. Затем надавите сверху на боковые рамы сиденья двумя руками.



Шаг 5: Установите подножки:

- Сопоставьте подножку и раму коляски. Соедините крепление подножки и раму
- Для закрепления подножки надавите сверху и сбоку как показано стрелками (рис. 1)
- Потяните вверх за рычаг и сопоставьте, таким образом, чтобы цилиндр попал в паз (рис. 2)



Рис. 1



Рис. 2

Шаг 6: Положите мягкие подушки на сиденье и спинку

5. Панель и пульт управления

Панель управления:



1. Кнопка включения / выключения
2. Звуковой сигнал
3. Кнопки регулировки скоростного режима
4. Индикатор заряда аккумулятора
5. Индикатор скоростного режима
6. Джойстик
7. Кнопка включения/выключения подсветки

1 - Кнопка включения / выключения пульта.

2 – Звуковой сигнал для безопасного движения.


3 – Кнопки регулировки скоростного режима позволяют увеличивать или уменьшать скорость передвижения.

4 – Индикатор заряда аккумулятора состоит из 5 сегментов, показывающих уровень зарядки (5 – максимум, 1 минимум).

5 – Индикатор скоростного режима состоит из 5 сегментов отражает выбранный скоростной режим (5 – максимум, 1 минимум).

6 – Джойстик позволяет управлять скоростью и направлением движения

На нижней стороне панели управления находятся:

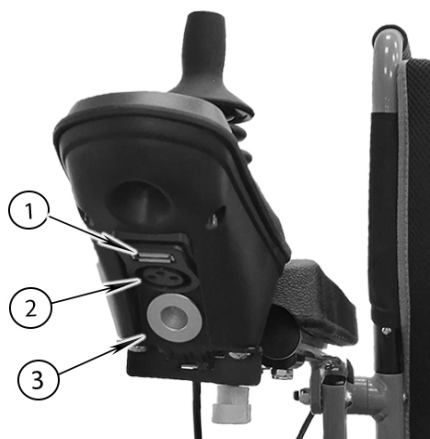

1. USB-порт для зарядки ваших мобильных устройств
2. Разъем для зарядного устройства
3. Фронтальная подсветка

ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальное зарядное устройство!

Пульт управления:



1. Джойстик
2. Кнопка включения / выключения пульта
3. В данной комплектации не активна



4. Кнопки регулировки скоростного режима
5. В данной комплектации не активна

- Наклоните его в том направлении, куда вы хотите двигаться.
- Чем сильнее вы нажимаете на джойстик, тем выше скорость движения.
- Чтобы замедлить движение, переместите джойстик ближе к его центральному нейтральному положению.
- Чтобы остановиться, отпустите джойстик, тормоза сработают автоматически.



Старайтесь избегать ударов и повреждений пульта, особенно джойстика.
При попадании напитков или еды на пульт его необходимо сразу же очистить.



Запрещено использовать пульт для управления коляской на расстоянии более 2 м.

5. Откидная спинка (для модели MET Compact 15+)

<p>Для перевода спинки в горизонтальное положение потяните за трос с обратной стороны спинки.</p>	
<p>Когда, по обе стороны троса, цилиндры выйдут из пазов, можете отогнуть спинку назад.</p>	
<p>После этого зафиксируйте положение спинки вставив оба цилиндра в соответствующие пазы.</p>	

6. Переключатель редуктора в ручной режим

Переключение редуктора в ручной режим происходит автоматически при отключении коляски.

	<p>Электромагнитные тормоза не работают при выключенной коляске. При необходимости используйте стояночные тормоза</p>
---	---

7. Знакомство с изделием

При недостаточном опыте перемещения на электрическом кресле-коляске есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

	<p>Найдите открытое пространство, например, в парковой зоне, и попросите помощника помочь вам практиковаться, пока вы не сможете уверенно управлять изделием самостоятельно.</p> <p>Прежде чем садиться в кресло-коляску, убедитесь, что питание отключено. С помощью кнопки регулирования скоростного режима выберите комфортную скорость для тренировки.</p> <p>Мы рекомендуем вам выбрать самый медленный режим, пока вы не освоитесь с управлением.</p>
	<p>Наклоните джойстик в том направлении, куда вы хотите двигаться.</p> <p>Сначала освоите движение вперед на минимальной скорости.</p>
	<p>После того, как вы освоили движение вперед, попрактикуйтесь совершать повороты в виде латинской буквы S во время движения.</p>
	<p>Теперь потренируйтесь двигаться назад.</p> <p>Внимание! В целях безопасности используйте минимальный скоростной режим при движении назад.</p>

8. Как сложить коляску

Шаг 1: Снимите подушки с сиденья и спинки

Шаг 2: Снимите подножки

- Потяните вверх за рычаг и вытащите подножки



Шаг 3: Снимите панель управления

- отсоедините штекер панели и провод, который идет из аккумулятора
- ослабьте гайку и вытащите панель управления


Шаг 4: Чтобы привести коляску в сложенное положение, потяните вверх обивку сиденья.



Шаг 5: Чтобы привести спинку в сложенное состояние, нажмите на фиксаторы с обратной стороны спинки и согните её.



9. Техника безопасности

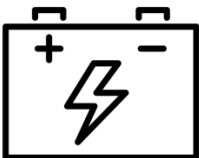	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдайте правила дорожного движения и не приближайтесь слишком близко к другим транспортным средствам. • Не перевозите пассажиров и не превышайте максимальный вес пользователя при управлении инвалидной коляской. • Всегда используйте ремень безопасности. • Не используйте коляску в состоянии алкогольного опьянения.
	<ul style="list-style-type: none"> • Всегда проверяйте, полностью ли заряжены батареи, прежде чем отправляться на прогулку. • Всегда заряжайте кресло-коляску в хорошо проветриваемом помещении. • Не нажимайте кнопку включения / выключения контроллера во время движения кресла-коляски, это приведет к отключению повреждению контроллера джойстика.
	<p>Во время движения держите руки на подлокотниках, а ноги – всегда на подножке.</p>
	<p>Избегайте экстренного торможения и резких поворотов на высокой скорости. Всегда снижайте скорость перед поворотом.</p>
	<p>Убедитесь, что при движении задним ходом нет препятствий.</p> <p>Используйте самую низкую скорость при движении задним ходом</p>
	<p>Не пытайтесь преодолевать препятствия высотой более 5 см.</p>
	<p>Не пересекайте разрывы дорожного покрытия шириной более 10 см.</p>

	<p>Не используйте изделие для перемещения по мягким, неровным или незащищенным поверхностям, таким как трава, мягкая земля или гравий.</p>
	<p>Не въезжайте на склоны с углом наклона более 10 °.</p>
	<p>При подъеме по склону сидите в коляске прямо. Повороты туловища или ног могут привести к потере равновесия и опрокидыванию коляски.</p>
	<p>Не допускайте боковой уклон коляски более 3 ° – это может привести к опрокидыванию за счет смещения центра тяжести.</p>
	<p>Снижайте скорость при спуске. При торможении на спуске требуется больше времени для полной остановки кресла-коляски.</p>
	<p>Не садитесь и не вставайте с коляски без острой необходимости, если вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что кресло-коляска выключена и установлена на стояночные тормоза.</p> <p>Не выключайте коляску без острой необходимости, если вы находитесь на наклонной поверхности. Если такая необходимость есть – убедитесь, что кресло-коляска установлена на стояночные тормоза.</p>

10. Аккумулятор

Эксплуатация аккумулятора

- Литиевая батарея является не обслуживаемым элементом питания. Запрещается любым способом нарушать целостность батареи, нагревать, подвергать физическому, химическому и электрическому воздействию, а также допускать контакта с водой и другими жидкостями. Нарушения целостности батареи может привести к возгоранию.

- Допускается зарядка литиевой батареи только штатным зарядным устройством, идущим в комплекте с батареей. Зарядка батареи сторонним зарядным устройством может вывести батарею из строя, а в некоторых случаях привести к возгоранию.
- Не допускается хранение литиевой батареи в разряженном состоянии. Необходимо поддерживать заряд батареи не ниже 50% от общего уровня заряда. Если устройство не эксплуатируется, необходимо производить регулярный заряд батареи, каждую 1-2 недели.
- Запрещается производить заряд литиевой батареи без присмотра, а также подключать зарядное устройство к электрической сети, параметры которой отличаются от параметров, указанных на зарядном устройстве.
- Запас хода устройства с литиевым элементом питания зависит от: уровня заряда аккумулятора, остаточной емкости аккумулятора, нагрузки на устройства, состояния покрытия по которому движется устройство, температуры окружающей среды. При разных условиях эксплуатации, запас хода может существенно отличаться.
- Емкость нового литиевого аккумулятора составляет 80-90% от заявленной емкости. Полная емкость достигается после 5-8 циклов заряда-разряда.
- Эксплуатация литиевой батареи при температурах ниже +5 градусов может приводить к обратимому снижению емкости батареи.
- На транспортировку литиевых батарей накладываются ограничения согласно местному законодательству. Перед транспортировкой литиевого аккумулятора или устройства с литиевым аккумулятором, необходимо заранее связаться с транспортной компанией и уточнить условия транспортировки батарей.
- Запрещается выбрасывать отработанные литиевые батареи на общественные свалки. Отработанные литиевые батареи должны быть утилизированные специальными службами и согласно местному законодательству.

11. Техническое обслуживание и уход

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации вашей коляски. Мы рекомендуем регулярно проводить следующие проверки:

- Раз в месяц проводить визуальный осмотр состояния рамы, соединений, передних и задних колес, подножек и подлокотников на отсутствие люфтов и видимых дефектов (например, сколы, трещины, повреждения кабелей, расшатанные соединения и т.д.).
- Особое внимание уделяйте состоянию быстроизнашивающихся деталей (подшипников, покрышек колес и т.д.).
- Регулярно проверяйте затяжку резьбовых соединений – они не должны крутиться от руки без сопротивления.
- Регулярно проверяйте состояние ремней спинки и сиденья, а также ремня безопасности.
- Регулярно очищайте неметаллические поверхности изделия и крышки неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.
- При попадании жидкостей на изделие вытирайте его насухо. При попадании морской воды смойте соль салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем вытрите изделие насухо.
- Пульт управления изделия – водонепроницаемый, однако, чрезмерное попадание воды может ухудшить его работу.
- Не подвергайте пульт нагреву от электроприборов.
- Регулярно проверяйте пульт на наличие визуальных повреждений.



При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению краски изделия.



Используйте только оригинальные запасные части для ремонта изделия!
Не вносите в конструкцию изделия изменения! Это может привести к поломке изделия и травме пациента, а также к исключению из сферы действия гарантии!

12. Комплект поставки:

- кресло-коляска – 1 шт.;
- аккумулятор – 1 шт.;
- зарядное устройство – 1 шт.;
- панель управления – 1 шт.;
- пульт управления
- эксплуатационная документация – 1 шт.

13. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на кресло-коляску – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____