

MET REVEL N

Кровать медицинская электрическая
с туалетным устройством



Сборка



Видеообзор

Руководство по эксплуатации

* Внимание! Технические характеристики и фото изделия могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

Содержание

1.	Назначение изделия.....	3
2.	Комплект поставки.....	3
3.	Сборка изделия.....	3
4.	Эксплуатация изделия.....	5
4.1	Общая информация.....	5
4.2	Информация о правильной эксплуатации электрики.....	6
4.3	Специальные правила безопасности для регулировки секций кровати при помощи электрического привода.....	7
4.4	Использование функций кровати.....,,.....	8
5.	Очистка и дезинфекция.....,,.....	8
6.	Техническое обслуживание.....	10
7.	Поиск неисправностей и их устранения.....	10
8.	Гарантийные обязательства.....	11

1. Назначение изделия

Кровать предназначена для использования в стационарах, отделениях паллиативной помощи, реабилитационных центрах, а также для ухода за больными в домашних условиях.

2. Комплект поставки

Ложе кровати с предустановленными приводами – 1 шт;

Спинки – 2 шт.

Складные боковые ограждения – 2 шт.

Столик – 1 шт.

Колеса – 4 шт.

Пульт -1 шт.

Матрас секционный – 1 шт.

Судно -1 шт.

Ванночка для мытья головы -1 шт.

Разъем USB – 1 шт.

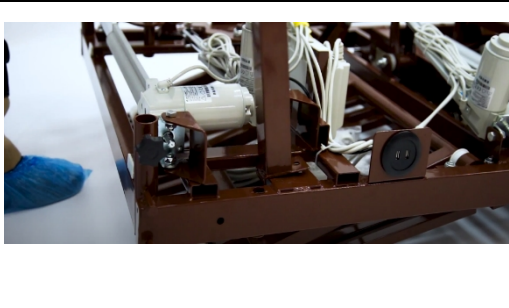
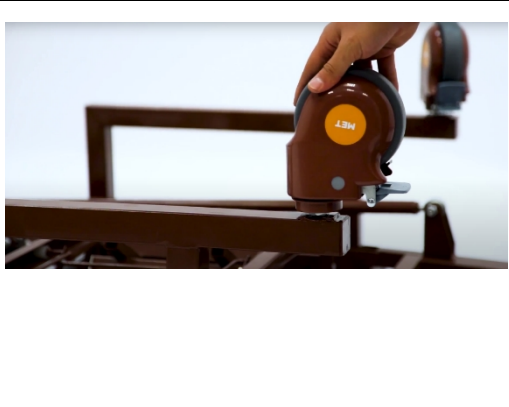
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

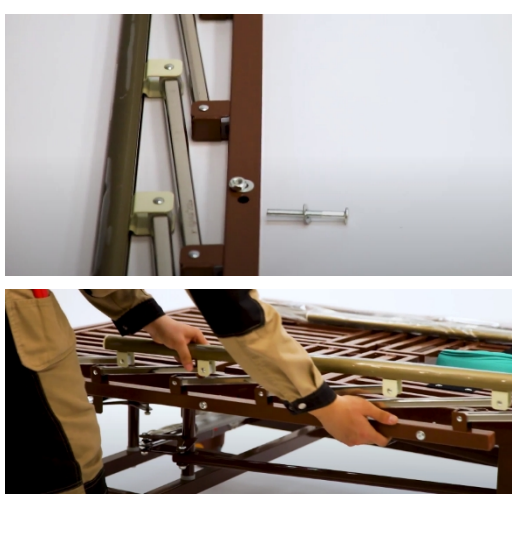
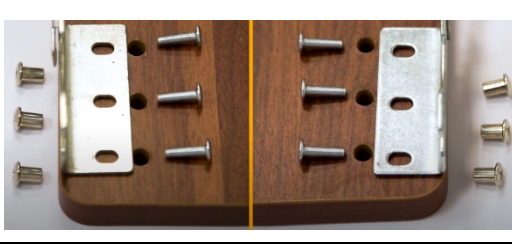
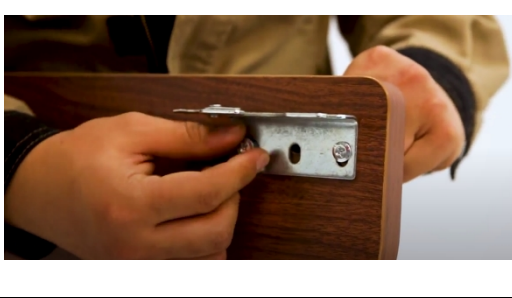
3. Сборка изделия

Кровать поставляется в предсобранном состоянии. В связи с этим допускается самостоятельная установка кровати в домашних условиях.

Для завершения сборки изделия необходимо:

1) Аккуратно вскрыть упаковку и достать кровать. Разложите картон на полу и выполняйте сборку изделия на нем. Положите кровать ложем вниз. 2) Извлеките комплектующие и аккуратно разложите перед собой 3) Разложите перед собой фурнитуру	 1 Гайки для боковых ограждений 2 Шайбы 3 Болты для боковых ограждений 4 Гайки и болты для колесных опор 5 Фурнитура для торцевых спинок 6 Болты для торцевых спинок 7 Ключи для сборки
4) Положите боковые колёсные опоры рядом с ложем	

5) Установите опоры, используя болты и гайки №4	
6) Возьмите ручку для привода и поднимите головную секцию	
7) Установите поперечную колёсную опору	
8) Используйте болты и гайки №4	
9) Подключите кровать к сети и с помощью пульта управления опустите головную секцию 10) Поставьте колёса на тормоз 11) Вкрутите колёса в отверстия	

12) Переверните и поставьте кровать на колёса 13) Аккуратно срежьте стяжки с ложе. Снимите стяжки с ложа 14) Возьмите болты, гайки и шайбы №1, №2, №3 и установите боковые ограждения	
15) Подготовьте фурнитуру №5 и №6 для установки крепления торцевых спинок	
16) Закрепите необходимые детали на торцевых спинках	
17) Установите торцевые спинки на кровать 18) Постелите матрас 19) Установите штангу для подтягивания и инфузионную стойку (при необходимости).	

4. Эксплуатация изделия

4.1 Общая информация

! Перед первым использованием кровати изучите полностью руководство пользователя. Это поможет Вам избежать травм и повреждения изделия в результате неправильной эксплуатации.

Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.

Каждый раз перед использованием кровати проверять ее полную работоспособность.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как

несоответствующее требованиям.

Боковые ограждения **не** являются силовой конструкцией, в связи с чем подтягиваться, подниматься, переворачиваться и давать силовую нагрузку запрещается. Боковые ограждения служат лишь для ограждения человека от случайного падения из кровати.

! Запрещено садиться или вставать на спинную и ножную секцию кровати. Секция рассчитана только на поддержку спины или ног пользователя в лежачем или сидячем положении.

! Перед каждым использованием необходимо убедиться в том, что колеса заблокированы.

Для перемещения кровати необходимо разблокировать колеса. Несоблюдение данного пункта может вызвать поломку колес и ножек. Это не будет являться гарантийным случаем.

При использовании дополнительного или вспомогательного оборудования – опорных штанг, ламп для чтения, компрессоров для противопролежневой системы и пр. необходимо удостовериться, что это не приведет к спутыванию кабелей питания и зажимания кабеля в подвижных частях кровати. Это может привести к травмам или порчи оборудования.

4.2 Информация о правильной эксплуатации электроники

Электроприводная система кровати защищена от сбоев, является пожаробезопасной, состоит из:

- электронного сетевого адаптера, трансформирующего 220~230В в напряжение 24V, безопасное для пациентов и пользователей. Сетевой адаптер напрямую питает все электроприводы и пульт управления с помощью соединительных кабелей.
- пульта дистанционного управления с возможностью блокировки клавиш (если предусмотрено комплектацией).

Удлинитель не должен применяться для подключения внешних электрических компонентов.

В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати необходимо отключить ее от сети и произвести проверку.

Необходимо проводить сетевой кабель питания таким образом, чтобы не допускать натягивания, перехлеста, повреждения движущимися частями во время манипуляций с кроватью.

Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения (повесить на крюк); необходимо также удостовериться, что кабель не будет поврежден движущимися частями кровати.

Необходимо регулярно проводить визуальную проверку состояния сетевого кабеля на наличие механических повреждений (истирание, оголенные провода, изгибы, точки пережатия и т.д.) Такая проверка должна осуществляться, если: кабель подвергается механической нагрузке (когда его переезжает кровать или тележка для перевозки оборудования, в случае изгиба, растяжения или резких рывков при перемещении кровати, подключенной к сети); кровать перемещается перед включением ее в сеть; проверка также должна проводиться пользователем

при постоянном использовании.

4.3 Специальные правила безопасности для регулировки секций кровати при помощи электрического привода

При регулировке кровати необходимо следить за тем, чтобы конечности пациентов, пользователей или других лиц, в особенности детей, не находились под секциями или ложем, поскольку возможен их захват с последующим травмированием.

При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента при регулировке спинной и бедренной секций.

Перед перемещением кровати необходимо убедиться в том, что кабель питания не будет растянут, придавлен колесом или поврежден каким-либо другим способом. При перемещении кровати кабель должен быть зафиксирован в держателях (кронштейнах).

Перед перемещением кровати необходимо убедиться в том, что колеса кровати разблокированы. Перемещение кровати на заблокированном тормозном механизме вызывает поломку колеса, а так же ножки кровати.

Продолжительность операций не должна превышать двух минут. После этого должен быть период покоя длительностью не менее 18 минут. (альтернатива: минута активности с последующими 9 минутами покоя и т.д.), несоблюдение может привести к поломке приводов.

Как и любое электрическое устройство, приводная система кровати может порождать шумы и помехи в работе других электромагнитных устройств. В этом случае следует увеличить расстояние до таких устройств или не использовать одну и ту же розетку электрической сети.

! Внимание! Запрещается выполнять функцию бокового переворота при поднятой спинной (головной) и ножной секции. Также запрещается использовать функцию регулировки спинной секции при поднятой секции бокового переворота. Повреждения, полученные в случае таких регулировок, не являются гарантийными.

4.4 Использование функций кровати



Для воспроизведения необходимой функции, нажмите соответствующую кнопку.

Для включения таймера переворота на 30 минут нажмите соответствующую кнопку на 5 секунд. Для включения таймера на 45 минут нажмите соответствующую кнопку на 10 секунд.

Для приведения кровати в горизонтальное положение нажмите однократно кнопку «В кровать». Кнопка «Экстренная остановка» отменяет действие команды «В кровать».

5. Очистка и дезинфекция

Перед очисткой и дезинфекцией необходимо:

- Отсоединить кабель питания и упаковать вилку кабеля и электрооборудование таким образом, чтобы исключить попадание воды или

водных растворов.

- Убедиться, что все разъемы полностью вставлены надлежащим образом.

Электрические компоненты не должны иметь видимых повреждений. В противном случае проникновение воды или водных растворов может привести к их порче.

Перед возобновлением пользования кроватью необходимо убедиться в отсутствии остаточной влаги. При необходимости дополнительно просушите детали.

Электрические компоненты не должны промываться струей воды или воздухом под давлением; их можно только протирать влажной тканью.

В случае подозрения на попадание воды на электрические компоненты следует сразу же отключить кабель питания, принять меры к тому, чтобы он не был вновь включен и обратиться в сервисный центр.

Несоблюдение этих правил может привести к порче оборудования и привести к перебоям в работе.

Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати, следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуются протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

! Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

Примечание: Дезинфицирующие средства на альдегидной основе имеют преимущество перед другими, поскольку у них широкий спектр воздействия, относительно низкий протеиновый эффект и экологическая безвредность. Главный недостаток таких агентов в том, что они могут оказаться аллергенами и раздражителями. Средства на глюकोпротаминовой основе не имеют этих недостатков, и столь же эффективны, однако стоят они относительно дороже. Средства на хлорсодержащей основе приводят к коррозии металлов, синтетических материалов, резины и других материалов во время длительного применения или при слишком высоких концентрациях. Таким образом, такие вещества имеют более высокий так называемый протеиновый эффект, являются раздражителями слизистых оболочек и демонстрируют низкую экологическую совместимость.

6. Техническое обслуживание

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации оценивается до 7 лет в зависимости от условий и частоты применения.

Многочисленные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя. В связи с этим при монтаже/демонтаже, появлении скрипов, а так же регулярно **каждые 3-6 месяцев необходимо** производить визуальный осмотр изделия на возможное появление повреждений и ослабление конструкции, и производить протяжку всех болтовых соединений и смазку кровати.

	!Запрещается сильно затягивать крепления электроприводов, они должны свободно вращаться вокруг своей оси!
	!Смазка производится только подвижных и шарнирных соединений, кроме электроприводов! Это может вызвать поломку электрической части привода.
	В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации и отсоединена от источника питания. Необходимо срочно связаться с продавцом либо обратиться в сервисную службу!

7. Поиск неисправностей и их устранения

Перед вмешательством в изделие необходимо отсоединить изделие от электросети.

Работу, связанную с устранением неисправностей, может осуществлять только специалист сервисной организации, прошедший обучение.

Сбой	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Нет напряжения в розетке	Включить защитный выключатель
	Повреждён предохранитель в блоке управления	Неисправный предохранитель заменить.
	Неисправный электрический шнур	Проверить подводящий шнур, неисправный шнур заменить.
	Попадание воды в	Отключить кровать от

	блок управления	сети и обратиться в сервисную службу
Устройство при работе издает скрип	Давно не проводилось тех обслуживание кровати.	Смазать подвижные и шарнирные элементы кровати
При включении не активизируется индикация на ПУ, либо не горит светодиодный индикатор на блоке управления	Отсутствует напряжение сети.	Проверить напряжение сети
	Поврежден кабель питания.	Заменить сетевой кабель
	Повреждён предохранитель в блоке.	Неисправный предохранитель заменить.
Работает только туалетное устройство	Требуется калибровка блока управления.	Обратитесь в сервисную службу
При выравнивании кровати кнопкой «В кровать», приподнимается одна из сторон бокового переворота	Требуется регулировка бокового переворота.	Обратитесь в сервисную службу

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на кровать составляет 12 месяцев, на матрас, входящий в комплект 6 месяцев.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении документов, подтверждающих покупку.

Для обращения по гарантии



QR код для перехода на сайт для заполнения заявки

Или свяжитесь по номеру телефона:

+7 (495) 775-75-95, доб. 170

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

*Изделие является медицинским изделием не подлежит возврату и обмену (Согласно перечню непродовольственных товаров надлежащего качества утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2463)

Получатель: _____

Дата продажи: _____ М.П.

Продавец: _____

При покупке удаленным способом (интернет магазин, маркетплейс и прочее) отметка продавца не требуется, при обращении необходимо указать номер заказа и место покупки.