

7 Техническое обслуживание и ремонт

- 7.1 Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.
7.2 По мере необходимости подтягивайте ослабевшие крепежные детали подъемника.
7.3 При возникновении неисправности в работе подъемника необходимо обращаться на завод-изготовитель или в сервисную службу по месту эксплуатации.

8 Условия транспортирования, хранения, утилизации

- 8.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
Транспортирование изделия морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерная и мелкая.
8.2 Условия транспортирования изделия, изготовленного по условиям климатического исполнения УХЛ 4.2, по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.
8.3 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в крытых помещениях отправления (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
8.4 Утилизация изделия производится по нормам, действующим в эксплуатирующей организации.

9 Свидетельство о приеме

Подъемник бытовой СН-41.01. для медико-социальной реабилитации изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

М.П. "КОНМЕТ ХОЛДИНГ"
"CONMET HOLDING"
ДЛЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНМЕТ ХОЛДИНГ"
подпись

31 октября 2019г.

дата

10 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу подъемника в течение 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 24, ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

тел.: (495) 456-97-50

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие характеристики конструкции.

М.П. "КОНМЕТ ХОЛДИНГ"
"CONMET HOLDING"
ДЛЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНМЕТ ХОЛДИНГ"
подпись

01 ноября 2019г.

дата

ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»



ПОДЪЕМНИК БЫТОВОЙ
ДЛЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

СН-41.01

ТУ 9451-008-40259145-99

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СН-41.01 РЭ

г. Москва

1 Назначение

Подъемник бытового с гидроприводом предназначен для облегчения ухода за лежачими больными, может быть использован в больницах, домах инвалидов или домашних условиях.

2 Технические параметры

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Ширина опор в сведенном положении, мм, не более	560
Ширина в разведенном положении, мм, не менее	1060
Длина макс, мм, не более	1117
Высота подъема, мм, не более	1260-1759
Грузоподъемность, кг, не более	120

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки подъемника должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование	Количество
1	Подъемник	1
2	Подвеска	1
3	Руководство по эксплуатации СН-41.01 РЭ	1

4 Устройство и работа изделия

Подъемник (рис.1) состоит из следующих основных частей:

Основание (1), стойка (2), стрела (3), домкрат (4), механизм разведения опор (5), рычаг (6), траверса подвески (7), кран домкрата (8), рычаг домкрата (9), подвеска (10).


Основание подъемника (1) — две сварные опоры с колесами, соединенные между собой механизмом разведения опор (5) с рычагом (6).

Для того, чтобы развести опоры необходимо выжать вперед рычаг (6) и повернуть рычаг (6) вправо до его фиксации.

Для того, чтобы свести опоры необходимо выжать вперед рычаг (6), повернуть рычаг (6) влево до его фиксации.

Подвеска (10) подкладывается под больного. Длина строп регулируется по месту. Затем карабины подвешиваются на траверсу подвески (7).

Перед тем, как посадить пациента на подвеску, стрелу подъемника необходимо опустить, для этого нужно кран домкрата (8) повернуть до упора влево (против часовой стрелки) и надавить на стрелу (3) вниз. После этого усадить пациента на подвеску и поднять вверх, для чего кран домкрата (8) повернуть вправо до упора (по часовой стрелке) и, качая рычаг домкрата (9), поднять на необходимую высоту. Далее развести опоры и перемещать пациента в нужное вам место (ванная, туалет и т.д.).

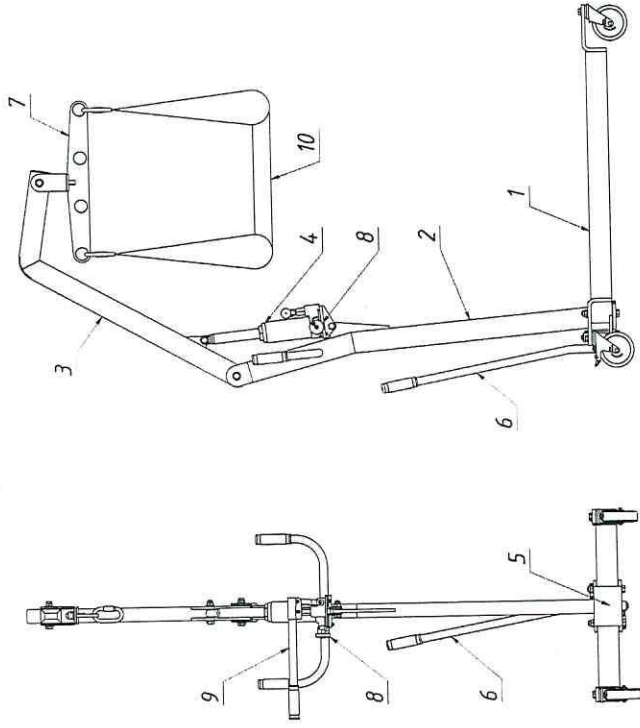

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Перед подготовкой подъемника к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте комплектность и его внешний вид визуальным осмотром.

6 Меры безопасности

6.1 Перед началом использования подъемника необходимо:

а) убедиться в его исправности;

б) проверить целостность и надежность крепления подвески.

6.2 Сажать пациента на подвеску только при опущенной стреле.

6.3 Перевозить пациента на подъемнике по возможности только с разведенными опорами.