

KE04/ M2-JX

**Гинекологическое кресло с электроприводной регулировкой
высоты в телескопической колонне**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
2.	Описание	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 3
4.	Правила безопасности	стр. 3
5.	Технические характеристики	стр. 4
6.	Кресло в деталях	стр. 5
7.	Положение сердечно-легочной реанимации при помощи механического рычага	стр. 6
7.	Управление функциями кресла при помощи пульта	стр. 6
8.	Перемещение гинекологического кресла	стр. 6
9.	Вспомогательные устройства	стр. 7
9.1.	Быстросъемная ножная секция	стр. 7
9.2.	Регулируемые опоры для ног	стр. 7
9.3.	Регулируемые подлокотники	стр. 8
9.4.	Съемный лоток для сбора жидкостей	стр. 8
10.	Очистка и дезинфекция	стр. 9
11.	Техническое обслуживание	стр. 9
12.	Комплект поставки	стр. 9
13.	Гарантийные обязательства	стр. 10

1. Введение

Гинекологическое кресло модель M2-JX используется для проведения гинекологического осмотра и проведения манипуляций с пациентом.



Чтобы правильно использовать данное кресло, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации.

2. Описание

- Кресло управляется при помощи пульта управления на проводе.
- Все функции гинекологического кресла, включая регулировку высоты, положение Тренделенбург/Антитренделенбург, а также изменение угла задней спинки кресла управляются при помощи электрического привода.
- Сиденье расположено на бесшумной телескопической колонне с электрическими актуаторами LINAK.
- Для удобства эксплуатации кресла предусмотрены вспомогательные устройства, такие, как подлокотники, опоры для ног, съемный лоток для сбора жидкостей и т.д.
- Обивка изготовлена из прочного материала, стойкого к дезинфекции.

3. Условия использования

- Температура воздуха: от 5°C до 40°C, относительная влажность: не более 80%.
- Требование по электропитанию: ~220 В±10%, 50 Гц±1Гц, входная мощность: 90 В-А.
- Класс безопасности : Часть I Класс В общий тип оборудования.
- Не используйте оборудование в среде смешанного воздуха: огнеопасный анестезирующий газ и воздух или кислород или закись азота.
- Управление оборудованием: кратковременная нагрузка при длительной эксплуатации, время нагрузки/интервал: 2 мин/5 мин.
- Предохранитель : RF1-20-1A; 2PCS.

4. Правила безопасности

- Перед использованием кресла внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- Если в кресле обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Рекомендуемая непрерывная нагрузка не должна превышать 2 минуты, интервалы между нагрузками - не менее 5 минут.
- Во время работы с креслом оно должно быть зафиксировано, чтобы минимизировать риск травмы пациента.

- Крепко фиксируйте подлокотники и опоры для ног, дабы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на подлокотники и опоры для ног, помещая на них посторонние предметы.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на секции кресла во время нахождения на нем пациента – например, сидение на нем еще одного человека недопустимо.
- Если инфузионная стойка закреплена на кресле, а кресло находится в положении Тренделенбург/Антитренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между креслом и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.
- При проведении технического обслуживания или очистки кресло должно быть отключено от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кресла отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кресла.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоя электрической сети.

5. Технические характеристики

Длина / ширина кресла	1800 * 760 мм
Длина / ширина спинки	770 * 595 мм
Длина / ширина сиденья	470 * 580 мм
Высота ложа	660 - 1060 мм
Угол наклона спинной секции	70 градусов
Положение Тренделенбург	12 градусов
Положение Антитренделенбург	12 градусов
Максимальная рабочая нагрузка	230 кг


6. Гинекологическое кресло в деталях



- 1 – Тазовая секция
- 2 – Опоры для ног
- 3 – Ручки для пациентки
- 4 – Инфузионная стойка
- 5 – Спинная секция

- 6 – Пульт управления
- 7 – Основание с телескопической колонной и педалью тормоза
- 8 – Съёмный лоток для сбора жидкостей
- 9 – Отверстия для вставки ножной секции

7. Управление функциями кресла при помощи пульта

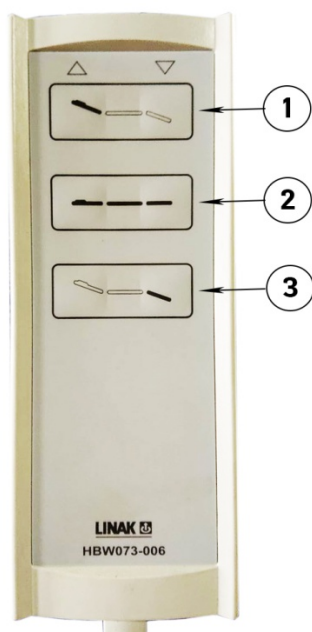

1. Поднятие/опускание спинной секции – до 60°
2. Регулировка высоты – 660 мм до 1060 мм.
3. Положение Тренделенбург/Антитренделенбург – до 12°



При обнаружении сбоев в двигателе, блоке управления или пульте управления, не пытайтесь отремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

8. Перемещение гинекологического кресла

В основании кресла имеется педаль, с помощью которой можно перемещать кресло.




Нажмите ногой на педаль и заведите ее под фиксирующий ограничитель. При этом основание кресла приподнимается и освобождаются ролики, благодаря чему кресло можно перемещать по помещению.

Чтобы зафиксировать кресло, верните педаль в исходное положение.

9. Вспомогательные устройства

9.1. Быстросъемная ножная секция

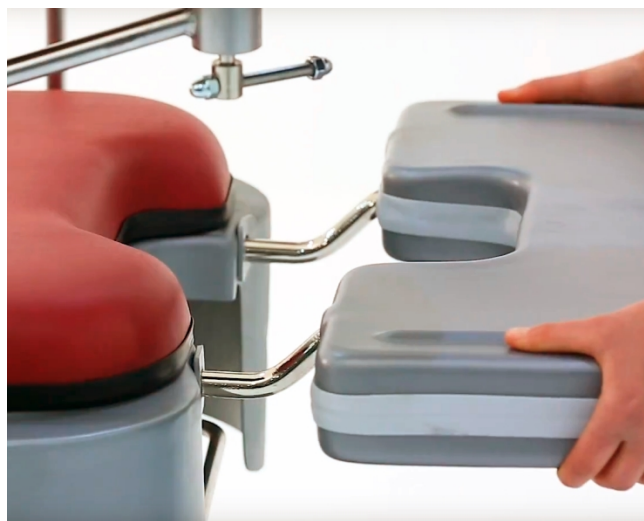

Чтобы прикрепить ножную секцию к креслу, вставьте ее стержни-держатели в отверстия под тазовой секцией кресла.

9.2. Регулируемые опоры для ног



Вставьте стержни опор для ног в отверстия по обеим сторонам тазовой секции. Закрутите ручки рядом с отверстиями, чтобы зафиксировать опоры в необходимом положении.

Чтобы отрегулировать наклон подколенника или повернуть его, ослабьте ручку, чтобы освободить шарнир под подколенником.

Закрутите ручку, чтобы зафиксировать подколенник в нужном положении.

9.3. Регулируемые подлокотники



Вставьте стержни подлокотников в отверстия по обеим сторонам спинной секции.
Закрутите ручки рядом с отверстиями, чтобы зафиксировать опоры в необходимом положении.
Ослабьте ручку, чтобы отрегулировать положение и угол подлокотника.

9.4. Съемный лоток для сбора жидкостей



Лоток устанавливается на металлический держатель под тазовой секцией кресла.
Чтобы использовать или извлечь лоток, максимально выдвиньте держатель.

10. Очистка и дезинфекция

Перед очисткой кресло должно быть приведено в удобное положение и отключено от электросети.

- Выполняйте очистку и дезинфекцию обивки гинекологического кресла с помощью 20% раствора спирта, смешанного с 2% глутаральдегида.
- Возможна дезинфекция кресла с помощью ультрафиолетового излучения.
- После окончания эксплуатации произведите очистку кресла и оботрите его насухо, чтобы исключить попадание жидкости во внутренние электрические компоненты.



При очистке кресла используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кресла.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кресла.

11. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кресла могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов не реже 1 раза в 6 месяцев:

1. Шнуры и штифты регулируемых секций – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
2. Моторные поршни – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Регулярно проверяйте целостность соединительного провода пульта управления.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кресла и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

12. Комплект поставки:

- гинекологическое кресло – 1 шт.;
- вспомогательные устройства – в зависимости от выбранной Вами комплектации;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

13. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев _____

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____