8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Кресло-коляска для инвалидов

MET MK-390

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов MET MK-390 предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску для инвалидов MET MK-390 в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски МЕТ МК-390 противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потере функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания.
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- При посадке и высадке с кресла-коляски для инвалидов МЕТ МК-390 колеса необходимо поставить на тормоза.
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног.
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 градусов имеется опасность опрокидывания назад.
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед.
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация кресла-коляски

Посадка и высадка спереди:

- Поставьте кресло на стояночный тормоз.
- Отведите в сторону подножки для ног.
- При помощи сопровождающего лица переместите пациента.
- Верните обратно подножки и поставьте на них ноги.
- Пристегните ремень безопасности

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК - 390 складывается и раскладывается без инструмента.

Складывание (Рис.1) и раскладывание (Рис.2) кресла-коляски производится по вертикальной оси.

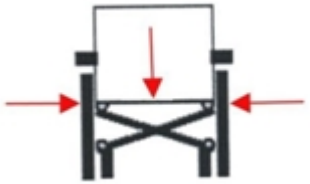


Рис.1

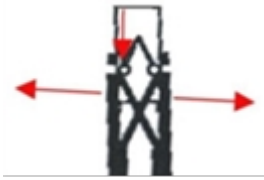


Рис.2

Использование туалетного устройства:

- Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз.
- Вытащите вперед среднюю часть сиденья между ног.
- Используйте туалет по назначению.
- Верните обратно среднюю часть сиденья.
- Достаньте туалетное судно и утилизируйте содержимое.
- Верните обратно туалетное судно.

5. Транспортировка:

- Кресло-коляска удобно складывается и занимает мало места.
- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

6. Рекомендации по уходу:

- Обивку сиденья, спинки, подлокотники и туалетное устройство необходимо чистить теплой водой с мягкими моющими средствами.
- Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.
- Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Технические характеристики

Ширина сиденья, см	43
Общая ширина, см	67
Глубина сиденья, см	43
Вес, кг	15
Номинальная нагрузка, кг	130