МЕТ ЛИЛИ

Кровать медицинская электрическая двухфункциональная МЕТ ARCTIC

Руководство по эксплуатации



** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества*

** Пожалуйста, прочтите и соблюдайте данное руководство перед каждым использованием! Если данное изделие меняет владельца, пожалуйста, передайте это руководство новому владельцу!*

Содержание

Содержание…… 2
Введение…… 3
Правила безопасности…… 4
Комплектация и инструкция по сборке (основание кровати)…… 6
Комплектация и инструкция по сборке (каркас кровати)…… 8
Пульт управления…… 10
Сопряжение…… 11
Гарантийные обязательства…… 12

Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в домашних условиях.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.



Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

Комплектация

В зависимости от приобретённой Вами модели кровать может состоять из регулируемого основания, изголовья, изножья, боковых панелей и защитных боковых ограждений. Основание может состоять из нескольких секций.

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.

Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

Правила безопасности

Данное руководство содержит рекомендации по технике безопасности, призванные обеспечить правильное использование изделия и предотвратить несчастные случаи и повреждения. Пожалуйста, внимательно прочтите приведённую ниже информацию.

	При каждом отключении и последующем восстановлении электропитаниятребуется выполнить операцию перезагрузки
	Зазоры между ограждениями, изголовьем, изножьем или каркасом кровати (особенно если кровать приподнята) могут стать причиной защемления или травмы. Особую осторожность следует проявлять пользователям с нарушением ментального поведения или ограниченной подвижностью.
	Не допускайте защемления частей тела между кроватью, стенами или окружающими предметами.Это может привести к травмам.
	Приподнятые боковые ограждения не могут полностью предотвратить падения.Слишком толстые матрасы увеличивают риск падений. Используйте матрас рекомендованной толщины.
	Устанавливайте боковые ограждения в правильном положении. Неправильная установка может привести к падениям или застреванию.Неправильно установленные боковые ограждения могут быть плохо закреплены, что создаёт риск травм.
	Подвижные части могут защемить части тела. Перед использованием пульта дистанционного управления убедитесь в отсутствии препятствий.
	Использовать кровать следует после того, как будет установлено, что пользователь и окружающая обстановка безопасны. Ошибки в процессе эксплуатации могут привести к травмам.
	Не садитесь на боковые ограждения, изголовье или изножье кровати. Это может привести к повреждениям и деформациям.
	Не садитесь на спинную или ножную секции в поднятом положении, а также во время циклов подъема или опускания
	Регулировки высоты и углов наклона следует выполнять исходя из состояния пользователя.
	Не выполняйте регулировки углов наклона , находясь в положении лёжа лицом вниз или на боку. Это может привести к травмам.
	Не двигайте кровать, дергая за изголовье или изножье. Это может привести к повреждениям изделия.
	Не размещайте провода под или между движущихся деталей. Поврежденные провода и кабели могут привести к поражению электрическим током и пожару.
	Перед применением следует проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний.
	Пользователям электронных медицинских устройств (например, кардиостимуляторов) необходимо проконсультироваться с врачом перед их использованием.
	Не используйте кровать, если шнур питания, вилка или кабели повреждены, или неплотно закреплены. Возможно возгорание или поражение электрическим током.
	Избегайте прикосновения к розетке мокрыми руками. Отключайте от сети, держась за вилку, а не за шнур.
	Без лишней надобности не разбирайте кровать и не пытайтесь модифицировать ее. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
	Регулярно делайте осмотр кровати, проверяйте соединения, они могут ослабевать в процессе использования.
	Не разрешайте детям пользоваться кроватью без присмотра взрослых
	Максимальная нагрузка составляет 250 кг, не превышайте этот предел. Это может привести к поломке кровати или получению травм пользователем. Конструкция кровати выдержит рекомендуемый вес, если равномерно распределить его по всей поверхности кровати.

Правила безопасности

	Не прыгайте на кровати и не залезайте под нее. Это может привести к поломке кровати или травмам
	Для предотвращения повреждения поверхности пола, рекомендуется постелить ковер под кровать
	Не размещайте посторонние предметы под кроватью, это может привести к сбоям в функциях регулировок
	Избегайте непрерывного использования двигателя (более 5 минут). Перегрев может привести к поражению электрическим током или пожару
	Не сгибайте пульт дистанционного управления, а так же шнур питания, это может привести к короткому замыканию
	Не нажимайте одновременно на несколько кнопок на пульте дистанционного управления, это может привести к перегреву или возникновению неисправностей
	Отключайте кровать от сети, когда перемещаете ее, не используете или оставляете на длительное время
	Кровать должна находиться вдали от источников тепла
	Во избежание возгорания или поражения электрическим током избегайте попадания влаги на электрические и металлические элементы кровати
	Собирать/перемещать кровать должны минимум 2 человека
	Не устанавливайте регулируемое основание кровати вертикально на изголовье, изножье или на бок. Это может привести к травмам людей или повреждению основания.
	Перед надеванием или снятием аксессуаров (постельного белья) выньте вилку из розетки

Рекомендации по использованию батареек

При использовании батареек соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Используйте только батарейки типа 6LR619V или LR03 AAA;
2. Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности;
3. Не смешивайте разные типы батареек и не используйте старые/новые батарейки;
4. Извлекайте батарейки, если они долгое время не используются;
5. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки.


Отключение электроэнергии

Во время отключения электроэнергии вставьте 9-вольтовую батарею, чтобы опустить кровать в горизонтальное положение. Извлеките батарею после возобновления подачи электроэнергии


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уровень шума, создаваемого во время работы, напрямую зависит от условий эксплуатации. Например, если основание расположено на деревянном полу и включена функция массажа, будет слышен вибрирующий сигнал. Чтобы свести к минимуму этот резонанс, подложите по кусочку ковра под каждую ножку основания.
Если крепежные болты не затянуты должным образом, возможно возникновение вибрации или шума от кронштейнов изголовья, спинок кровати или изножья


Комплектация (основание кровати)

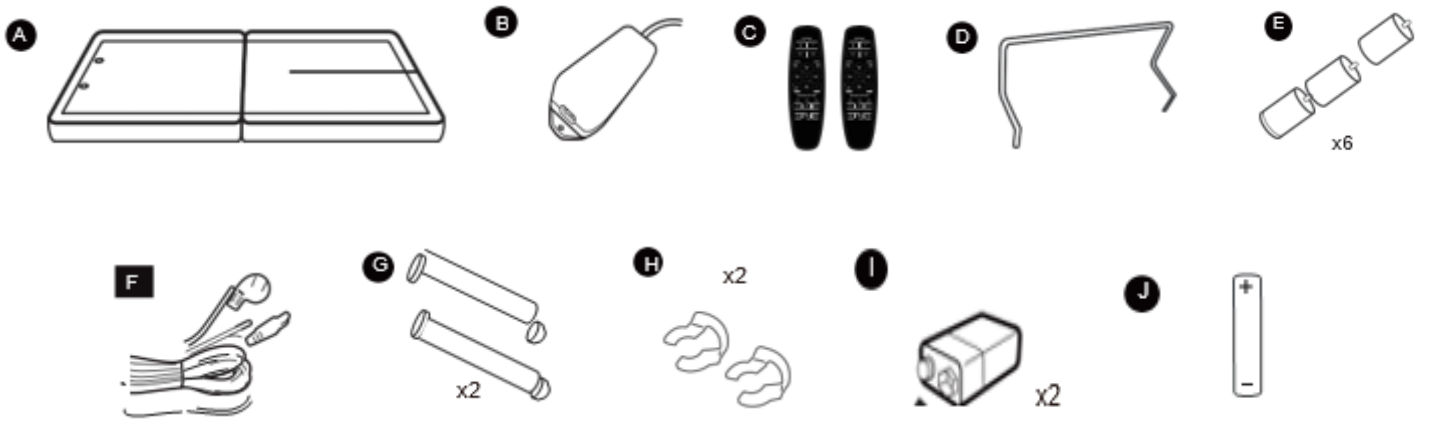


Инструкция по сборке (основание кровати)

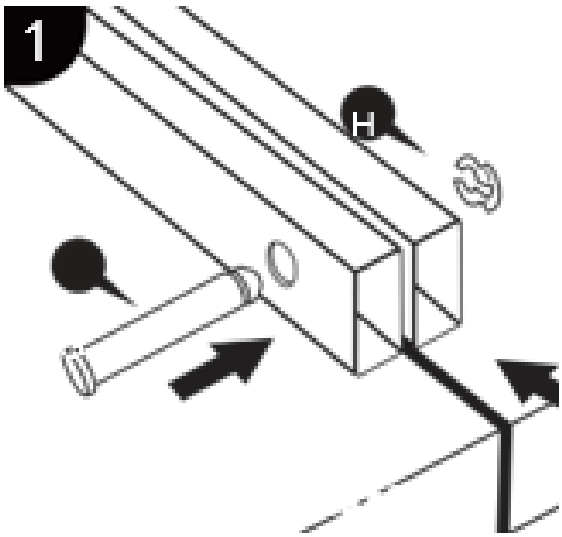

1. Распакуйте основание кровати и извлеките принадлежности.
2. Разложите кровать горизонтально. (электрические приводы должны находиться сверху)
3. Соедините части ложа. (рис. 1)

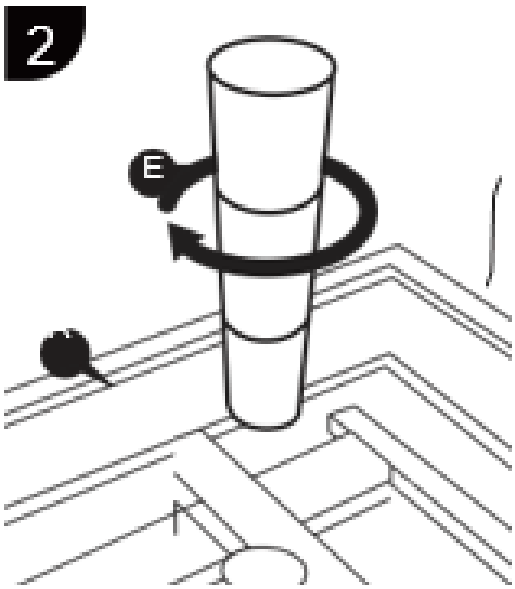


4. Ножки кровати состоят из 3-х частей с винтовой резьбой, соедините все части и прикрутите 6 ножек к основанию кровати. (рис.2)

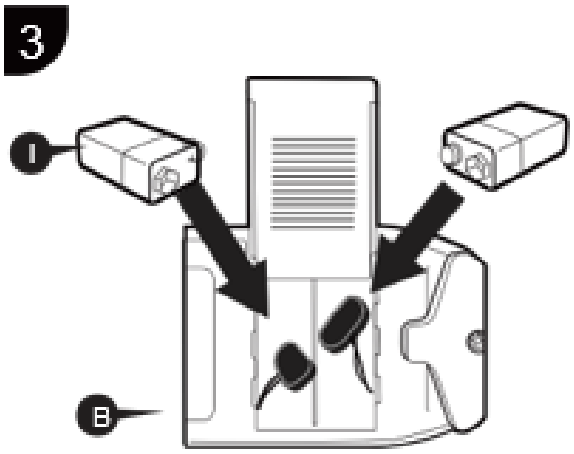


5.Вставьте аккумуляторные батареи в резервный блок питания



6.Подключите резервный блок питания к блоку управления

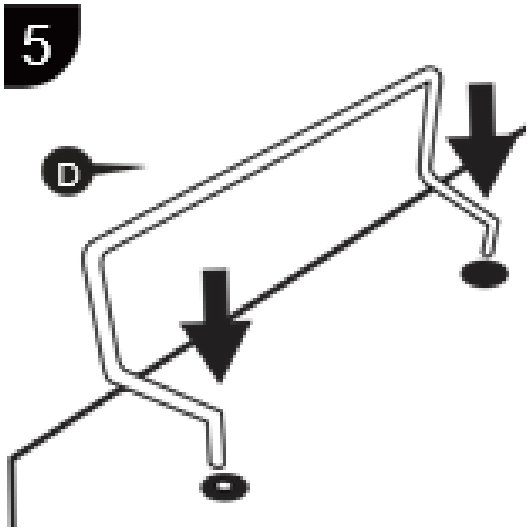


7. Установите основание кровати на ножки.
8. Установите держатель матраса в ножной секции. (рис.5)

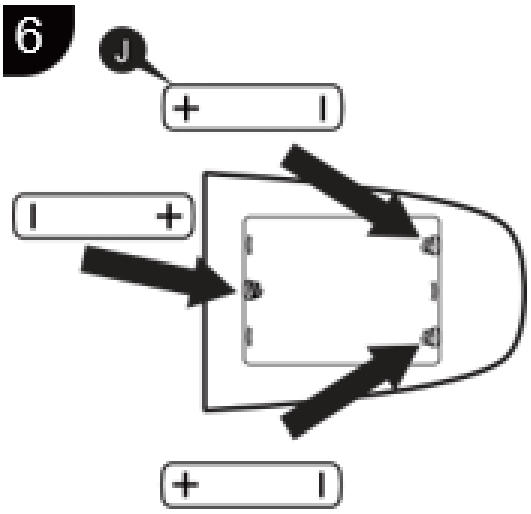

9. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления. (рис. 6)

Комплектация (каркас кровати)

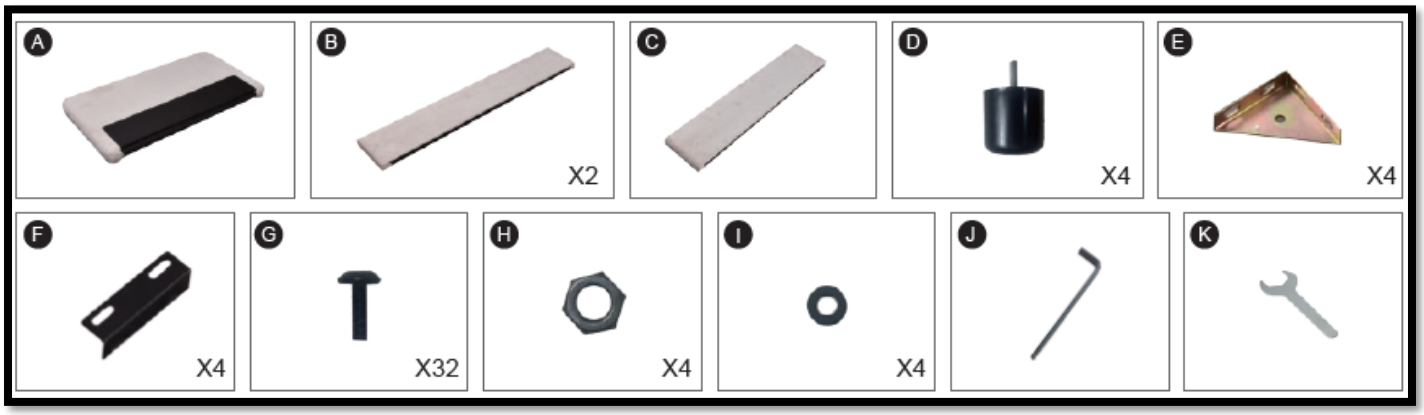

	При сборке каркаса кровати сначала затяните винты, но не фиксируйте их полностью. Оставьте небольшой зазор для регулировки, чтобы обеспечить окончательное позиционирование и более точную посадку.

Инструкция по сборке (каркас кровати)

1




Прикрепите крепежные детали E и F к боковой панели B с помощью винтов G (4 шт.).

2




Следуя методу, описанному в шаге 1, установите крепежные элементы с левой и правой сторон. Повторите то же самое для обеих боковых панелей.

3

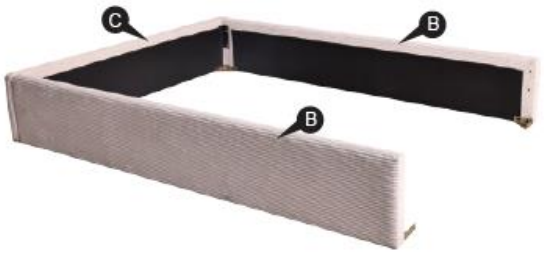


Расположите обе боковые панели B и изножье C как показано выше.

4

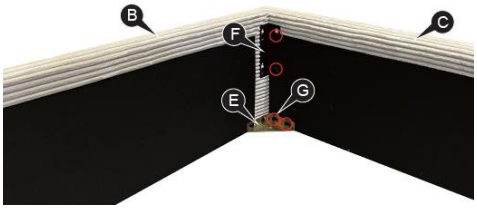


Совместите отверстия крепежных элементов E и F с отверстиями на изножье C с помощью винтов G (4 шт.).

5

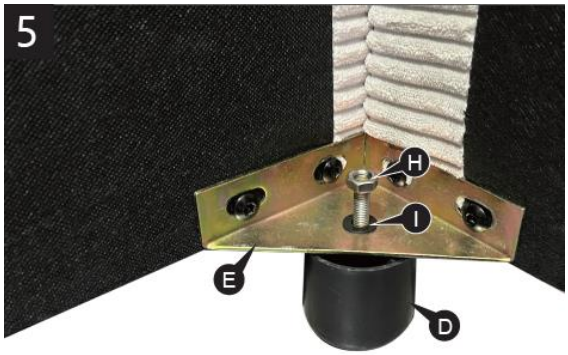

Как показано на рисунке, вставьте ножку D в отверстие крепежного элемента E. Вставьте шайбу I и закрутите гайку H с помощью гаечного ключа K

6

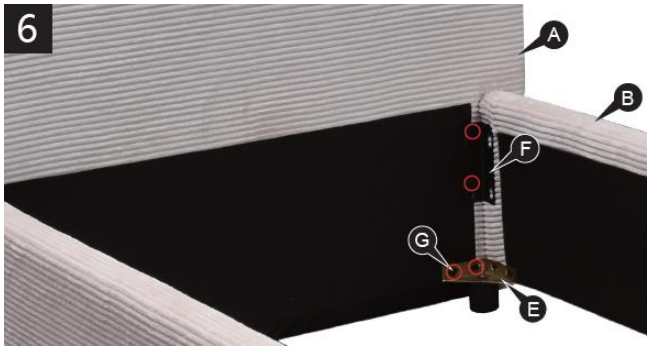

Совместите крепежные дэлементы E и F с отверстиями на изголовье A и закрепите их винтами G (4 шт.).

7



Каркас кровати готов

8



Убедитесь, что шнур питания вытянут из-под боковой панели каркаса кровати, когда будете устанавливать регулируемое основание .

9



Установите боковые ограждения как показано на рисунке.


10



Наденьте чехлы на боковые ограждения и положите матрас.

	Неполная или неправильная сборка может привести к травмам. При возникновении посторонних шумов или вибраций немедленно прекратите использование.
	Осмотрите все детали после завершения сборки. В случае обнаружения неисправностей или отклонений в работе электрики свяжитесь с нами.

Пульт управления

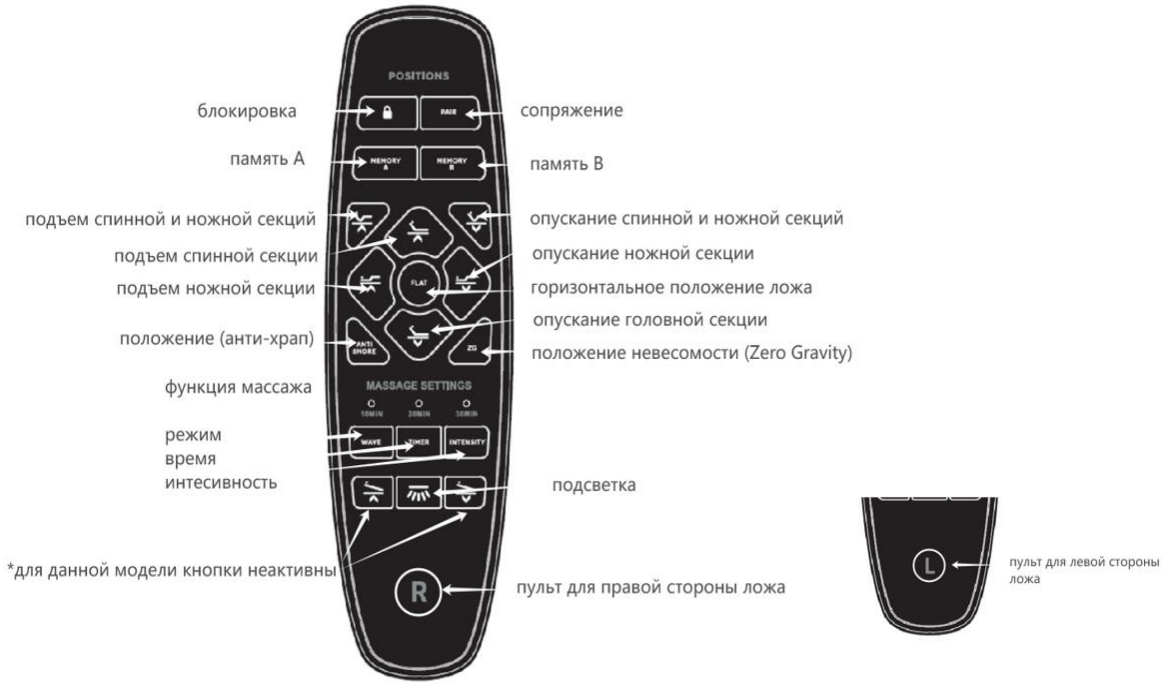

Описание функций и положений

- Функция запоминания положений «MEMORY A» и «MEMORY B»: Нажмите кнопку «FLAT» /Горизонтальное положение ложа на пульте. Отрегулируйте нужное положение с помощью кнопок Подъём спинной секции и Подъём ножной секции. Затем нажмите и удерживайте кнопку «MEMORY A» или «MEMORY B»

- В данной модели также есть положения, которые можно предустановить и запомнить – Антихрап «ANTI SNORE» и Положение невесомости «ZG». Для этого необходимо отрегулировать секции в нужное положение, а затем нажать и удерживать кнопку, которую Вы хотите установить, в течение 5-7 секунд. Как только панель пульта управления начнёт мигать, выбранное положение будет сохранено.

- Функция массажа:
а) «WAVE»: Нажмите эту кнопку, чтобы переключать режимы. Доступны 4 частоты вибрации A-B-C-D
б) «INTENSITY»: Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить массаж и изменить интенсивность 0 (выкл) -1-2-3-0 (выкл)

- Блокировка/Защита от детей « » : удерживайте в течение 10 секунд для блокировки; удерживайте 5 секунд для разблокировки.

Сопряжение

Способ сопряжения 1

Шаг 1: Отсоедините шнур питания, включите питание через 5 секунд. Индикатор блока управления загорится синим, подсветка нижней панели начнет мигать: блок управления перешел в режим сопряжения.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения. Подсветка пульта дистанционного управления мигает: пульт дистанционного управления перешел в режим сопряжения. Сопряжение завершено, как только подсветка пульта перестанет мигать и останется включенной, а индикатор блока управления загорится зеленым (или подсветка под кроватью перестанет мигать и погаснет). Сопряжение завершено.

Примечание: После возобновления подачи питания на блок управления, он перейдет в режим сопряжения в течение первых 10 секунд. Если до выключения питания с пультом дистанционного управления уже было выполнено успешное сопряжение, повторное сопряжение не требуется. Через 10 секунд индикатор блока управления загорится зеленым (или подсветка под кроватью перестанет мигать и погаснет). Сопряжение завершено. Вы можете управлять кроватью непосредственно с помощью пульта дистанционного управления.

Способ сопряжения 2

Шаг 1: Дважды нажмите на кнопку сопряжения блока управления. Индикатор блока управления загорится синим, подсветка под кроватью начнет мигать: блок управления перешел в режим сопряжения.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на пульте дистанционного управления. Замигает подсветка пульта дистанционного управления: теперь пульт находится в режиме сопряжения. Сопряжение завершено, как только подсветка пульта дистанционного управления перестанет мигать и останется включенной, а индикатор блока управления загорится зеленым (или подсветка под кроватью перестанет мигать и погаснет). Сопряжение завершено.





Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____

Сервисный центр: ООО «МЕТ», 108811, город Москва, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.
Телефон сервисной службы: (495) 150-27-26, (495) 126-92-79