ООО "Медкомплекс-А.Р.К."

Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,
Промикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

Акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования

Производство прочной медицинской техники с 1936 года

ОКП 94 5150

РУ № ФСР 2009/06387 от 12.11.2015 г. ДС РОСС RU.МН08.Д01684

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУП
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
тЦД3.531.003.ПС (разборная)

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1.Тележка для уборки помещений ТУП предназначена для внутрикорпусной транспортировки приспособлений и принадлежностей, необходимых для уборки помещений в лечебных учреждениях и сбора мусора.
Тележку изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2. по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9451-031-07614107-2005.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Габаритные размеры тележки: - длина - ширина - высота	 920 ± 10 мм 500 ± 20 мм 918 ± 20 мм
Габаритные размеры ёмкости для сбора мусора: - длина - ширина - глубина	 390 ± 15 мм 250 ± 10 мм 670 ± 15 мм
Масса	13,6 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	60 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с предельной рабочей нагрузкой, не более	10 кг
Усилие, прикладываемое к педали тормоза колеса при его торможении, не более	15 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п\п	Наименование	Количество, штук
1	Основание	1
2	Рама	1
3	Скоба	1
4	Ёмкость навесная	1
5	Пакет полиэтиленовый	1
6	Лоток	1
7	Болт М8х16	4
	Эксплуатационная документация	
8	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:
1. Допускается поставка тележки в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.
2. По отдельному заказу тележка может быть укомплектована швабрами, щеткой, ведром и т.п..

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Тележка состоит из основания 1, установленного на четыре самоориентирующихся колеса 7 и 8, скобы 2, одновременно выполняющие роль ручек, рамы 3, соединяющей основание 1 со скобой 2, съемного лотка 6, установленного в раму основания, на которой ставится ведро и приспособления для уборки, ёмкость 4, пакета 5 для сбора мусора и четырёх амортизаторов 9, которые служат для смягчения удара при наезде на препятствие.
4.2. Для подготовки к работе, распакуйте тележку и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином, поведите санитарную обработку горячей водой с моющими средствами и последующую просушку.
4.3. При получении тележки в разобранном виде, произведите сборку согласно рисунка 1.
4.4. Проверьте комплектность.
4.5. Для затормаживания колеса 8 нажмите на педаль 10.
Растормаживание колеса производите поворотом педали в исходное положение.
4.6. Перед перемещением тележки растормозите колеса.
4.7. При загрязнении полиэтиленового пакета 5 замените его на чистый, или загрязненный промойте и подвергните санитарной обработке.
4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**: эксплуатации тележки с неисправными тормозами, другими погнутыми, изношенными или поломанными частями и их креплениями.

5. Техническое обслуживание

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных или поломанных; смазке раз в год подшипников колёс.
5.2. Проверка технического состояния в целью установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.
5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

ООО "МеталлКомплекс "А.В.К."

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающих декларацию о соответствии)

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 4 по Нижегородской области, дата регистрации 21.10.2002, ОГРН 1025201635205

(сведения о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Костров Андрей Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Тележка внутрикорпусная ТВК-1 по ТУ 9451-046-07614107-2006, тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-01 «Д» по ТУ 9451-046-07614107-2006, тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-02 «Д» по ТУ 9451-011-07614107-2005, тележка для доставки и сбора грязной посуды ТПП-1 по ТУ 9451-056-07614107-2009, тележка для уборки помещений ТУП по ТУ 9451-031-07614107-2005, тележка для перевозки больных со съемной панелью ТБС-01 по ТУ 9451-045-07614107-2007, комплект подголовника или панель с подголовником, матрац).

(наименование, марка, модель, артикул продукции, выпускаемой по документам, на которые распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКП 945150

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, размер(ы) документа (документов), устанавливающего код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКП)

Изготовитель: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования". Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062

(наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51084-97 (Разд. 6, 8)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждается

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСТК RU.ОС06.К00210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной ответственностью "ЛАНТА ЦЕНТР" (Свидетельство Рег. № РОСС RU.3608.04ЦК00 от 02.11.2013 года, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Красноярская, дом 17. Регистрационные удостоверения № ФСР 2009/05388 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/05811 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/06528 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/06386 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/06387 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/06389 от 12.11.2015 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

(информация о документах, являющихся основанием

для принятия декларации)

Дата принятия декларации 11.12.2015

Декларация о соответствии действительна до 10.12.2018

М.П. (подпись) Костров Андрей Владимирович (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11МН08, Орган по сертификации продукции ООО "ПромТест"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 117279,Москва, ул. Профсоюзная, 93А, оф. 423


Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.МН08.Д01684, от 11.12.2015

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. Дмитриева Татьяна Осиповна, заместитель руководителя с правом подписи - Гаврилин Александр Сергеевич

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

ООО "Медкомплекс-ДЗМО"

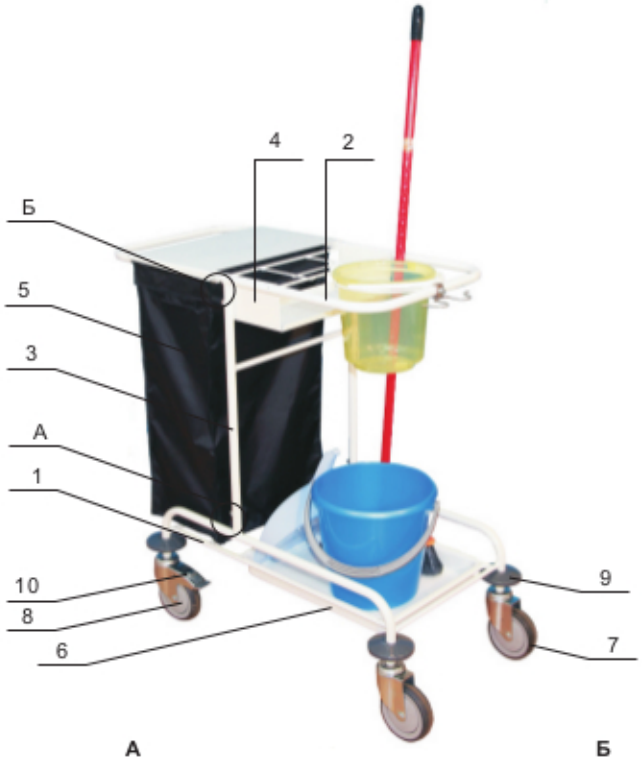



1 - основание; 2 - скоба; 3 - рама; 4 - ёмкость; 5 - пакет; 6 - съёмный лоток;
7 - колесо без тормоза; 8 - колесо с тормозом; 9 - амортизатор; 10 - педаль.

Рисунок 1

6. Консервация

6.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены откоррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877).
6.2. Тележка для уборки помещений ТУП подвергнута в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9451-031-07614107-2005.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
7.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9451-031-07614107-2005.
9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

10.1. Истечение гарантийного срока.
10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:
1. Подготовить нам письмо с указанием:
- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2015 года № ФСР 2009/06387

На медицинское изделие
Тележка для уборки помещений ТУП по ТУ 9451-031-07614107-2005

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования" (АО "ДЗМО"), Россия, 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования" (АО "ДЗМО"), Россия, 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье **№ РД-9073/44559 от 28.10.2015**

Вид медицинского изделия **153900**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5150**

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 8305
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Д.В. Пархоменко

0015646

ООО "Медкомплекс "Т.В.К."

Акционерное общество
Дорогобужский завод
медицинского оборудования

Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:
1. Подготовить нам письмо с указанием:
• наименования товара;
• даты ввода товара в эксплуатацию;
• описания дефекта товара и характера неисправности;
• обстоятельств выявления дефекта;
• контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Тележка для уборки помещений	ТУП	
Наименование изделия	Обозначение	

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

ООО "Медкомплекс "А.В.К."

ООО "Медкомплекс "А.В.К."

Акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования

Место для голограммы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУП**

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок **24 месяца** со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации

м.п.

Дата продажи

ФИО / Подпись

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

м.п.

Наименование покупателя

ФИО / Подпись

тел.: (83177) 4-80-30 (многоканальный)
www.dzmo.ru