Кресло-кушетка на гидравлике КК- 04г

1. Назначение

1.1. Кресло-кушетка предназначена для обеспечения необходимых условий пациенту и медицинскому персоналу при проведении лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в учреждениях здравоохранения, в косметологических и массажных салонах.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры, мм: - длина -2000;
- высота - 800/480;
- ширина - 650.

2.2. Масса, кг: - 60.

2.3. Допустимая равномерная нагрузка не более, кг
- общая - 150
- на спинку - 40
- на ножную секцию - 40
- на подголовник - 10

2.4. Максимальный угол подъема, град.
- спинки - 80;
- подушки для ног - 35;
- сиденья - 30.

2.5. Каркас кресла-кушетки изготовлен из тонкостенных стальных труб с нанесением полимерного порошкового покрытия. Мягкие элементы обтянуты синтетическим заменителем кожи, отвечающим современным эстетическим и гигиеническим требованиям. Основания мягких элементов выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона.

3. Составные части и элементы управления

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас кресла-кушетки	1	6	Ручка подъема спинки	2
2	Подушка для ног	1	7	Педаль подъема кушетки	1
3	Сиденье	1	8	Регулируемые опоры	4
4	Спинка	1	9	Фиксатор положения подушки для ног	1
5	Подголовник	1			


4. Регулировка положения мягких элементов

4.1. Каркас кресла-кушетки (1) оснащен регулируемыми металлопластиковыми опорами (8), что позволяет компенсировать незначительные неровности пола и произвести установку кресла-кушетки в строго горизонтальном устойчивом положении. Регулировка осуществляется поворотом опор по или против часовой стрелки.

4.2. Изменение высоты кресла-кушетки осуществляется ножным гидроприводом. Подъем кресла на необходимую высоту производится несколькими нажатиями на педаль подъема (7). Для опускания кресла необходимо нажать педаль до упора, и кресло плавно опустится.

4.3. Подъем спинки осуществляется газлифтом. При нажатии на ручку подъема (6) спинка начинает подниматься. Выбрав нужное положение спинки, ручку следует отпустить. Для опускания спинки необходимо надавить на верхний край спинки и одновременно нажать ручку. В нужном положении спинки ручку отпустить.

4.4. Положение сиденья фиксируется при помощи двух механизмов «растомат», расположенными с нижней стороны. Выбор положения осуществляется поднятием переднего края сиденья до крайнего верхнего положения, затем опусканием до горизонтального и плавным доведением до нужного. Регулировка осуществляется при свободном положении фиксатора положения подушки для ног (9).

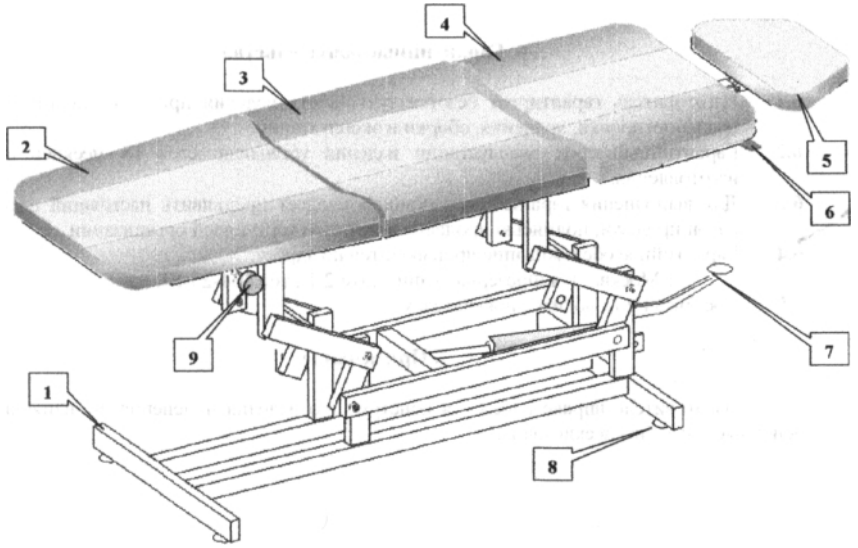

4.5. Установка подушки для ног в нужное положение осуществляется поднятием переднего края и стопорением фиксатора (9) в нужном положении.

4.6. Фиксация подголовника осуществляется винтом-барашком на нужной высоте.

Вышеперечисленные операции позволяют придать креслу-кушетке формы, удобные в каждом конкретном случае, от горизонтальной кушетки до эргономического кресла.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 2.3.

5.2. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Органические растворители и абразивные материалы не применять!

5.3. При проведении регулировки положения мягких элементов не допускать попадания посторонних предметов в зону подвижных частей механизма.

6. Хранение и транспортирование

6.1. Транспортирование изделия осуществляется в упаковке изготовителя автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС.

6.2. Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС.
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25ºС не более 80%.
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.
7.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.
7.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул. Буракова, д.2, тел./ф 366-04-88, 365-43-52
7.5. Доставка производится покупателем

8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.

Штамп ОТК

Дата выпуска и упаковки _____

Дата продажи Подпись продавца М. П.

_____ _____

Изготовлено в России ООО «Автохим»
105118, г. Москва, ул. Буракова, дом 2,
Телефон: 365-43-52, 365-48-30, т/факс: 366-04-88
e-mail: *info@med-inginiring.ru*
med-inginiring@yandex.ru
www.med-inginiring.ru

АБ 86

Кресло-кушетка на гидравлике КК- 04г



ПАСПОРТ