# ПАСПОРТ

## Тележка медицинская BLQ 008



| Габаритные размеры, см | Полки, ящики | Примечание |
|---|---|---|
| Длина: 70,5<br>Ширина: 45,5<br>Высота: 92 | 2 выдвижных ящика,<br>3 полки | Пластиковые ограждения с трёх сторон полок,<br>опорные колеса Ø 75мм |

## 1. Предназначение

Тележка с 2 выдвижными ящиками и 3 полками, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

## 2. Общая характеристика

Тележка состоит из:

- корпуса с боковой ручкой, четырехколесной опоры, на 2 колесах тормоза-фиксаторы, 2 без тормозов;
- 2 выдвижных ящиков
- 3 полок

## 3. Описание

Каркас: ABS-пластик на пластиковом каркасе. Тележка установлена на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.
Топ выполнен из объёмноформированного ABS -пластика с выпрессованой 4-сторонней отбортовкой, высокие пластиковые ограждения с трёх сторон.
Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка, хранение

Тележка обернута полиэтиленовой плёнкой и упакована в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

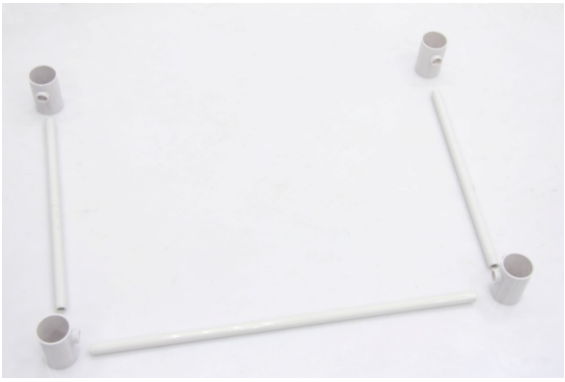
## 5. Уход

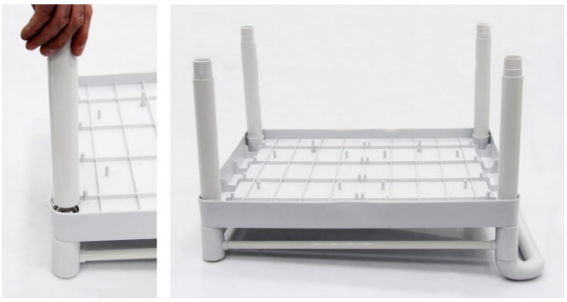
По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

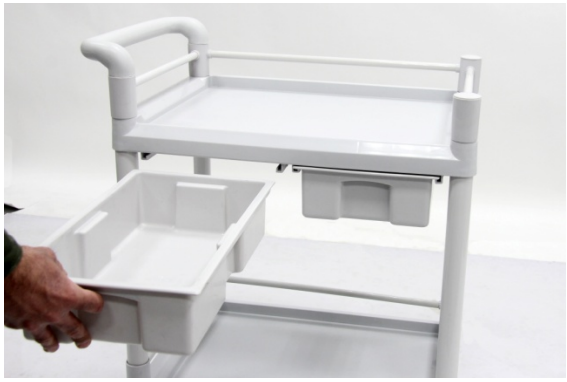
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Сборка

Тележка поставляется в разобранном виде.
Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

| | |
|---|---|
| **Шаг 1: Распаковка**<br><br>Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу. |  |
| **Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок**<br><br>Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас.<br><br>Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте. |  |
| **Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки**<br><br>Проденьте ручку и заглушки с резьбой через втулки.<br><br>На полученную конструкцию установите полку (резьба должна пройти насквозь). |  |

| | |
|---|---|
| **Шаг 4: Установка трубок каркаса**<br><br>Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения. |  |
| **Шаг 5: Установка соединительных муфт**<br><br>Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса. |  |
| **Шаг 6: Установка средней полки**<br><br>Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса.<br><br>Установите вторую полку. |  |
| **Шаг 7: Установка нижней полки**<br><br>Повторите шаги 4 и 5.<br><br>Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса.<br><br>Установите нижнюю полку. |  |
| **Шаг 8: Колеса**<br><br>Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт |  |

| | |
|---|---|
| **Шаг 9: Установить ящики.**<br><br>Вставьте ящики в пазы под верхней полкой. |  |

## 7. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____