8. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.
При покупке товара через маркетплейсы отметка продавца не требуется.
Гарантийный срок начинает отсчитываться со дня покупки.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____
Срок гарантии: 12 месяцев со дня покупки.

По вопросам гарантии обращаться по телефону: 8 (800) 301-75-95
По вопросам гарантии обращаться по электронной почте: otk@met.ru

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ»
по ТУ 32.50.50-013-11459109-2021 с
принадлежностями в варианте исполнения:

Матрас противопролежневый медицинский

MET AIR BASIC XXL



Инструкция по эксплуатации

1. Показания к применению

Уход за лежачими пациентами, для пациентов с тяжелыми стадиями онкологии, для пациентов с инсультом или инфарктом, для пациентов, которые не полностью обездвижены, для пожилых людей, которые мало двигаются в силу старческого бессилия, для пациентов с травмами и болезнями, не позволяющими активно двигаться, для улучшения циркуляцию крови в тканях, для нейтрализации мышечное напряжение в момент отдыха, для профилактических средств при нарушениях центральной нервной системы, для предотвращения возникновения и прогрессирования пролежней, для предупреждения появления дефектов опорно-двигательной системы, нормализация сна, для противостояния появления и развития язв, для комфортного лежачего состояния пациента, при котором части тела под давлением периодически массируются и вентилируются.

2. Комплект поставки

- матрас;
- компрессор;
- шланг соединительный;
- комплект для ремонта;
- инструкция.

3. Технические характеристики

Длительность цикла, мин.	12
Уровень шума, дБ	28
Габариты матраса в рабочем, см.	195 x 130 x 8*
Грузоподъёмность, кг	120
Напряжение сети, В	220/230
Частота, Гц	50-60

4. Противопоказания

Травмы позвоночника и спинного мозга, скелетно-шейных вытяжениях, вес пациента выше 250 кг (зависимости от варианта исполнения изделия).

5. Рабочие условия окружающей среды


Температура: 10 – 35 С°

Относительная влажность воздуха: 15-85 %

*длина меняется в зависимости от выбранного режима, веса пациента и от степени надува

6. Инструкция по эксплуатации

1. Разложите противопролежневый матрас на матрас кровати. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе.
2. Застелите его простыней.
3. Поместите компрессор на плоскую жесткую поверхность или подвесьте на поручни кровати. Убедитесь, что отверстие воздушного фильтра не загорожено.
4. Подсоедините трубки к насосу и матрасу. Убедитесь, что трубки не перекручены и не проходят под матрасом.
5. Подключите компрессор к электросети, после этого включите компрессор в статический (1) или динамический (3) режимов.
6. Отрегулируйте давление воздуха ручкой регулятора (4) в зависимости от веса пациента и его комфорта. Оптимальный вариант, когда между телом пациента и не надутой ячейкой проходят два пальца.

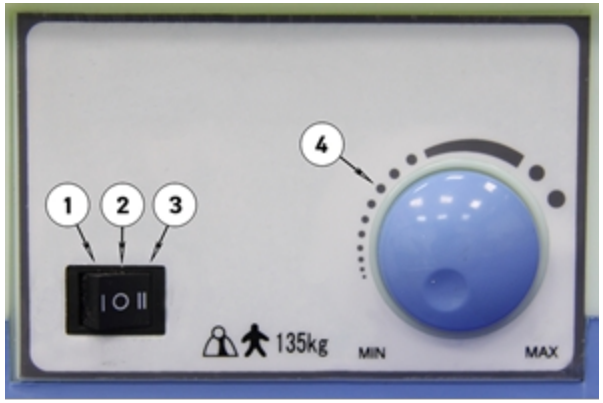

7. Указания по технике безопасности

- Если во время работы компрессора возникает ненормальная ситуация, например громкий шум или странный запах, немедленно отключите прибор от электросети.
- Людям весом больше 120 кг не рекомендуется пользоваться матрасом.
- Держите надувной матрас вдали от острых предметов.
- Храните изделие вдали от открытого огня и любых нагревательных поверхностей, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- Регулярно производите гигиеническую обработку матраса мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- Храните матрас в сдутом сложенном виде, в сухом проветриваемом помещении.
- Матрас должен использоваться только по назначению врача.