АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!



Кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов Armed:

H 011A

www.armed.ru

ВВЕДЕНИЕ

Кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов Armed: H 011A (далее по Руководству - кресло-коляска) предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественных новообразований;
- паралич или ампутация нижних конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Невозможность сохранения сидячего положения;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- психические расстройства;
- наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	1060x640x920
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	810x260x750
Ширина сиденья (± 5%), мм	455
Глубина сиденья (± 5%), мм	450
Высота сиденья (± 5%), мм	530
Ширина между поручнями (± 5%), мм	495
Диаметр колес (передние/задние) (± 5%), мм	200/610
Масса (± 5%), кг	21,5
Грузоподъемность, кг	110

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Для преодолевания препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- Имейте ввиду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на кресло-коляску, а также наклоне на угол более 10 градусов, повышается опасность опрокидывания;

- При посадке и высадке с кресла-коляски колеса необходимо поставить на стояночный тормоз;

- При посадке и высадке не наступайте на подножки;

- При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из кресла-коляски вперед;

- Не превышайте грузоподъемность кресла-коляски;

- Прежде чем в одиночку выполнить какое-то незнакомое действие по использованию кресла-коляски, проделайте его под чьим-либо присмотром;

- Не тянитесь за чем-либо через спинку кресла-коляски – велик риск опрокинуть кресло-коляску.

Сопровождающее лицо должно:

- проверить ходовые качества кресла-коляски;

- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;

- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресла-коляски;

- не разгонять кресло-коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;

- следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;

- ни при каких обстоятельствах не отпускать кресло-коляску при движении в гору или с неё;

- ни в коем случае не наклонять кресло-коляску вперёд;

- чтобы съехать с бордюра, развернуть кресло-коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;

- при преодолении бордюра наклонить кресло-коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;

- проводить регулярные осмотры кресла-коляски;

- при движении по дорогам соблюдать правила дорожного движения.

ОПИСАНИЕ



Рис. 1

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками. Регулировка длины подножек производится при помощи универсального ключа.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена несъемными ступеньчатыми, откидными подлокотниками. Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Перемещением рычага управления тормоза можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования колес.

Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, необходимо использовать его только для стоянки.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины.

Периодически проверяйте давление в камерах шин. Не допускайте езды на спущенных шинах.

РАМА

Рама кресла-коляски изготовлена из металла с защитным покрытием.

СПИНКА И СИДЕНЬЕ

Сиденье и спинка изготовлены из искусственной кожи.

Сзади спинки предусмотрен удобный карман.

Верхняя часть сиденья - съемная, обеспечивает легкий доступ к санитарной емкости.

САНИТАРНАЯ ЕМКОСТЬ

Кресло-коляска оснащена съемной и выдвижной санитарной емкостью.

Санитарная емкость изготовлена из прочного легкомоющегося пластика.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

Кресло-коляска складывается и раскладывается без использования инструментов.

Извлеките кресло-коляску из упаковки. Кресло-коляска поставляется в сложенном виде, надавите на направляющие сиденья, чтобы разложить кресло-коляску по ширине. Зафиксируйте сиденье до защелкивания замков по периметру, сверху положите мягкое съемное сиденье, установите в пазы снизу сиденья санитарную емкость.

Для установки подножек необходимо надеть их на направляющие кресла-коляски, находящиеся на раме, и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия подножек необходимо нажать на рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять с направляющих.

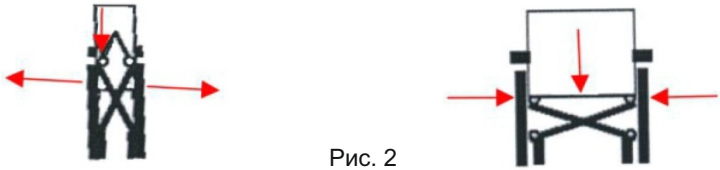


Рис. 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСАДКА И ВЫСАДКА

Посадка и высадка спереди

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;

2. Сложите вверх подножки;

3. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;

4. Опустите вниз подножки и поставьте на них ноги.

Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;

2. Откиньте подлокотник, со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;

3. Сложите подножки вверх;

4. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;

5. Разместите подлокотники и подножки в исходное положение.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии оценивать управление креслом-коляской собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

При самостоятельном передвижении на кресле-коляске используйте ободы на задних колесах для перемещения кресла-коляски с помощью рук пользователя.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию кресла-коляски в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кресла-коляски обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресло-коляска в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Кресло-коляску транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение кресла-коляски без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кресла-коляски. Повреждения кресла-коляски, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Кресло-коляска не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кресла-коляски осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кресло-коляска _____ 1 шт.

2. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кресла-коляски, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов Armed: H 011A соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08151 от 28.10.2010 г.

Изготовитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd.,

Danyang, 212310, Jiangsu, China

«Джиангсу ЮЮ Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.",

Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61