MET DRIVE PRO

Электроприставка в варианте исполнения MET OD-130

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание!

** Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!*

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Введение

Электрический привод (электроприставка) является дополнительным компонентом для ручного кресла-каталки. Подсоединив электрический привод к креслу-каталке, вы превратите его из ручного в электрическое.

	Для того, чтобы исключить вероятность получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, особенно с приведённой ниже инструкцией по технике безопасности. Наша компания не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, возникающие из-за неправильного использования изделия. Просим Вас сохранять руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации изделия.

Показания:

- паралич,
- ампутация нижних конечностей,
- повреждения, дефекты или деформация конечностей,
- повреждения или контрактуры суставов,
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:

- психические расстройства,
- нарушения зрения,
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации,
- потеря функциональности обеих рук,
- нарушения координации движений и статики,
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата,
- сердечная недостаточность,
- наркотическое или алкогольное опьянение.

2. Технические характеристики

Модель	**MET Drive Pro**
Диаметр передних колес	350 мм
Скорость	20 км/ч
Дальность хода на одной зарядке	50 км
Емкость аккумулятора	15A*2
Мощность	450W*2

3. Условия эксплуатации

Производитель несет ответственность только при использовании электроприставки в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Данное изделие предназначено для использования людьми с полной или частичной утратой способности передвижения при самостоятельном перемещении.

Изделие предназначено для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.

Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия (скорость, устойчивость, запас хода и т.д.)

При недостаточном опыте использования электроприставки рекомендуем перед началом активного использования тренироваться в обращении с ней.

Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.

Эксплуатация

- Перед началом использования проверьте все соединения, уровень заряда, работу тормоза приставки и работу стояночных тормозов кресла-коляски, дисплей и центральный адаптер. Если что-то из перечисленного работает некорректно, не начинайте поездку, пока проблема не будет устранена.
- Перед тем, как въезжать в горку или съезжать со склона, убедитесь, что тормоза работают корректно.
- Помните о том, что во время движения существует опасность перевернуться. Кресло-коляска с закрепленной приставкой является трехколесным транспортным средством. На поворотах, при преодолении препятствий, во время подъемов и спусков трехколесное транспортное средство имеет большую вероятность перевернуться, чем четырехколесное транспортное средство. Управляйте приставкой максимально аккуратно и выбирайте безопасный скоростной режим.
- Чтобы не перевернуться во время движения, поворачивайте только на небольшой скорости.
- Перед тем как использовать продукт на поверхности с уклоном, потренируйте вождение на ровной поверхности. Это предотвратит возникновение опасных ситуаций, таких как опрокидывание или столкновение.
- Никогда не двигайтесь перпендикулярно склонам. Преодолевайте препятствия, двигаясь строго прямо.
- Не передвигайтесь на скорости больше 6 км/ч на общественных дорогах.
- Не используйте устройство на съездах и подъемах в одиночку, делайте это с чьей-то помощью.
- Не используйте устройство на съездах и подъемах, если уровень заряда батареи меньше 50%.
- Устройство устойчиво к брызгам, но не является водонепроницаемым. Не пользуйтесь приставкой во время дождя, избегайте грязи и луж.
- В случае перегрева или возгорания батареи убедитесь, что батарея не соприкасается с водой или другими жидкостями. Производитель батареи рекомендует использовать песок (и только песок) для тушения возгорания.
- Принятие решения о безопасности того или иного маршрута - задача и ответственность пользователя. Опыт вождения и физическая подготовка - примеры факторов, которые влияют на принятие решения о выборе того или иного маршрута. С особой тщательностью оценивайте маршруты, которые проходят через:

  – Набережные, причалы и пристани, участки вблизи воды, мосты и дамбы без ограждений.

  – Узкие пешеходные дорожки, участки пути с уклонами (такие как пандусы и дорожные заезды),

узкие дорожки вдоль спусков/подъемов, а также горные тропы

– Узкие и/или крутые или с уклоном маршруты вдоль дорог или вблизи обрывов

– Дороги, покрытые листьями, снегом или льдом.


– Пандусы и подъемное оборудование.

- Общий допустимый вес пользователя (вместе с коляской) - не более 120 кг.
- Не пользуйтесь приставкой, если температура воздуха ниже -5°C или выше +40°C.
- Электромагнитное излучение, производимое мобильными телефонами и другими устройствами, может влиять на работу приставки.
- Если у вас имеются металлические конструкции в позвоночнике, пользуйтесь приставкой с осторожностью.
- Никогда не засовывайте руку внутрь колеса вашего кресла-коляски, если приставка включена.
- Расстояние от пользователя до руля, когда руль находится в перпендикулярном положении, должно составлять не менее 5 см.
- Расстояние от ног пользователя до адаптера должно составлять не менее 1 см.
- Не используйте продукт на скользкой или очень грубой поверхности, такой как гравий или галька.
- Максимально допустимая высота препятствия для преодоления с приставкой - 3 см. Пересекайте препятствия (например, бордюры), двигаясь строго вперед. Двигайтесь вперед медленно и осторожно, пока колеса приставки не соприкоснутся с поверхностью препятствия, а затем аккуратно пересеките препятствие. Во время этого процесса вам может потребоваться помощь другого человека.
- Выключайте приставку и используйте стояночный тормоз, когда присоединяете или отсоединяете приставку, а также, когда пользуетесь лифтом или подъемной платформой.
- Не используйте приставку на эскалаторах и движущихся переходах.
- Не бросайте и не роняйте устройство.
- Не оставляйте приставку без присмотра даже в выключенном состоянии.
- Не оставляйте приставку на солнце, если не используете её. Длительное нахождение приставки на солнце может привести к нагреву двигателя и батареи и (в крайнем случае) - к выходу приставки из строя. Пластиковые детали также быстрее приходят в негодность, если длительное время подвергаются интенсивному воздействию солнечных лучей. В случае перегрева устройства, вызванного воздействием солнечных лучей или использованием приставки в течение длительного времени, оставьте её в защищенном от солнца месте до тех пор, пока приставка не остынет.
- Двигатели и центральная труба приставки могут нагреться при интенсивном и длительном использовании устройства. Если это произошло, не прикасайтесь к нагретым частям (существует опасность ожога). Такое повышение температуры также может привести к протечке масла или смазки. В этом случае выключите приставку и оставьте её в защищенном от солнца месте до тех пор, пока устройство не остынет.
- MET One Drive Pro предназначена для использование только в качестве средства для транспортировки лиц с ограниченными возможностями передвижения. Приставка не предназначена для использования в других целях - например, для транспортировки товаров или для игр.
- Максимальная разрешенная скорость на дорогах зависит от местных ПДД.
- Езда на скорости выше 6 км/ч допускается только на частной территории.
- Приставка может быть источником электромагнитных полей, которые создают помехи в других устройствах. По этой причине выключайте приставку, когда не используете её.
- Если во время езды вы слышите необычные звуки (шум) или ощущаете странные вибрации, возможно, это сигнал того, что ослабли крепления приставки или коляски, или внутрь устройства

попали посторонние предметы. Незамедлительно обратитесь к авторизованному дилеру для выявления проблемы.

4. Управление

Дисплей

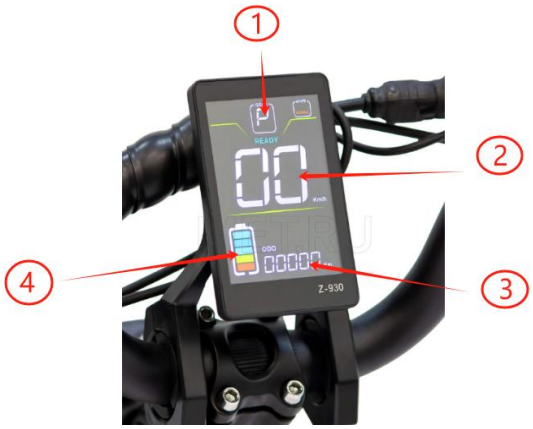

1. Индикатор режима скорости
2. Индикатор скорости, км/ч
3. Общий пробег
4. Индикатор заряда аккумулятора



1. Кнопка включения
2. Электрический тормоз
3. Кнопки регулировки скоростного режима/ «+» - включение фар/ «-» - включение задней скорости
4. Дисплей
5. Механический тормоз
6. Ручка газа
7. Кнопка подачи звукового сигнала

5. Зарядка аккумуляторов

Для того, чтобы снять аккумулятор, поверните ключ в замке аккумулятора, и потяните его вверх. Второй аккумулятор снимается таким же способом. Подключите аккумулятор к зарядному устройству.

	**Для заряда аккумуляторов используйте только оригинальное зарядное устройство!** **Замена элементов внутри корпуса аккумулятора требует специальных знаний и оборудования и производиться только специализированными сервисными центрами!**





Эксплуатация в условиях низких температур может привести к снижению запаса хода устройства.

6. Режим заднего хода.

Для того, чтобы переключить режим. Нажмите и удерживайте кнопку «**-**», пока не дисплее не отразится буква **R**




7. Включение LED фар

Для того, чтобы включить фары, нажмите и удерживайте кнопку «**+**», пока они не включатся





Советы для первичного использования

При недостаточном опыте перемещения есть вероятность возникновения опасных ситуаций, поэтому рекомендуем Вам попрактиковаться в безопасной обстановке перед активным использованием изделия.

⚠	Не нажимайте на газ, когда включаете устройство. Неконтролируемое движение может привести к несчастному случаю.

1. Проведите свой первый заезд на ровной поверхности и будьте максимально аккуратны и внимательны.
2. Совершайте тренировочный заезд там, где нет препятствий.
3. Всегда выбирайте тот скоростной режим, при котором вы сможете резко и без последствий затормозить или объехать неожиданно возникшее препятствие.
4. Аккуратно нажимайте клавишу газа, не допускайте резких движений и избегайте случайных нажатий клавиши газа. Всегда начинайте снижать скорость заблаговременно и удерживайте клавишу тормоза до тех пор, пока полностью не остановитесь.
5. Когда вы отпускаете клавишу газа, устройство не тормозит автоматически, приставка переходит в режим свободного хода. Чтобы остановиться, удерживайте клавишу тормоза или зажимайте рукой обод колеса коляски.
6. Если достигнута максимальная скорость, устройство перестает набирать скорость и переключается в режим свободного хода.
7. Перед тем как начать использовать приставку на поверхности с уклоном, потренируйте вождение на ровной поверхности.
8. Двигайтесь по поверхности с уклоном только с полностью заряженной батареей.
9. Будьте особенно внимательны и аккуратны на поверхности с уклонами - двигайтесь на небольшой скорости, чтобы иметь возможность резко и без последствий затормозить или объехать неожиданно возникшее препятствие. Никогда не двигайтесь по поверхности с уклоном в режиме свободного хода.
10. Не используйте приставку на крутых склонах. Непреднамеренное и неожиданное смещение центра тяжести может привести к опрокидыванию кресла-коляски.
11. С приставкой можно преодолевать бордюры и другие препятствия высотой до 3 см.
12. Запрещается преодолевать бордюры и другие препятствия высотой более 3 см, так как существует риск падения, получения травм и повреждения устройства.
13. Давление в колёсах кресла-коляски влияет на величину максимального расстояния, которое можно преодолеть на одном заряде, и на движение с приставкой в целом. Проверяйте давление в колёсах кресла-коляски перед началом каждого заезда

Техническое обслуживание и уход

Сервисное обслуживание и ремонт MET Drive Pro могут осуществляться только авторизованными дилерами. В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с продавцом. Перед тем, как проводить какие-либо операции с устройством, внимательно прочтите правила безопасности.

Проверка

Проверяйте MET Drive Pro перед каждым использованием. В таблице представлен список необходимых проверок и частота их проведения.

Состояние резины	Перед каждым использованием
Исправность тормоза	Перед каждым использованием
Исправность ручки газа	Перед каждым использованием
Исправность клавиши тормоза	Перед каждым использованием
Крепление адаптера к креслу-коляске	Еженедельно
Исправность зарядки	Ежемесячно

Нерегулярное выполнение проверок или их отсутствие может привести к возникновению не гарантийных неисправностей.

Чистка

Для чистки клавиш тормоза и газа, дисплея и зарядного устройства используйте кусочек влажной ткани с небольшим количеством мягкого чистящего средства. Для чистки адаптеров и колеса используйте пластиковую щётку, смоченную водой.

8. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на кресло-коляску – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия на аккумуляторную батарею – 6 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.

Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Гарантия не распространяется, если пользователь самостоятельно внес изменения в заводские настройки и параметры системы управления приставки.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____