# MET Tautmann (MN - 01/ 02 / 03 mechanic)

**Кровать механическая**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Введение | стр. 3 |
| 1.1. | Поставка | стр. 3 |
| 1.2. | Перемещение кровати | стр. 3 |
| 2. | Технические характеристики | стр. 3 |
| 3. | Правила безопасности | стр. 4 |
| 4. | Установка кровати | стр. 4 |
| 5. | Кровать в деталях | стр. 5 |
| 6. | Регулировка положений кровати с помощью рычагов | стр. 6 |
| 6.1. | Регулировка спинной секции (для моделей MN - 01/ 02/ 03) | стр. 6 |
| 6.2. | Регулировка бедренной секции (для моделей MN - 02/ 03) | стр. 6 |
| 6.3. | Регулировка высоты (для модели MN - 03) | стр. 6 |
| 6.4. | Регулировка икроножной секции (для моделей MN - 02/ 03) | стр.7 |
| 7. | Спинки кровати | стр. 7 |
| 8. | Колеса | стр. 7 |
| 9. | Боковые ограждения | стр. 8 |
| 10. | Инфузионная стойка | стр. 8 |
| 11. | Очистка и дезинфекция | стр. 9 |
| 12. | Хранение | стр. 9 |
| 13. | Техническое обслуживание | стр. 9 |
| 14. | Комплект поставки | стр. 9 |
| 15. | Гарантийные обязательства | стр. 10 |

## 1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях.
Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами.

| | |
|---|---|
|  | Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати. |

## ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

### 1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.
Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

### 1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

## 2. Технические характеристики

| КРОВАТЬ | MN-01 | MN-02 | MN-03 |
|---|---|---|---|
| | 1 ФУНКЦИЯ | 2 ФУНКЦИИ | 3 ФУНКЦИИ |
| Высота ложа (без матраса) – минимально | 43,5 см | 43,5 см | 40,5 см |
| Высота ложа (без матраса) – максимально | 43,5 см | 43,5 см | 69 см |
| Угол наклона головной секции (максимум) | 70° | 70° | 70° |
| Угол наклона бедренной секции (максимум) | НЕТ | 30° | 30° |
| Длина кровати | 215 см | 215 см | 215 см |
| Ширина кровати | 109 см | 109 см | 109 см |
| Длина ложа | 190 см | 190 см | 190 см |
| Ширина ложа | 90 см | 90 см | 90 см |
| Колеса, диаметр | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Максимальная рабочая нагрузка | 230 кг | 230 кг | 230 кг |

## 3. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

## 4. Установка кровати

- Освободите кровать от упаковки.
- Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Проверьте управление функциями кровати при помощи рычагов.
- Проверьте работу механизма блокировки колес.
- Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
- Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

## 5. Кровать в деталях





1. Головная секция ложа
2. Тазовая секция ложа
3. Бедренная секция ложа
4. Икроножная секция ложа
5. Боковые ограждения
6. Головная спинка
7. Ножная спинка
8. Колеса
9. Основание кровати
10. Рычаги механических приводов (от 1 до 3 в зависимости от модели)
11. Инфузионная стойка

| | |
|---|---|
| ⚠ | Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их. |

| | |
|---|---|
| ⚠ | Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя. |

## 6. Регулировка положений кровати с помощью рычагов


### 6.1. Регулировка головной секции (для моделей MN - 01/ 02/ 03)

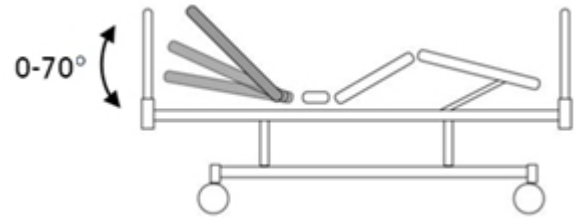


Головная секция ложа может быть поднята до 70 градусов при помощи левого рычага




### 6.2. Регулировка бедренной секции (для моделей MN - 02/ 03)

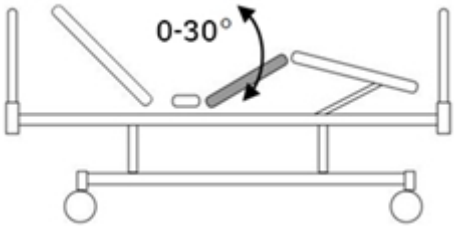


Бедренная секция ложа может быть поднята до 30 градусов при помощи правого рычага




### 6.3. Регулировка высоты (для модели MN - 03)

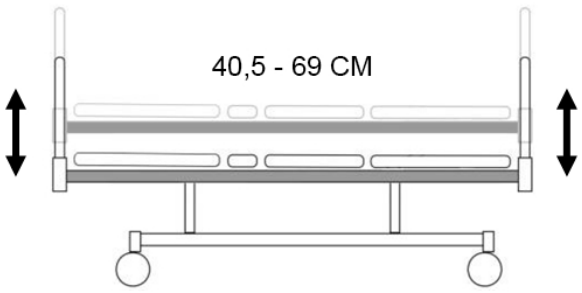


Регулировка высоты производится при помощи среднего рычага



## 6.4. Регулировка икроножной секции (для моделей MN-02/ 03)

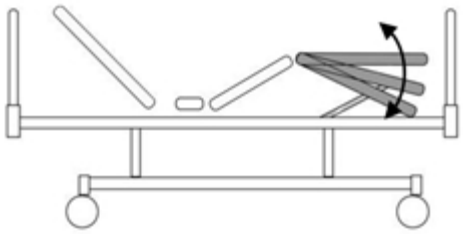

Икроножная секция ложа может устанавливаться на 5 различных уровнях при помощи автономного регулирующего устройства – растомат

## 7. Спинки кровати



Спинки кровати пластиковые, легко очищаемые, быстросъемные.

## 8. Колеса

У кровати 4 колеса диаметром 125 мм, 2 их которых, расположенные по диагонали, оснащены тормозами.




Чтобы заблокировать колесо, нажмите на рычаг тормоза так, как показано на фото.



Поднимите вверх рычаг блокировки ногой, чтобы разблокировать колесо.

| | |
|---|---|
|  | Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента. |

## 9. Боковые ограждения

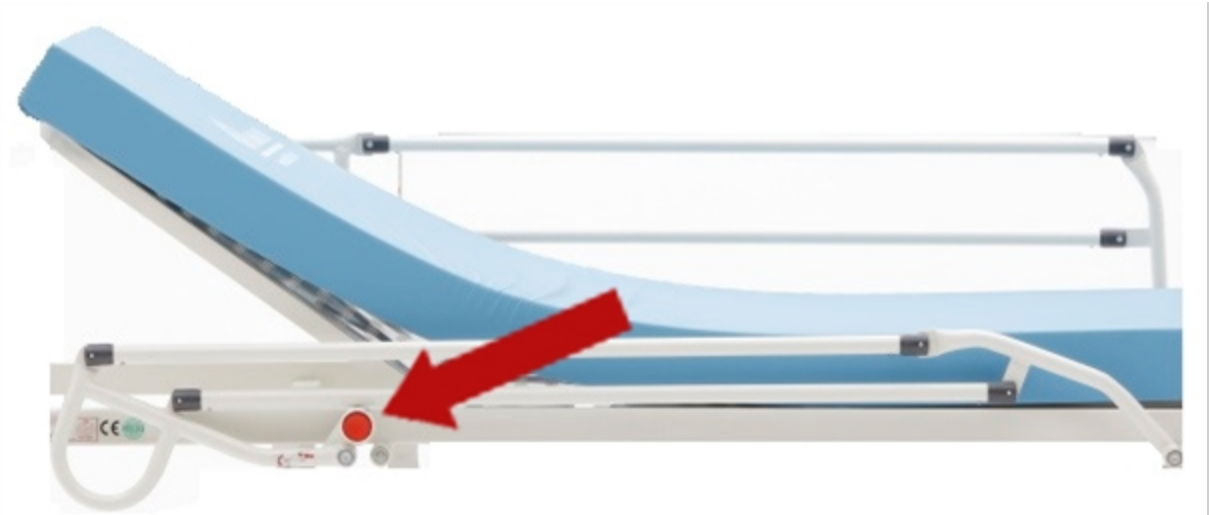

Боковые ограждения состоят из двух независимых друг от друга частей.

Чтобы опустить боковое ограждение, нажмите на красную кнопку-фиксатор и опустите ограждение.

Чтобы снова установить боковое ограждение в поднятое положение, нажмите на красную кнопку-фиксатор и поднимите ограждение вверх до легкого щелчка.

| | |
|---|---|
| ⚠ | Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы. |

## 10. Инфузионная стойка



Инфузионная стойка вставляется в технологические отверстия в четырех защитных бамперах кровати.

Инфузионная стойка имеет регулировку по высоте. Чтобы изменить высоту, ослабьте барашек, выставьте стойку на нужную высоту и снова затяните барашек.

## 11. Очистка и дезинфекция

| | |
|---|---|
|  | При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. |

| | |
|---|---|
|  | Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати. |

| | |
|---|---|
|  | Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати. |

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение.

## 12. Хранение

- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

## 13. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.
Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

## 14. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

## 15. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

## Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____