8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нём возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моём присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Кресло-коляска для инвалидов
Модель MET MK-280

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски МЕТ МК-280 противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потере функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски.
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания.
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.
- При посадке и высадке с кресла-коляски для инвалидов МЕТ МК-280 колеса необходимо поставить на тормоза.
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног.
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 градусов имеется опасность опрокидывания назад.
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед.
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация кресла-коляски

Посадка и высадка спереди:

- Поставьте кресло на стояночный тормоз.
- Отведите в сторону подножки для ног.
- При помощи сопровождающего лица переместите пациента.
- Верните обратно подножки и поставьте на них ноги.
- Пристегните ремень безопасности

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК - 280 складывается и раскладывается без инструмента.

Складывание (Рис.1) и раскладывание (Рис.2) кресла-коляски производится по вертикальной оси.

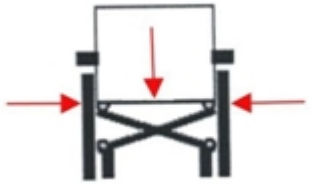


Рис.1

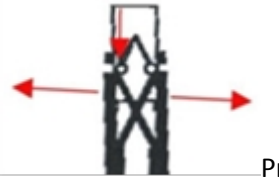


Рис.2

5. Транспортировка:

- Кресло-коляска удобно складывается и занимает мало места.
- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

6. Рекомендации по уходу:

- Обивку сиденья, спинки, подлокотники и туалетное устройство необходимо чистить теплой водой с мягкими моющими средствами.
- Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.
- Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Технические характеристики

Ширина сиденья, мм	440
Ширина коляски (по крайним точкам), мм	560
Привод	Механический
Вес, кг	9
Грузоподъемность, кг	100
Диаметр задних колес, мм	190
Диаметр передних колес, мм	140