Кресло-коляска для инвалидов

Модель FS860LB (MK-280)

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК-280 предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Передвижение возможно только при наличии сопровождающего лица.

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску для инвалидов МЕТ 903 в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики.

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и технических характеристик при использовании кресла- коляски какой-либо риск отсутствует.

1. Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:
- паралич;
- ампутации органов;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Противопоказания

Использование кресла-коляски МЕТ 903 противопоказано при:
- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного уведомления.

3. Требования безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла- коляски для инвалидов МЕТ 903 колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;

- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 имеется опасность опрокидывания назад;
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

4. Эксплуатация

Посадка и высадка пациента

- Посадка и высадка спереди:

1. Поставить кресло на стояночный тормоз.
2. Сложить вверх опору для стоп.
3. При помощи сопровождающего лица переместить пациента.
4. Опустить опоры стоп и поставить на них ноги.
5. Пристегнуть ремень безопасности

- Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставить кресло на стояночный тормоз.
2. Откинуть подлокотники.
3. Сложить опоры для стоп вверх.
4. При помощи сопровождающего лица переместить пациента.
5. Разместить подлокотники и подножки в исходное положение.
8. Пристегните ремень безопасности.

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска для инвалидов МЕТ 903 складывается и раскладывается без инструмента.

Складывание (Рис.1) и раскладывание (Рис.2) кресла-коляски для инвалидов МЕТ 903 производится по вертикальной оси.

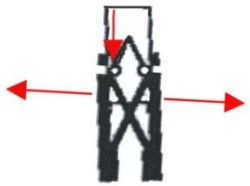


Рис.1

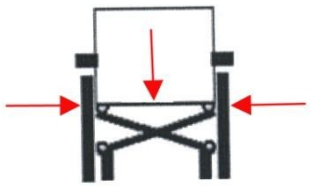


Рис.2

Транспортировка:

- Для экономии места при транспортировке, спинка складывается пополам.
- Кресло-коляска удобно складывается и занимает мало места.
- Нельзя использовать в качестве сиденья в автомобиле.

Рекомендации по уходу:

При эксплуатации кресло-коляска для инвалидов МЕТ МК-280 требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

5. Технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм	**780**
Ширина в рабочем состоянии, мм	**530**
Ширина в сложенном состоянии, мм	**200**
Высота, мм	**870**
Ширина сиденья, мм	**440**
Глубина сиденья, мм	**370**
Высота сиденья, мм	**450**
Вес нетто, кг	**7,8**
Грузоподъемность, кг	**130**
Диаметр задних колес, мм	**185**
Диаметр передних колес, мм	**130**

6.Комплектация

1. Кресло-коляска_____1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации_____1 шт.