Инструкция по эксплуатации

Тумба медицинская MET TL-170



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Предназначение

Изделия предназначены для размещения и хранения в лечебно-профилактических учреждениях у кровати тяжелобольного пациента медицинских изделий, перевязочного материала и медикаментов, за исключением наркотических и сильнодействующих лекарств. На выдвижном столике тумбы можно размещать медикаменты, медицинские изделия и медицинские инструменты, используемые во время проведения лечебных процедур, а также проводить начальные реабилитационные мероприятия для разработки верхних конечностей неврологических больных.

Показания к применению:

- размещение, хранение медицинских изделий, перевязочного материала и медикаментов, за исключением наркотических и сильнодействующих лекарств;
- размещение медицинских инструментов и медицинских изделий.

Противопоказания:

Противопоказаний к применению нет.

2. Общая характеристика

Изделие оборудовано;

- Корпуса тумбы 1 шт
- Столешница тумбы 1 шт
- Выдвижной ящик 1 шт
- Дверь - 1 шт
- Ручка - 2 шт
- Колесо - 4 шт
- Регулируемый столик - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Ширина тумбы, мм	500
Высота тумбы, мм	780
Глубина тумбы, мм	410

3 Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания медицинских изделий и принадлежностей 5 лет.

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом эксплуатации. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять инструкцию по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.


4 Подготовка к работе и порядок работы с изделием

- Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
- Проверить комплектность.
- Осуществить установку изделия

4 Описание

- Изделие представляет собой подвижную конструкцию из ЛДСП с откидным регулируемым столиком.
- Функциональный конструктив тумбочки состоит из одного выдвижного ящика и одного отделения с закрывающейся дверцей, оборудованного полкой.

Откидной столик с регулировкой высоты

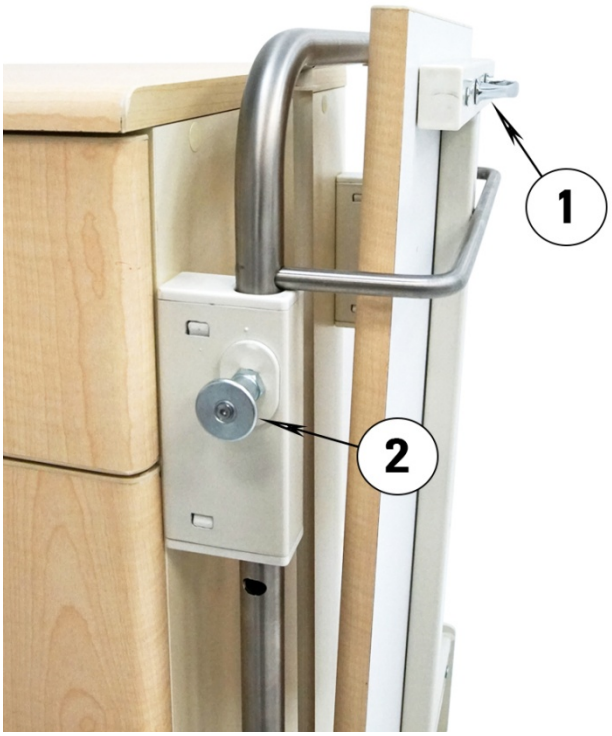

Изделие оборудовано откидным столиком, регулируемым по высоте.

Когда вы не используете столик, храните его в сложенном виде, вставленным в паз верхней части механизма регулировки его высоты, для предотвращения несанкционированного падения или поломки.

Чтобы раскрыть столик, потяните его наверх за **ручку (1)** под столешницей.

Высота откидного столика фиксируется при помощи **фиксатора (2)**, распольженного на фасадной стороне изделия.

Чтобы изменить высоту, оттяните фиксатор на себя и потяните раму столика наверх или вниз до нужного положения.

5 Поставка, упаковка, транспортировка, хранение

- Изделие поставляется в собранном виде.
- Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.
- Транспортировка изделия осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Условия при транспортировке изделий медицинских соответствуют условиям хранения 1 температурный диапазон от +5 до +40 ºС по ГОСТ 15150.
- В упаковке предприятия-изготовителя изделия должны храниться в закрытом помещении условиям хранения 1 температурный диапазон от +5 до +40 ºС по ГОСТ 15150 и относительной влажности до 80%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6 Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.

Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113 с использованием агрессивных материалов в основном щелочного характера, таких как каустическая сода, хлорные и спиртовые растворы, 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».
Изделие не стерильно. Стерилизации не подлежит.

7 Гарантия

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тумбы медицинские «МЕТ» по ТУ 32.50.30-021-11459109-2023 в вариантах исполнения с принадлежностями

Вариант исполнения:

№ . . . . . Дата изготовления « » ……... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . ….. . . .
(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
……

3. Заключение предприятия-изготовителя:
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы
. . . . . .
. . . . . .
……. . . ……..……

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
…….	. . ..
«. . .». . . . . 20 . . .г.	«. . .». . . . . 20 . . .г
М.П.	М.П.