ЛЕГО-М5 (BLC 2414 K)

Пятифункциональная медицинская кровать

с механическими регулировками

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Технические характеристики	стр. 3
3.	Правила безопасности	стр. 3
4.	Установка кровати	стр. 4
5.	Кровать в деталях	стр. 5
6.	Регулировка положений кровати	стр. 6
7.	Спинки кровати	стр. 6
8.	Колеса	стр. 7
9.	Боковые ограждения	стр. 7
10.	Инфузионная стойка и терапевтическая дуга	стр. 7
11.	Очистка и дезинфекция	стр. 8
12.	Хранение	стр. 8
13.	Техническое обслуживание	стр. 8
14.	Комплект поставки	стр. 8
15.	Гарантийные обязательства	стр. 9

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях.
Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами. Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.

	Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.
Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Технические характеристики

Габариты кровати	210*99,5 см
Габариты ложа	193*90 см
Высота ложа	46-66 см
Угол наклона головной секции	80 градусов
Угол наклона бедренной и коленной секции	45 градусов
Тренделенбург / Антитренделенбург	12 градусов

3. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении Тренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.


4. Установка кровати

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи рычагов.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

	Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.


	Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

5. Кровать в деталях

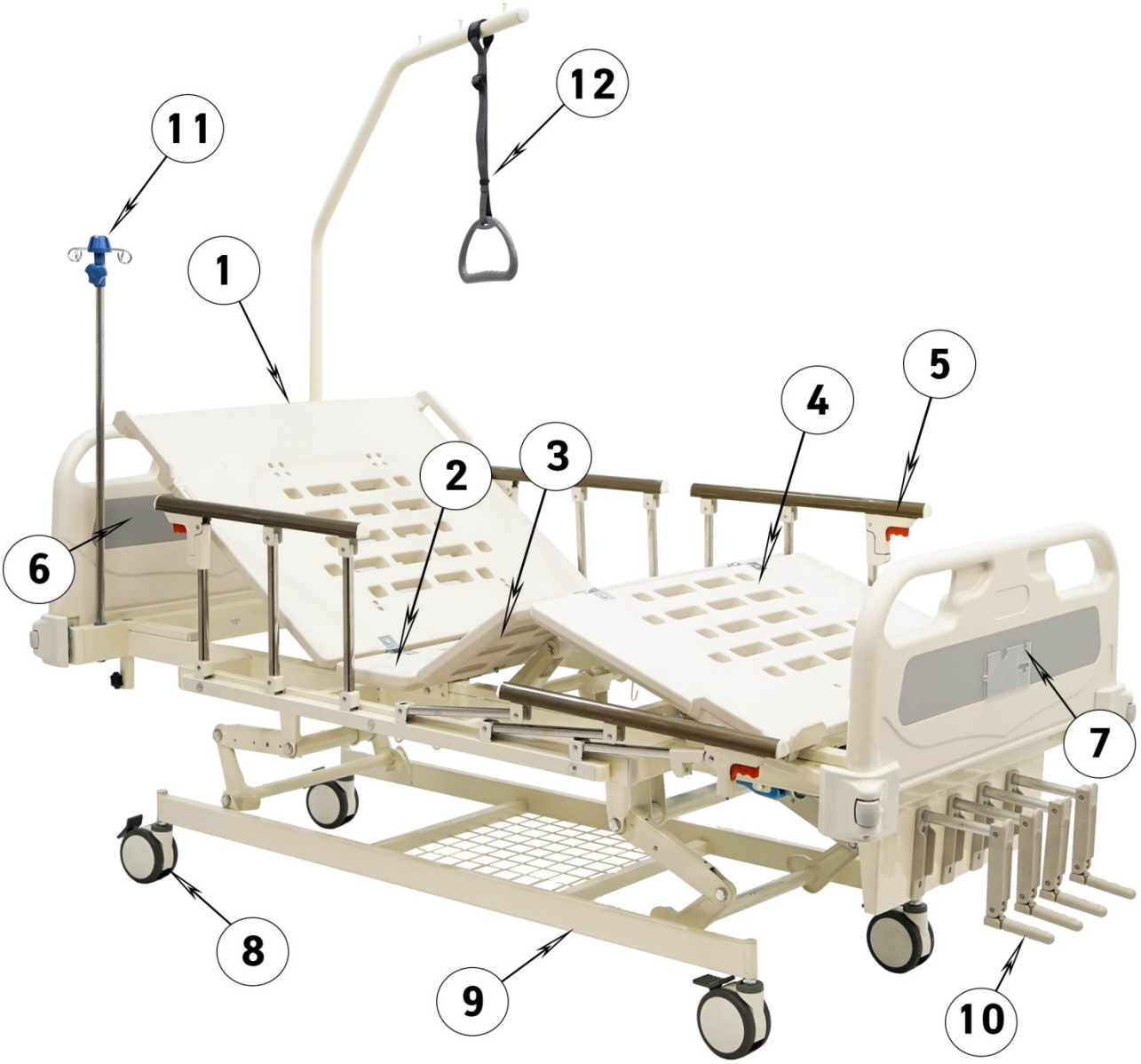


1. Головная секция ложа
2. Тазовая секция ложа
3. Бедренная секция ложа
4. Икроожная секция ложа
5. Боковые ограждения
6. Головная спинка
7. Ножная спинка
8. Колеса
9. Основание кровати
10. Рычаги механических приводов
11. Инфузионная стойка
12. Терапевтическая дуга

6. Регулировка положений кровати
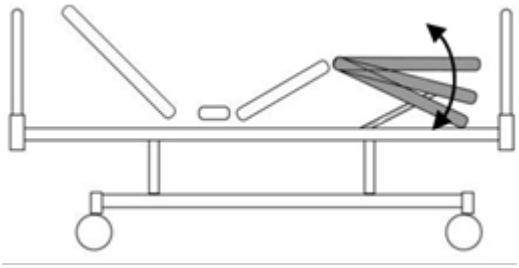
<table>
<tr>
<td></td>
<td>Регулировки положений кровати производятся при помощи рычагов механических проводов, находящихся в ножной секции кровати:
• Регулировка спинной секйии
• Регулировка бедренной секции
• Регулировка высоты
• Положения Тренделенбург/Антитренделенбург</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ВАЖНО!
Во избежание поломок кровати и травм медицинского персонала складывайте рукоятки рычагов механических приводов после регулировок положения кровати.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Икроножная секция ложа может устанавливаться на 5 различных уровнях при помощи автономного регулирующего устройства – растомат.</td>
</tr>
</table>

7. Спинки кровати

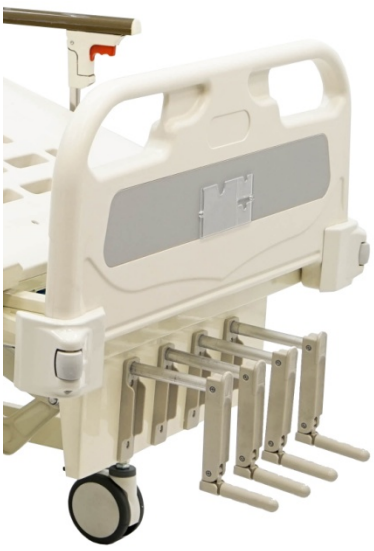

Спинки кровати легко очищаемые, двухслойные, изготавливаются из прочного пластика, легко монтируются и снимаются.

8. Колеса



У кровати 4 антистатических колеса в корпусе из противоударного пластика, диаметром 125 мм.
Колеса снабжены двухуровневой системой блокировки. Количество педалей для блокировки/разблокировки – 2 штуки, Педали снабжены маркировкой блокировки/разблокировки колес.

⚠	Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

9. Боковые ограждения



Боковые ограждения с блокировкой в двух положениях, выполнены из алюминия. Состоят из четырех независимых друг от друга частей.

Для опускания боковых ограждений необходимо зажать кнопку фиксатора и произвести ручное опускание ограждений. Кнопка фиксатора боковых ограждений выделена цветом, который отличается от цвета боковых ограждений

⚠	Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

10. Инфузионная стойка и терапевтическая дуга



Инфузионная стойка и терапевтическая дуга (штанга для подтягивания) вставляются в технологические отверстия в каркасе кровати.

Инфузионная стойка имеет регулировку по высоте.

Ручка терапевтической дуги регулируется по длине при помощи пряжки.

11. Очистка и дезинфекция

	При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение.

12. Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку и терапевтическую дугу.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

13. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

14. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.;
- инфузионная стойка – 1 шт.;
- терапевтическая дуга (штанга для подтягивания пациента) – 1 шт.

15. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____24 месяца_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____

Информация о производителе, месте производства и гарантийном обслуживании:

Кровать функциональная медицинская BLC 2414 (K) с принадлежностями:

регистрационное удостоверение РЗН 2016/4345 от 05 июля 2016 года;

срок службы изделия – не менее 5 лет; гарантийный срок – 12 месяцев.

Производитель :«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд.», Китай, Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Zhaofeng Industrial Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, China

Место производства: Jiangsu Yongfa Medical Equipment Co., Ltd, Changfeng village, Leyu Town, 215622 Zhangjiagang, Jiangsu Province, China

Сервисный центр: ООО «МЕТ»

142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г

На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.

Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (495) 126-92-79