MET ИВА

Кровать медицинская электрическая с туалетным устройством, в варианте исполнения MET EVA ABS

Руководство по эксплуатации



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Назначение изделия

Кровать подходит для использования в стационарных отделениях, отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии, а также для ухода за больными в домашних условиях.

2. Конструкция

Каркас кровати выполнен из профильных стальных труб, покрытых полимерно-порошковой эмалью.
Спинки выполнены из ЛДСП, устанавливаются на быстросъемные механизмы
Ложе представляет собой стальные ламели, покрытые полимерно-порошковой эмалью.

Кровать устанавливается на колеса с резиновым покрытием, колеса имеют тормоза-фиксаторы, расположенные не менее, чем на двух колёсах.
Регулировки секций осуществляются с помощью электрических приводов.
Боковые ограждения складные.
Туалетное устройство интегрировано в основание ложа кровати.

3. Эксплуатация

- Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.
- Каждый раз перед использованием кровати проверяйте ее полную работоспособность.
- Убедитесь, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.
- Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.
- Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается, как несоответствующее требованиям.

ВНИМАНИЕ!

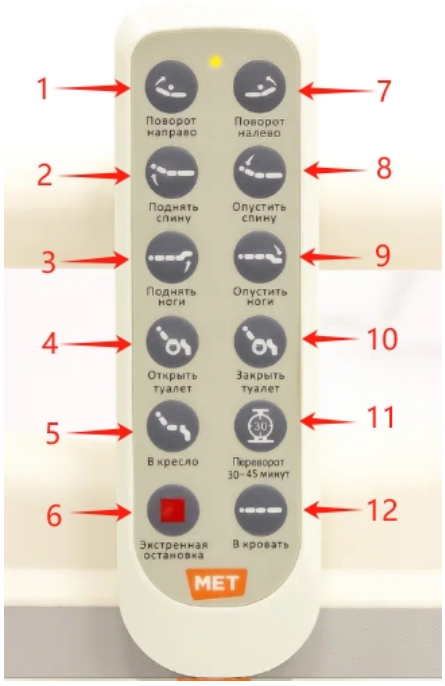
Производитель не несёт ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

4. Регулировка секций и туалетного устройства

- Регулировка секций кровати производится при помощи электрических приводов.
- Регулировка положения туалетного устройства производится при помощи электрического привода.

	**Запрещается выполнять функцию бокового переворота при поднятой спинной (головной) секции.**
	**Запрещается использовать функцию регулировки спинной секции при поднятой секции бокового переворота.**
	**Повреждения, полученные в случае таких регулировок, не являются гарантийными!**

	1. Поворот секции ложа направо 2. Поднятие спинной секции 3. Поднятие ножной секции 4. Открытие доступа к туалетному устройству 5. Положение «кардиокресло» 6. Экстренная остановка 7. Поворот секции ложа налево 8. Опускание спинной секции 9. Опускание ножной секции 10. Закрытие доступа к туалетному устройству

	11. Таймер для функции поворота* 12. Нулевое положение (все секции выравниваются в горизонтальную плоскость)

*Для включения или отключения таймера кнопку необходимо удерживать несколько секунд, световой индикатор меняет цвет – функция включена.

! Внимание ! Использование данной функции разрешено только под присмотром сиделки (лица, ухаживающего за человеком) и поднятых боковых ограждениях.

5. Правила безопасности

Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.

Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.

При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

6. Очистка и дезинфекция

• Отсоединить кабель питания и упаковать вилку кабеля таким образом, чтобы исключить попадание воды или водных растворов.

• Убедиться, что все разъемы вставлены полагающим образом.

• Электрические компоненты не должны иметь видимых повреждений. В противном случае проникновение воды или водных растворов может привести к их порче.

• Перед возобновлением пользования кроватью убедиться в отсутствии остаточной влаги просушкой или продувкой кабеля питания.

• Электрические компоненты не должны промываться струей воды или воздухом под давлением; их можно только протирать влажной тканью.

• В случае подозрения на попадание воды на электрические компоненты следует сразу же отключить кабель питания, принять меры к тому, чтобы он не был вновь включен.

	При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.

	Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

7. Техническое обслуживание:

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

! В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей!

8. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- матрас – 1 шт.;
- инфузионная стойка – 1 шт.;
- штанга для подтягивания– 1 шт.;
- столик съёмный– 1 шт.;
- ванночка для мытья головы– 1 шт.;
- судно– 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

9. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.

- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____