Тележка медицинская универсальная
MET SPY-130

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*** Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!**
*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.**

Габаритные размеры, см	Полки, ящики	Примечание

Ширина: 71 Глубина: 45 Высота: 98,5	2 выдвижных ящика, 3 полки, 1 ведро для отходов	Пластиковые ограждения с трёх сторон полок, опорные колеса Ø 75 мм

1. Предназначение

Тележка с 2 выдвижными ящиками, 3 полками и ведром для отходов, предназначена для оснащения кабинетов, операционных и других комнат в медицинских учреждениях и организациях.

2. Общая характеристика

Тележка состоит из:

- корпуса с боковой ручкой, четырехколесной опоры, на 2 колесах тормоза-фиксаторы, 2 без тормозов;
- 2 выдвижных ящиков;
- 3 полок;
- 1 ведра для отходов.

3. Описание

Каркас выполнен из ABS-пластика. Тележка установлена на четырех поворотных колесных опорах медицинской серии из немаркой резины диаметром 75 мм.
Полки выполнены из объёмноформированного ABS-пластика с выпрессованой 4-сторонней отбортовкой. На каждой полке с трёх сторон имеются высокие пластиковые ограждения. Также в комплекте поставляется пластиковое ведро, расположенное на подвижном кронштейне.
Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка, хранение

Тележка обернута полиэтиленовой плёнкой и упакована в картонную коробку.
Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

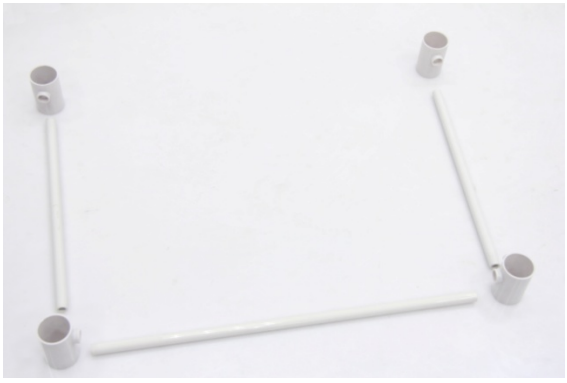
5. Уход

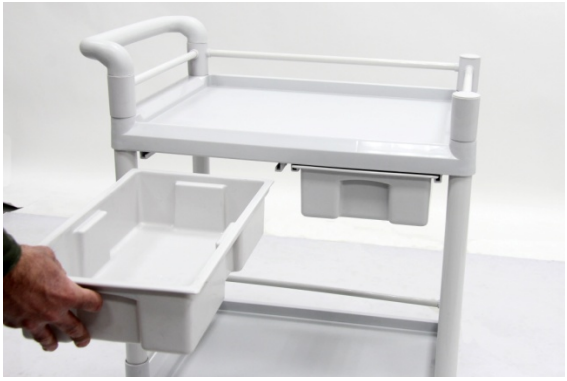
По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.
Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные

винтовые соединения.
Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Сборка

Тележка поставляется в разобранном виде.
Пожалуйста, собирайте изделие в соответствии с данной инструкцией.

Шаг 1: Распаковка Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу.	
Шаг 2: Сборка П-образных каркасов для полок Вставьте трубки в технологические отверстия втулок. В итоге должен получиться П-образный каркас. Обратите внимание, что технологические отверстия на втулках должны располагаться на одной высоте.	
Шаг 3: Установка боковой ручки и верхней полки Проденьте ручку и заглушки с резьбой через втулки. На полученную конструкцию установите полку (резьба должна пройти насквозь).	
Шаг 4: Установка трубок каркаса Вкрутите трубки каркаса в резьбовые соединения.	 

Шаг 5: Установка соединительных муфт Вкрутите соединительные муфты с обратных сторон трубок каркаса.	
Шаг 6: Установка кронштейна для ведра для отходов и средней полки Установите кронштейн на трубку каркаса Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса. Установите вторую полку.	
Шаг 7: Установка нижней полки Повторите шаги 4 и 5. Наденьте П-образный каркас на трубки каркаса. Установите нижнюю полку.	
Шаг 8: Колеса Вкрутите колеса в резьбу соединительных муфт	
Шаг 9: Установить ящики. Вставьте ящики в пазы под верхней полкой.	

7. Комплект поставки

Тележка – 1 шт
Полка – 3 шт
Ящик – 2 шт
Колеса – 4 шт
Столешница – 1шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт

8. Гарантия

Гарантийный срок – ____ месяца со дня продажи.

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации.
Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте.
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Дата продажи:_____

м.п.

Продавец: _____

_____