# MET MARTIN
# Тележка медицинская (Столик-гусь)

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



* Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

## 1. Предназначение

Изделие предназначено для оснащения комнат, палат и специальных помещений больниц и (или) родильных домов для обеспечения кормления и проведения досуга лежачих пациентов.

| | |
|---|---|
|  | Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации. |

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| • Длина: 65 см<br>• Ширина: 40,5 см<br>• Высота столешницы (min/max): 71 / 118 см | • Максимальная распределенная нагрузка: 15 кг<br>• Вес изделия: 9 кг |

## 3. Общие характеристики

Изделие состоит из:

- сборно-разборной конструкции основания;
- колесных опор;
- столешницы.

## 4. Описание изделия

4.1. Основание – сборно-разборная конструкция, изготовленная из стальной трубы различного сечения.

4.2. Основание устанавливается на 4 колесные опоры диаметром 50 мм, изготовленные из ударопрочного пластика, не оставляющего следов на напольном покрытии. Две колесные опоры оборудованы автономным тормозным устройством.

4.3. Фиксация вертикальной стойки в вертикальном (рабочем) состоянии производится при помощи 2 болтов.

4.4. Столешница изготовлена из ЛДСП с окантовкой из ударопрочной резины/каучука на стальном карасе и обладает возможностью регулировки высоты и угла наклона рабочей поверхности.

4.5. Регулировка высоты столешницы производится телескопически - путем движения вертикальной стойки конструкции столешницы внутри вертикальной стойки подвижного основания изделия. Фиксация необходимого положения высоты столешницы производится при помощи винтового механизма с рукояткой.

4.6. Угол наклона рабочей поверхности столешницы фиксируется при помощи винтового механизма с рукояткой.

4.7. Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

## 5. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упаковано в картонную коробку. Транспортировка должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировке изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

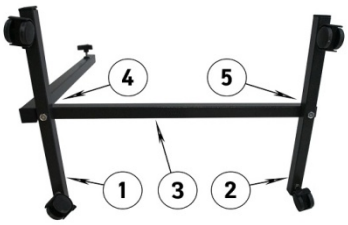
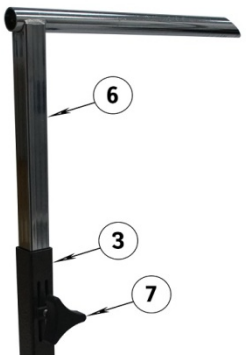
Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5˚С до +40˚С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

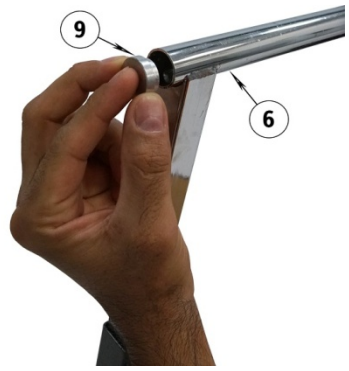
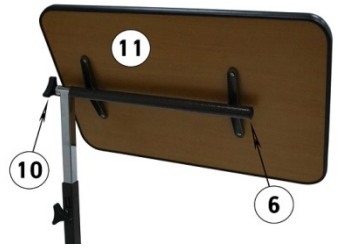
| | |
|---|---|
|  | Запрещается:<br>• Ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.<br>• Наступать или наезжать на изделия транспортными средствами.<br>• Пробивать упаковку боковыми захватами автопогрузчиков или другими острыми предметами.<br>• Перевозить изделия в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозки. |

## 6. Сборка

Изделие поставляется в разобранном виде.

Достаньте изделие из упаковки и положите его на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу.

| | |
|---|---|
| **Шаг 1: Сборка основания**<br><br>• Соедините элементы основания (1, 2, 3) болтами (4, 5) в местах крепления<br>• Прикрутите колесные опоры к элементам основания (1, 2) |  |
| **Шаг 2: Установка Г-образной стойки**<br><br>Вставьте Г-образную стойку (6) в основание (3) так, как показано на фото.<br>Выставьте нужную высоту и зафиксируйте с помощью винтового механизма (7) |  |

| | |
|---|---|
| **Шаг 3: Установка регулировочной шпильки**<br><br>Вставьте в отверстие Г-образной стойки (6) регулировочную шпильку (8) так, как показано на фото. |  |
| **Шаг 4: Установка фиксирующей гайки**<br><br>Установите фиксирующую гайку (9) в отверстие Г-образной стойки (6) так, как показано на фото |  |
| **Шаг 5: Установка фиксирующего винтового механизма**<br><br>Установите фиксирующий винтовой механизм (10) в гайку (9) так, как показано на фото |  |
| **Шаг 6: Установка столешницы**<br><br>Наденьте столешницу (11) на Г-образную стойку (6) стойку так, как показано на фото, и зафиксируйте нужный угол наклона при помощи винтового механизма (10). |  |

## 7. Правила ухода

7.1. Периодически или при необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивайте ослабленные винтовые соединения.

7.2. Для очистки пользуйтесь любыми чистящими средствами на водной основе, за исключением абразивных средств. Для очистки от сложных загрязнений используйте мягкую щеточку.

7.3. По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

## 8. Гарантия

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

| | |
|---|---|
|  | Запрещается оказывать чрезмерную нагрузку (больше 15 кг) на столешницу изделия во избежание повреждения и возможности получения травмы. |

## Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____