MET RK-120

Кресло медицинское многофункциональное смотровое с дополнительными поддержками голени

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.


1. Правила безопасности

- Если в кресле обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Рекомендуемая непрерывная нагрузка не должна превышать 2 минуты, интервалы между нагрузками - не менее 5 минут.
- Кресло должно быть зафиксировано во время работы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Крепко фиксируйте подлокотники и опоры для ног, дабы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.
- При проведении технического обслуживания или очистки кресло должно быть отключено от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кресла отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кресла.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

2. Технические характеристики

Длина / ширина кресла в разложенном виде	1780 x 1000 мм
Длина / ширина ложа	1780 * 600 мм
Высота ложа / сиденья	610 - 810 мм
Угол наклона спинной секции	0 - 70 градусов
Угол наклона сиденья	0 - 12 градусов
Угол наклона Антитренделенбург	0 - 7 градусов

3. Управление функциями кресла при помощи пульта управления

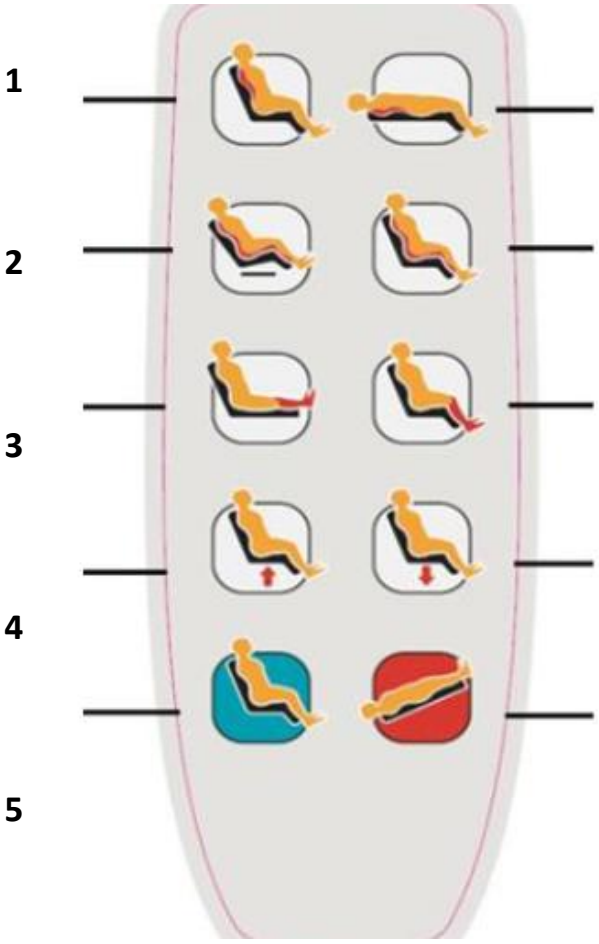

1, 6 . Регулировка спинной секции

2, 7. Одновременная регулировка спинной и ножной секции

3, 8. Регулировка ножной секции

4, 9. Регулировка высоты

5. Приведение кресла в сидячее положение с минимальной высотой для начала или окончания осмотра – одновременным нажатием двух педалей

10. Положение тренделенбург

	При обнаружении сбоев в двигателе, блоке управления или пульте управления, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

4. Условия использования

- Температура воздуха: от 5℃ до 40℃, относительная влажность: не более 80%.
- Требование по электропитанию: ~220 В±10%, 50 Гц±1Гц, входная мощность: 90 В-А.
- Не используйте оборудование в огнеопасной среде, содержащей огнеопасный анестезирующий газ, кислород или закись азота.

5. Очистка и дезинфекция

Перед очисткой кресло должно быть приведено в удобное положение и отключено от электросети.

- Выполняйте очистку и дезинфекцию обивки гинекологического кресла с помощью 20% раствора спирта, смешанного с 2% глутаральдегида.
- Возможна дезинфекция кресла с помощью ультрафиолетового излучения.
- После окончания эксплуатации произведите очистку кресла и оботрите его насухо, чтобы исключить попадание жидкости во внутренние электрические компоненты.

6. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кресла могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов не реже 1 раза в 6 месяцев:

1. Шнуры и штифты регулируемых секций – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
2. Моторные поршни – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Регулярно проверяйте целостность соединительного провода панели управления.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кресла и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

7. Комплект поставки:

- гинекологическое кресло – 1 шт.;
- лоток из нержавеющей стали – 1 шт.;
- встроенный аккумулятор – 1 шт.;
- опора по Геппелю – 2 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

8. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
-

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель: _____

Срок гарантии: ___12 месяцев___

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____

Кресло медицинское многофункциональное смотровое с дополнительными поддержками голени МЕТ RK-120

регистрационное удостоверение РЗН 2020/12537 от 11 ноября 2020 года;

срок службы изделия – не менее 5 лет;

Производитель: ООО "МЕТ", Россия, Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), двлд. 4, стр.2, эт.5, блок Г

Место производства: Bahçelievler Mah. Yavuz Cad. No:31/A Hasanoğlan, Elmadağ, Ankara, Turkey

Сервисный центр: ООО «МЕТ»

142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), двлд. 4, стр.2, эт.5, блок Г

На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.

Телефон сервисной службы: (495) 775-75-95, (903) 775-00-26