MET PE - 230

Кровать медицинская
электрическая пятифункциональная



Памятка пользователя

MET GABBY

1. Правила безопасности

- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.

- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пользователя.

- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пользователя.

- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пользователя – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо. Также не садитесь на поднятые секции кровати (спинную или ножную)

- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пользователя или других лиц.

- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.

- Если кровать перемещается вместе с пользователем, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

Внимание

Каждый раз, когда питание отключается и затем восстанавливается, требуется выполнить операцию сброса.

Внимание

Пожалуйста, обратите внимание, что кровать будет поднята в верхнее положение при выполнении "операции сброса", если вы впервые подключаете кровать к сети или произошёл внезапный сбой питания.

Операция сброса


Контроллер остается в режиме сопряжения в течение 20 секунд после подключения к электросети. В это время индикаторная полоса мигает, а синий свет на контроллере горит постоянно.

После завершения сопряжения зеленый индикатор на контроллере горит постоянно (этот шаг можно пропустить, если сопряжение уже было выполнено ранее). Пожалуйста, нажмите любую кнопку на пульте управления (кроме кнопок ПАРА и Блокировка от детей), когда зеленый свет на контроллере горит постоянно. В этот момент контроллер выполнит операцию сброса. Во время процесса сброса оба подъемных двигателя поднимут кровать в верхнее положение. Во время подъема двигателя вы можете нажать любую кнопку (кроме ПАРА и Блокировка от детей), чтобы прервать процесс, а затем снова нажать любую кнопку (кроме ПАРА и Блокировка от детей), чтобы продолжить подъем до тех пор, пока двигатель не достигнет верхнего положения. После того, как подъемный двигатель достиг верхнего положения, сброс будет завершен.

Теперь можно выполнять обычные операции

2. Функции кровати

MET PE – 230 многофункциональная кровать с пультом дистанционного управления.
На рисунке пояснение к кнопкам пульта управления

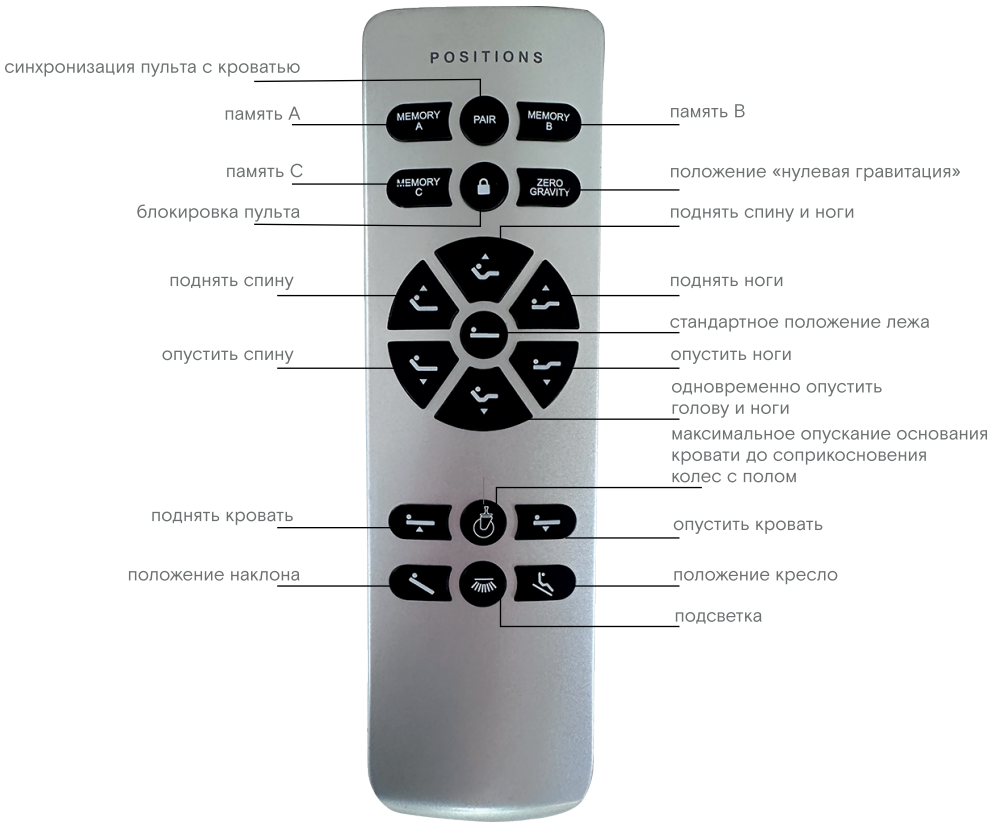



Регулировка высоты вверх



Регулировка высоты вниз
до соприкосновения колесиков с полом



Положение наклона



Положение кресло

3. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____ 12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____

Сервисный центр: ООО «МЕТ», 108811, город Москва, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), домовлад. 4, стр.2, эт.5, блок Г
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.
Телефон сервисной службы: (495) 150-27-26, (495) 126-92-79


MET