8. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец:

_____

Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ»
по ТУ 32.50.50-013-11459109-2021 с
принадлежностями в варианте исполнения:

Матрас противопролежневый медицинский

MET AIR WC-100



Инструкция по эксплуатации

1. Показания к применению

Уход за лежачими пациентами, для пациентов с тяжелыми стадиями онкологии, для пациентов с инсультом или инфарктом, для пациентов, которые не полностью обездвижены, для пожилых людей, которые мало двигаются в силу старческого бессилия, для пациентов с травмами и болезнями, не позволяющими активно двигаться, для улучшения циркуляцию крови в тканях, для нейтрализации мышечное напряжение в момент отдыха, для профилактических средств при нарушениях центральной нервной системы, для предотвращения возникновения и прогрессирования пролежней, для предупреждения появления дефектов опорно-двигательной системы, нормализация сна, для противостояния появления и развития язв, для комфортного лежачего состояния пациента, при котором части тела под давлением периодически массируются и вентилируются.

2. Комплект поставки

- матрас;
- компрессор;
- шланг соединительный;
- комплект для ремонта;
- инструкция.

3.Технические характеристики

Длительность цикла, мин.	12
Уровень шума, дБ	28
Габариты матраса, см.	200 х 80 х 8*
Грузоподъёмность, кг	135
Напряжение сети, В	220/230
Частота, Гц	50-60

4. Противопоказания

Травмы позвоночника и спинного мозга, скелетно-шейных вытяжениях, вес пациента выше 250 кг (зависимости от варианта исполнения изделия).


5. Рабочие условия окружающей среды

Температура: 10 – 35 С°
Относительная влажность воздуха: 15-85 %

*длина меняется в зависимости от выбранного режима, веса пациента и от степени надува

6. Инструкция по эксплуатации

Разложите матрас на кровать и застелите его простыней. Поместите компрессор под ножной секцией кровати. Подключите компрессор к электросети, после этого включите компрессор кнопкой 1 (см. рис.).
Отрегулируйте давление воздуха рычагом 2(см. рис.), в соответствии с требованием пользователя.
Для включения статической функции, установите рычаг 2(см. рис). в положение «». Это облегчает смену положение пациента

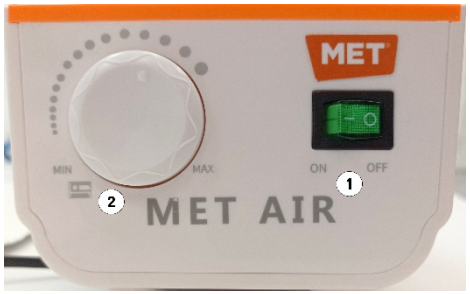

7. Указания по технике безопасности

- Если во время работы компрессора возникает ненормальная ситуация, например громкий шум или странный запах, немедленно отключите прибор от электросети.
- Людям весом больше 135 кг не рекомендуется пользоваться матрасом.
- Людям, недавно перенесшим операцию и с не зажившими швами или ранами, не разрешается пользоваться матрасом.
- Держите надувной матрас вдали от острых предметов.
- Храните изделие вдали от открытого огня и любых нагревательных поверхностей, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.
- Регулярно производите гигиеническую обработку матраса мыльным или неагрессивным дезинфицирующим раствором.
- Храните матрас в сдутом сложенном виде, в сухом проветриваемом помещении.
- Матрас должен использоваться только по назначению врача.